

# VILMER kompressionsväst

ART.NO 51103

Vilmer kompressionsväst används efter bröstreduktion vid gynekomasti för att minska svullnad och risk för blödning. Justerbara breda axelband, kompression i olika zoner, dubbelt material och stadig kompression över skuldror och bröst för optimal kompression. Blixtlåås. Hellång modell.

Finns i vit: 51103-09 och svart: 51103-00.

## Storlek:

Vilmer finns i storlek XS-XXL.

## Indikationer:

Vilmer rekommenderas i samband med bröstreduktion vid gynekomasti, med eller utan borttagning av bröstkörtel. NordiCares kompressionsplagg används efter plastikkirurgiska ingrepp för att uppnå ett så bra behandlingsresultat som möjligt. Kompression minskar risken för svullnad och blödning efter operation, ger bättre läkning och även smärtlindring.

## Material:

Polyamid 80%, Elastan 20%. Latex fri.

## Tvättråd:


Maskintvätt 40°C, kan vid behov tvättas i högre temperaturer, max 60°C. Produkten håller längre vid tvätt i lägre temperaturer. Bör plantorkas, ej torktumling. Stäng blixtlåsen före tvätt. Om blodfläckar uppstått, blötlägg eller tvätta i kallt vatten. Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel då detta kan försämra materialets funktion.

## Måttagning:

Plagget skall sitta tight utan att vara obekvämt. En tid efter operation, då eventuell svullnad gått ner, kan mindre storlek väljas.

**OBS!** Kompressionsplagg är designade för att sitta tight. Optimal kompression och stöd kräver noggrann måttagning.

Stl	Byst cm	Midja cm
XS	81-86	73-78
S	87-93	79-85
M	94-100	84-90
L	101-108	91-97
XL	109-116	98-105
2XL	117-124	106-113

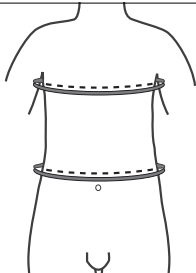


51103-09



Justerbara axelband. Blixtlåås med hyskhak och mjukt skydd.



51103-00

Vilmer bak

Compression  
STRONG

**STRONG** är den högsta graden av kompression. Genom att välja en storlek mindre eller större kan graden av kompression justeras.

