

EasyStand^{ij} Bantam^{Medium}




SE

Bruksanvisning

Innehållsförteckning

Introduktion.....	1
Säkerhetsföreskrifter.....	2
Inställningar och användning.....	5
Pow'r Up Lift alternativ.....	11
Underhåll.....	16
Försäljningsvillkor.....	18

Var miljömedveten och återvinn denna produkt efter dess användning.

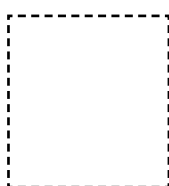

Kryssa i rutan vid eventuell specialanpassning av produkten.

CE-märkningen **upphör** att gälla vid specialanpassad produkt.



Plats för etikett

Introduktion

Grattis till ditt köp av en EasyStand Bantam Medium!

EasyStands utbud av produkter är avsedd för personer som kan inte förflytta sig självständigt eller med hjälp av stödperson och/eller en lyftanordning. Det är ett användbart hjälpmedel för rehabilitering, hem, skola och arbete. EasyStands Bantam Medium ger användaren stöd från sittande till stående position. Olika alternativ kan läggas till för att underlätta enskilda behov.

Anvisning

EasyStand Bantam Medium är avsedd att hjälpa personer som har svårigheter med att resa sig från sittande till stående position. För brukare som väger upp till 90 kg.

Denna handbok bör läsas i sin helhet och grundligt av alla som skall använda enheten. Detta kommer säkerställa att EasyStand Bantam Medium har monterats korrekt och används på bästa möjliga sätt.

Det är nödvändigt att du inspekterar din EasyStand Bantam Medium minst en gång i veckan för att säkerställa att den är i säkert skick. EasyStands justeringar som anges i produktens manual kan göras av användaren själv genom att följa bruksanvisningen. Efter att en justering är gjord, kontrollera din EasyStand för att säkerställa att alla komponenter är ordentligt säkrade enligt instruktionerna. Byte av slitna delar, stora anpassningar eller andra viktiga rättelser bör hanteras av en auktoriserad återförsäljare eller ett servicecenter. Endast godkända reservdelar bör användas för att säkerställa säkerhet.

Gå med i den stående gemenskapen!

Vårt mål är enkelt - ge människor med funktionshinder möjlighet att stå upp för deras hälsa. Förening, dela, och lära av andra personer med funktionshinder, föräldrar till barn med särskilda behov, vårdpersonal och experter i stående från en av gemenskapens sociala nätverk. Genom att hålla ditt stående program "I huvudet" kommer du att ha störst möjlighet att bibehålla en permanent rutin som maximerar alla fördelarna med att stå!

Läs, dela och kommentera på EasyStands blogg på blog.easystand.com

Säkerhetsföreskrifter

- **Bantam Medium** - är utformade för att passa det flesta individer från 48"-66" (122-168 cm) och upp till 200 lbs. (90 kg).
För mer detaljerade specifikationer besök vår webbplats www.easystand.com
- Rådgör med en terapeut eller läkare innan du påbörjar ett stående program.
- EasyStand Bantam Medium får endast användas med en vuxen i närheten. Lämna aldrig ett barn utan uppsikt.
- Kontrollera EasyStand regelbundet, säkerställ att alla muttrar, bultar och justerbara delar är ordentligt åtdragna.
- Justera aldrig en EasyStand när en användare är i stående ställning.
- Det är nödvändigt att inspektera din EasyStand minst en gång i veckan för att säkerställa att den är i säkert skick. Ägna särskild uppmärksamhet åt lösa delar. Om EasyStand är utrustad med tillvalet Pow'r up lift kontrollera eatt lektriska kablar sitter fast och inte är slitna. Byte av slitna delar och stora anpassningar bör hanteras av en auktoriserad återförsäljare eller ett servicecenter. Endast godkända reservdelar bör användas för att säkerställa säkerhet och prestanda.
- Om EasyStand används i hemmiljö, vänligen kontrollera enheten före varje användning för att säkerställa att det inte finns några skador eller oväntat slitage på EasyStand som kan ha orsakats oavsiktligt av husdjur, skadedjur eller barn.
- Om enheten utsatt för temperaturer lägre än 50°F (10°C), måste den värmas upp till rumstemperatur före användning.
- **Användning:** Temperatur: 41°F (5°C) -104°F (40°C), Relativ luftfuktighet: 20% - 90% at 86°F (30°C), Lufttryck: 700 to 1060hPa.
- **Förvaring/Transport:** Temperatur: 14°F (-10°C) -122°F (50°C), Relativ luftfuktighet: 20%-90% at 86°F (30°C), Lufttryck: 700 to 1060hPa.
- EasyStand kan användas på en maximal höjd av 3.050 meter (10,000 fot)
- Använd kroppsvikt för att sänka sätet.
- EasyStand Bantam Medium är endast till för inomhusbruk på jämna ytor.
- Våldsamt stötande på EasyStand Bantam Medium kan orsaka att enheten välter.
- Sätt alltid det bakre hjulen i låst läge innan du övergår till EasyStand. Använd dessa lås för att hålla EasyStand stilla.
- EasyStand Bantam Medium elektriska lyft uppfyller kraven för IEC 60601-1 och 60601-2. *Endast Bantam Medium Pow'r Up Lift alternativ*
- Låsning av hjulen på den mobila alternativet är till för att hålla enheten på plats när du överför eller när du står stilla, och är inte avsedd att användas som en dynamisk broms för att stoppa en rullande mobil enhet.



Varning: Den här utrustningen har utformats för att rymma en rad användare; därför har enheten olika öppningar och hål. Undvik att placera fingrar eller andra kroppsdelar i något av dessa områden.



Varning: Denna utrustning har olika rörliga delar, bekanta dig med enheten och undvik att placera händerna eller fingrarna nära någon av dessa områden.

Inställningar och användning

Läs alla instruktioner noggrant innan du påbörjar några justeringar.

Sittdjupinställningar

1. Innan justering av sitt djupet se till kontrollspaken är i läge Sit to stand. Sätet bör vara sänkt till sittande läge för att justera det lättast.

2. Lossa spakvredet under sittdelen (höger sida), ett fullt varv bör vara tillräckligt.

3. Tryck in fjäderknappen på vänstra sidan under sittdelen. Använd ryggstödet som hävstång för att justera sittdjupet till önskat läge, notera färgen där fjäderknappen låser. Om inte sittdjupet rör sig fritt lossa sittfordret i framkant som är fäst med kardborre. Lås spakvredet.

Höftvinkel

Under sittdelen sitter två armar som man justerar höftvinkeln med. På dessa armar sitter två rattvred med en grå spärr. Lossa spärren genom att dra den nedåt och vik sedan över den till andra sidan tills den klickar i låst läge. Lossa sedan rattvredet tills du stöter på motstånd OBS! Att tvinga rattvredet förbi sitt stopp kommer att förstöra mekanismen.


⚠ Varning: se till att stödja ryggdelen med en hand innan du lossar de grå spärrarna. För så fort detta görs finns risk att ryggdelen faller bakåt. Använd ryggdelen som en hävstång för att justera armarna under sittdelen. Över rattvreden finns indikatorhål på armarna som visar samma färger som dekalen för inställning av sittdjupet. Justera armarna så att samma färg syns i båda hålen.

Lossa dom grå spärrarna på rattvreden för att sedan låsa armarna genom att dra åt rattvreden. Det kan vara nödvändigt att endast delvis låsa rattvreden och dra ryggdelen fram och tillbaka för att tillåta låssprintarna i armarna att hitta sina låslägen. Lås sedan de grå spärrarna och dra åt rattvredet helt.

Kontrollspaken

5. Kontrollspaken har 3 lägen SIT TO STAND, NEUTRAL och SUPINE

6. Det finns en röd låsspärr som förhindrar oavsiktlig förändring av lägena. Den måste lyftas uppåt in i spaken innan läget kan ändras.

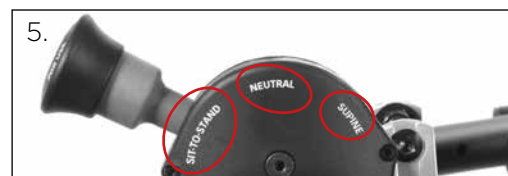

SIT TO STAND LÄGE

7. Med kontrollspaken i SIT TO STAND läge är ståfunktionerna regelmässigt vinkelrätt mot golvet med fotplattorna stationerade. Sittdelen höjs och sänks och ledar i knä och höft med där ryggstödet i huvudsak bibehålls vinkelrätt mot golvet. Så att användarens bål är i upprätt position genom hela resningen.

VIKTIGT: Alla sittdjups- och höftvinkelinställningar görs enbart i SIT TO STAND läge.

NEUTRAL läge

8. Genom att lyfta den röda låsspärren och flytta kontrollspaken till Neutral, får nu fotstöd och ryggstöd rörlighet. Snabba eller oväntade rörelser förhindras genom de två hydrauliska stötdämparna. Dessa dämpare kräver inget underhåll eller justering.

9. För användarens säkerhet kan inte fotstödet röra sig mer än parallellt med sittdelen. Inte heller kan knävinkeln röra sig förbi underbenet när det är i vinkelrätt läge mot golvet. När sittdelen är parallellt mot golvet kan användare positioneras till fullt liggande läge. Om användaren redan är i fullt stående läge har ett byte till Neutral läge ingen funktionellt effekt fören man säker sittdelen.



Supineläge

Varning: Ett korrekt monterat och inställt nackstöd måste användas vid supineläge. Vinkeljusteringar får inte göras i supineläge.

10. Genom att lyfta den röda låsspärren och flytta kontrollspaken till supineläge låser man fotstödsdelen, sittdelen och ryggdelen tillsammans. Denna inställda position bibehålls genom hela resningen och kan höjas och sänkas med den hydrauliska pumpen eller ev elfunktion.

11. Vid positionering av en patient i ryggläge med mindre än ett fullt utjusterat läge, måste det påpekas att den totala möjliga resningen kommer att minska med motsvarande. Det vill säga, fotstödsstaget kommer aldrig tillåtas röra förbi vinkelrätt mot golvet.

Exempelvis - Om ryggläget är låst vid ett läge där skenbenet är positionerat 20° mot lårbenet, kommer inte den inställda ryggläge positionen Kunnas höjas förbi den punkt där sittdelen är 20G mindre än vertikalt och fotstödsenheten vinkelrätt mot golvet. Skador på enheten kan uppstå om du försöker överskrida dessa mekaniska begränsningar.

⚠ Varning: Låssystemet som används i supineläget har väldigt högt hållande styrka. När man lär känna den hydrauliska pumpen eller ljudet av den elektriska gaskolven, beroende av hur enheten är utrustad, uppfattar operatören enkelt när mekanismens gränser nåtts. Om det blir en alltför stor belastning på dessa mekaniska låssystemet, kan det orsaka skador på antingen lås eller på enhetens ram. Garanti täcker inte skador orsakade av felaktig användning av produkten.



Justering av bord


12. Lossa spärren på rattvreden genom att dra den nedåt och vik sedan över den till andra sidan tills den klickar i låst läge. Lossa sedan rattvredet tills du stöter på motstånd OBS! fortsätt inte att skruva ut vredet när man stött på motstånd. Att tvinga rattvredet förbi sitt stopp kommer att förstöra mekanismen.

Bordet kan nu tas bort helt eller justeras till den önskade positionen med hjälp av fjädersprintarna.

13. Lossa dom grå spärrarna på rattvreden för att sedan låsa armarna genom att dra åt rattvreden. Det kan vara nödvändigt att endast delvist låsa rattvreden och dra bordet fram och tillbaka för att tillåta låssprintarna i armarna att hitta sina låslägen. Efter detta lås de grå spärrarna i ursprungsläge och dra åt rattvredet helt för att låsa bordet.

14. För att justera bordets vinkel, lossa vreden cirka 2 varv på vardera sida. Stöd bordet med ena handen innan du lossar den andra hävstångsklämman.

15. Flytta bordet till önskad vinkel och dra åt båda vreden ordentligt.

 **Varning:** Justera aldrig eller ta bort bordet medan patienten är stående eller i en delvis stående position.



Justering av bordet

16. För att justera bordets höjd, lossa rattvreden som sitter på baksidan av enheten och ställ in önskat läge. Dra åt samtliga vred ordentligt.

Ryggstödsjustering

17. För att justera ryggstödet vinkel, vrid på vredet till önskat läge uppnås.

Bålstödsjustering

18. Eventuella bålstöd kan tas bort vid behov. Dessa justeras vertikalt och horisontellt genom att lossa vredet och flytta sidostödet till önskat läge, dra åt ordentligt.

Höftstödsjustering

19. Eventuella höftstöt kan justeras genom att lossa vredet under stolen och flytta de till önskat läge, dra åt ordentligt.



Huvudstödsjustering

20. För att justera huvudstödet höjd, lossa vredet på baksidan av ryggstödet, flytta till önskat läge och dra åt ordentligt.

21A. För att justera huvudstödet djup, lossa vredet på baksidan av huvudstödet och dra till önskat läge, dra åt ordentligt.


21B. För att justera huvudstödet djup, lossa vredet på baksidan av huvudstödet och dra till önskat läge, dra åt ordentligt.


Fotstödsjustering

22. Justera fotplattan genom att lossa det röda spärrhandtaget på fotplattan, justera upp eller ner och till önskad vinkel, dra åt ordentligt. Fotplattorna kan skifta sida för att öka räckvidden.

Knästödsjustering

23. För att justera knästöden, lossa vreden och flytta till rätt position. Dra åt ordentligt när önskat läge är uppnått. Knästöden kan fällas ur vägen genom att trycka ned den röda knappen, knästöden kan också justeras djup och höjd.

 **Varning:** Gör endast knästödsjusteringar när användaren är i sittande position.

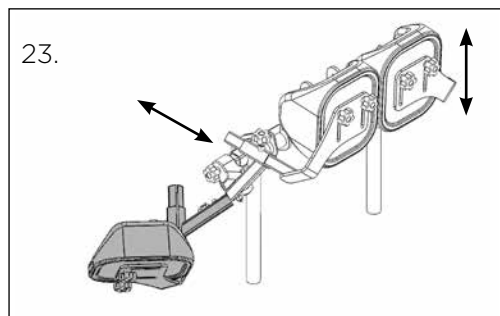

Pow'r Up Lyft alternativ

Ladda batteriet


Lyften på EasyStand Bantam Medium Pow'r Up använder två 12 volt förseglade blybatterier på 2,9 ampere vardera. En EasyStand Bantam Medium kan lyftas cirka 100 gånger på en full laddning. Ett ljudlarm hörs när batteriet är svagt. Ladda batteriet efter att larmet signalerat. Att ladda batteriet fullt tar cirka 8 timmar. EasyStand Bantam Medium kan höjas till stående läge medans den laddas. Laddarens funktion är att uppnå fullt batteri och sedan ge en konstant potentiell strömförsörjning för att hålla batteriet i bästa skick utan att överbelastas. När batteriet EMF stiger till en förinställd punkt, kommer laddarens krets inte att tillåta högsta utgående spänning att överstiga detta värde. Denna fabriksinställning skyddar batteriet från överdriven förbrukning av elektrolyt som kan uppstå av överladdning. Laddaren kan hittas i verktygspåsen på baksidan av enheten.

⚠ WARNING: Använd endast Linak laddare med modellnummer 00CH01-XX eller 10CH01S-00, försedd av Altimate Medical med Pow'r Up funktion.

1. Anslut laddarens stickkontakt till ett vägguttag. Lampan på laddaren kommer att lysa grönt, vilket indikerar att den är inkopplad.
2. **FIG. A.** Anslut laddarens sladd in i sidan på handkontrollen. Lampan på laddaren kommer bli gul, vilket indikerar att batterierna laddas.
3. När batterierna är laddade, lyser lampan på laddaren grönt.
4. Ladda batterierna helt var tredje månad eller mindre under perioder av oregelbunden användning eller icke användning.

⚠ WARNING: Se till att kablarna är ordentligt fastsatta enligt bruksanvisningen. Låt inte kablarna hänga på golvet eller fastna i objekt.

FIG. A

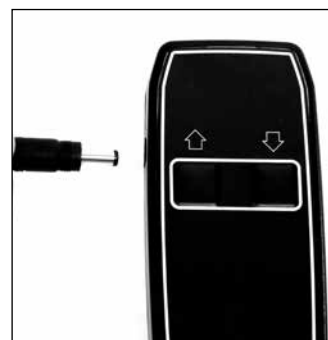

Handstationen är en tillämpad del av typ BF.

FIG. B



Aktivering av mekanisk nödöppning

⚠️ VARNING: Genom att använda den akuta frigöringsknappen som det primära sättet att återgå till sittande position kan det leda till att enheten skadas.

Använd endast det mekaniska frisläppet i nödsituationer.

FIG. C. Frisläppningen låter användaren sänkas till en sittande position i den osannolika händelse av att batteriet tappar laddning när användaren är i stående position.

Ställdonet dras endast in om knappen frisläppning är dragen och det finns vikt på stolen. Frisläppsknappen ligger på vänster sida om sätet och signaleras med ett rött märke med ordet "EMERGENCY".

1. För att aktivera den mekaniska frisläppningen, dra ut snabbfrigörande stiftet som finns under sätet.

2. Tryck ihop handtaget och om nödvändigt, pressa ned på handtaget.

FIG. C



Byte av batteri

Batterierna är anslutna till kontrollboxen i Pow'r Up Lift (Den svarta boxen där sladdarna är anslutna). När batterierna är slut och behöver bytas ut, öppna inte batteriboxen. Vänligen kontakta Altimate Medicals kundservice eller din medicinska återförsäljare för information om hur du gör ett byte av din kontrollbox. Det rekommenderas att batterierna byts ut vart fjärde år. Vänligen kontakta en lokal återvinnings central för information om återvinning av gamla batterier.

IP Rating

IP Klassning är en klassificeringssystem som anger skydd från damm, vatten och stötar för elektrisk utrustning och höljen. Pow'R up Lifts komponenter är klassade till IP21.

Definitionen för IP21 är enligt följande:

Första tecken definition: 2 - skydd mot fasta föremål med 12,5 mm diameter och större.

Andra tecken definition: 1 - skydd mot vertikalt fallande vattendroppar.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Pow'r Up alternativa komponenter har konstruerats och testats för att uppfylla tillämpliga EMC-Krav. Det är inte troligt att du kommer att stöta på problem med din EasyStand på grund av otillräcklig elektromagnetisk kompatibilitet. Men om du upptäcker något ovanligt (t.ex. intermittent) beteende i din Pow'r up alternativ och EasyStand, används nära en möjligt störande utrustning såsom mobiltelefoner, mikrovågsugnar, eller radiosändning mast, detta kan vara en indikation på elektromagnetiska störningar. Om detta inträffar, använd den mekaniska frisläppningen för att sänka enheten till en sittande position och flytta EasyStand bort från den störande enheten. Vänligen rapportera förekomst av möjliga elektromagnetiska störningar till AMIs kundtjänst.

Vägledning och tillverkardeklaration - Elektromagnetisk strålning


EasyStand Bantam Medium är avsett för användning i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av EasyStand Bantam Medium ska säkerställa att den används i sådan miljö.		
Strålningstest	Immunitetstest	Elektromagnetisk miljö - Vägledning
RF Strålning CISPR 11	Grupp 1	EasyStand Bantam Medium använder RF energi endast för sin interna funktion. Därför är dess RF-strålning mycket låg och kommer troligen inte att orsaka några störningar på närliggande elektronisk utrustning.
RF Strålning CISPR 11	Klass B	EasyStand Bantam Medium lämpar sig för användning i alla inrättningar, inklusive hemmiljöer och andra byggnader som är direkt anslutna till det publika lågspänningsnät som försörjer byggnader som används för bostadsändamål.
Harmonisk strålning IEC 61000-3-2	Klass A	
Spänningsfluktationer/flimmer utsläpp IEC 61000-3-3	Uppfyller	

Riktlinjer och tillverkardeklarationer - elektromagnetisk immunitet

EasyStand Bantam Medium är avsett för användning i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av EasyStand Bantam Medium ska säkerställa att den används i en sådan miljö.			
Immunitetstest	IEC 60601 Test nivå	Kravnivå	Electromagnetic Environment - Guidance
Elektrostatisk Urladdning IEC 61000-4-2	± 6 kV Kontakt ± 8 kV Luft	± 6 kV Kontakt ± 8 kV Luft	Golven ska vara av trä, betong eller kakelplattor. Om golven är täckta med syntetsmaterial bör den relativa luftfuktigheten vara minst 30%.
Snabba elektriska transienter/skurar IEC 61000-4-4	± 2 kV för huvudledning ± 1 kV för in/utmatningsledningar	± 2 kV för huvudledning ± 1 kV för in/utmatningsledninga	Nätspänningens kvalitet ska vara av typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.
överspänningar IEC 61000-4-5	± 1 kV line(s) till ledning(ar) ± 2 kV ledning(ar) till jord	± 1 kV line(s) till ledning(ar) ± 2 kV ledning(ar) till jord	Nätspänningens kvalitet ska vara av typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.
Spänningssänkning, korta strömavbrott och spänningsvariationer i ingångsledningarna. IEC 61000-4-11	<5 % UT (>95 % Fall i UT) under 0,5 Cykel 40 % UT (60 % Fall i UT) under 5 Cykel 70 % UT (30 % Fall i UT) under 25 cykel <5 % UT (>95 % Fall i UT) under 5 s	<5 % UT (>95 % Fall i UT) under 0,5 Cykel 40 % UT (60 % Fall i UT) under 5 Cykel 70 % UT (30 % Fall i UT) under 25 cykel <5 % UT (>95 % Fall i UT) under 5 s	Nätspänningens kvalitet ska vara av typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö. Om användaren av EasyStand Bantam Medium kräver fortsatt drift under strömavbrott, rekommenderar vi att EasyStand Bantam Medium drivs från en avbrottsfri strömkälla eller ett batteri.
Nätfrekvens (50/60 Hz) magnetfält IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Kraftrekventa magnetfält ska ligga på nivåer som är karakteristiska för en typisk plats i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.
OBS: U_r är spänningen i växelströmsnätet innan testnivån applicerades.			

Vägledning och tillverkningsinstruktioner – Elektromagnetisk immunitet

EasyStand Bantam Medium är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av EasyStand Bantam Medium ska säkerställa att den används i sådan miljö.

Test av immunitet	IEC 60601 Test Nivå	Krav Nivå	Elektromagnetisk miljö - Vägledning
<p>Dirigerad RF IEC 61000-4-6</p> <p>Utrålad RF IEC 61000-4-3</p>	<p>3 Vrms 150 kHz to 80 MHz</p> <p>3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz</p>	<p>3 Vrms</p> <p>3 V/m</p>	<p>Bärbar och mobil RF kommunikationsutrustning bör inte användas på närmare avstånd till någon del av EasyStand Bantam Medium, (inklusive kablar) än det rekommenderade separationsavstånd som beräknas enligt den ekvation som är tillämplig för sändarens frekvens.</p> <p>Rekommenderat separationsavstånd</p> <p>$d = 1.2 \sqrt{P}$</p> <p>$d = 1.2 \sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz</p> <p>$d = 2.3 \sqrt{P}$ 800 MHz to 2.5 GHz</p> <p>Där P är sändarens maximala uteffekt i Watt (W) enligt tillverkaren av sändare och d är det rekommenderade separationsavståndet i meter (m).</p> <p>Fältstyrkorna från beslutad RF-sändare som fastställts genom en undersökning av de elektromagnetiska förhållandena på platserna, bör vara mindre än överensstämmelsenivån i varje frekvensområde^a.</p> <p>Störningar kan uppstå i närheten av utrustning märkt med följande symbol:</p> 
<p>OBS 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.</p> <p>OBS 2: Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetiska utbredningar påverkas av uppsugningsförmåga och reflektion från strukturer, föremål och människor.</p>			
<p>^a Fältstyrkan från fasta sändare, som basstationer för radio (mobila eller trådlösa) telefoner och kommunikationsradio, amatörradio, AM och FM- radiosändningar och TV-sändningar kan inte teoretiskt förutsägas med exakthet. För att bedöma den elektromagnetiska miljön med avseende på fast RF-sändare, bör en elektromagnetisk undersökning på plats övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där EasyStand Evolv används överstiger tillämpliga RF-kravnivån som nämns ovan, bör EasyStand Bantam Medium iaktas och normal drift bekräftas. Om onormal prestanda observeras kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga, till exempel att vrida eller flytta EasyStand Bantam Medium.</p> <p>^b Över frekvensområdet 150 kHz to 80 MHz, bör fältstyrkorna vara mindre än 3V/m.</p>			

Rekomenderade separationsavstånd mellan bärbara och mobila RF-kommunikationsutrustningar och EasyStand Bantam Medium

EasyStand Bantam Medium är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där störningar från utstrålad RF är kontrollerad. Kunden eller användaren av EasyStand Bantam Medium kan hjälpa till att förebygga elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minsta avstånd mellan bärbara och mobila kommunikationsutrustningar (sändare) och EasyStand Bantam Medium som rekommenderas nedan enligt kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.

Sändarens uppskattade maximala uteffekt W	Separationsavstånd enligt sändarens frekvens m		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0.01	.12	.12	.23
0.1	.38	.38	.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

För sändare vars maximala uteffekt inte räknas upp ovan, kan det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) uppskattas med den ekvation som är tillämplig på sändarens frekvens, där P är sändarens maximala uteffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare.

Notera 1: Vid 80 MHz och 800 MHz, gäller det högre frekvensområdet.

Notera 2: Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetiska spridningar påverkas av upptagning och reflektion från strukturer, föremål och människor.

Underhåll

Rengöring/Desinfektion

- Rengör EasyStand Bantam Medium med mildt, icke-slipande desinfektionsmedel eller med tvål och vatten.
- Kontrollera EasyStand Bantam Medium minst en gång i veckan för att säkerställa att alla muttrar, bultar och justerbara delar är ordentligt åtdragna, misslyckande av detta kan resultera i att delar faller av, vilket kan orsaka en kvävningsrisk för barn.
- Använd inte blekmedel eller andra blekmedelbaserade rengöringsmedel på EasyStand Bantam Medium.
- Desinfektionsdukar är säkert för användning på metall och icke-porösa ytor.
- Använd en fuktig svamp med mild tvål eller ett mildt, icke-slipande desinfektionsmedel.
- Neopren ytan renas med mild tvål och vatten.
- Neopren överdrag kan tas bort och tvättas för hand med vatten. Lufttorka överdraget. Var alltid försiktig när du tar bort och sätter tillbaka överdraget.
- Kemtvätta inte några föremål med stoppning.
- Om EasyStand Bantam Medium används av en användare, rengör månadsvis eller vid behov.
- Om EasyStand Bantam Medium används av flera användare, rengör efter varje användning.

Textil (Dartex eller allmänt motsvarande)

- De rekommenderade anvisningarna för rengöring och desinfektion bör följas när det är möjligt för att undvika skada på PU-membran, vilket kan leda till funktionsfel.
- För yttlig smuts, använd en engångsstrasa och en varm lösning av neutralt rengöringsmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel.
- Desinficera med hjälp av en 0,1% lösning av natriumhypoklorit (1000ppm klorin), starkare blekmedel är inte rekommenderat.
- Skölj eventuellt kvarvarande rengöringslösning med vatten och torka tyget innan återanvändning eller förvaring.
- Använd ej strykjärn.

Underhåll av hydraulisk gaskolv

- En inledande inkörningsperiod på cirka 50-100 hela cykler är normalt för hydraulsystemet. Den mycket noggranna passning av dess passdelar ger varje pump en egen "känsla" och signatur ljud, signalerat av ett gnisslande eller ett kort mjukare slag ljud.
- Om pumpen läcker olja, ring din lokala EasyStand leverantör för ett utbyte. Serienumret på EasyStand kommer att behövas.
- Använd inte för mycket kraft på pumphandtaget eller använd pumpen som hjälp för att flytta en EasyStand. Detta kan orsaka skador på pumphandtaget och/eller pumpen och kommer upphäva alla garantier.
- Användare underhåll är inte ett krav eller rekommenderat på hydraulisk pumpen. Applicera aldrig smörjmedel, hushållsolja, fett eller liknande produkter till någon del av enheten. Vissa preparat kan reagera med packningen som används vid tillverkningen av denna produkt. Det kan skada enheten och upphäva garantin.
- Överskrid inte den beräknade viktgränsen.
- Om EasyStand levererades och utsattes för en temperatur som understiger 50°F (10°C), måste det hydrauliska systemet värmas upp till rumstemperatur före användning. Misslyckande med att följa detta steg kan skada enheten och göra den obrukbar.
- När stående position har uppnåtts, kan pumpen sjunka ett bit, detta är normalt.
- Det är inte alltid nödvändigt att pressa pumphandtagen hela vägen ner till det lägre sätet. Prova att trycka tillbaka handtaget i olika positioner om det är svårt att sänka sätet.
- Om enheten är i stående position och ej i användning, är det nödvändigt att pressa på sätet av enheten när du trycker pumphandtagen bakåt.

Rengöring av hydraulisk gaskolv

Den hydrauliska gaskolven på EasyStand har hög risk att få in luft i den inre mekanismen av enheten. Detta orsakas vanligen av pumpningen och är helt normalt. Vänligen följ de enkla stegen nedan, eftersom den manuella hydrauliska systemet inte kan fungera korrekt om inte den instängda luften rensas bort på ett korrekt sätt. Enheten måste vara i rumstemperatur för denna procedur.

1. Pumpa med handtaget tills fullständig förlängning har uppnåtts.
2. Forsätt att pumpa handtaget långsamt ytterligare 10 gånger. Detta kommer rensa systemet ordentligt.

Underhåll och skötselanvisningar

Serviceintervall

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert bör regelbunden service och kontroll utföras. Behovet av service skiftar och måste bedömas från fall till fall, helt beroende på användning och slitage. Kontrollera alla rörliga delar och fästdetaljer med avseende på slitage. Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt och av kvalificerad personal. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att kontakta Anatomic SITT AB.

Regelbunden rengöring och tvätt

Om produkten brukas av en ensam brukare så bör rengöring ske minst en gång i månaden. Om produkten har flera brukare så bör rengöring ske efter varje tillfälle. Plast- och metalldelar kan torkas av med en fuktig trasa, alternativt tvättas med antibakteriell vätska eller liknande. Tänk grönt, tänk på miljön! Använd gärna biologiskt nedbrytbart tvättmedel.

Rekonditionering

Produkten kan rengöras i tvättkabinett eller motsvarande vid max 60° i 3 minuter om alla dynor, foder, elektriska komponenter och textilier har avlägsnats. Låt produkten lufttorka ordentligt och smörj därefter rörliga delar. Använd ej tryckluft. Avtagbara överdrag kan med fördel maskintvättas i 40°. Torktumlas ej.

Kontrollera hjälpmedlets skick regelbundet och utför underhåll vid behov.

Anpassning och specialanpassning

Rekommendationer

Varje gång produkten ändras på något sätt måste bedömning göras om det är en anpassning eller en specialanpassning.

En anpassning är en ändring som görs inom ramarna för produktens CE-märke. Allt annat är specialanpassning. Anpassningar får endast göras av den som bedöms kvalificerad för uppgiften och ska alltid utföras på ett yrkesmässigt sätt. Att produkten är CE-märkt innebär att den uppfyller alla relevanta europeiska säkerhetskrav.

Notera att en riskbedömning alltid bör göras, såväl vid anpassning som vid specialanpassning, av ett hjälpmedel. Produkten får aldrig bli farlig för brukaren att använda efter anpassning.

Produkten bör förses med upplysning att den är anpassad till en specifik brukare, så att den inte kan misstas för en produkt i standardutförande.

Försäljningsvillkor

Garanti

Garanti gäller ett (1) år mot fabrikationsfel fr.o.m. leveransdatum. Garanti utgår inte för yttre påverkan eller "onormal" hantering. För garantibehandling krävs felaktig vara i retur. Bifoga alltid följesedel.

Reklamation

Beskriv felet samt orsak så ingående som möjligt. Åberopa garantireparation eller eventuellt garantiutbyte. Bifoga en kopia på fakturan och ange att produkten skall tillbaka till dig efter reparation. Ange leveransadress, kontaktperson samt telefonnummer.

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Returer

Felbeställda eller fellevererade varor skall returneras inom 20 dagar från leveransdatum. Bifoga alltid en kopia på både följesedel och faktura. Ange orsak till retur av dina varor.

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Vid retur senare än 20 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 80 % av fakturavärde

Vid retur senare än 60 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 60 % av fakturavärde

Vid retur senare än 150 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 40 % av fakturavärde

Senare än 360 dagar från leveransdatum

Varorna återtages ej

▲ Specialanpassade produkter återtages ej

262 West 1st St.
Morton, MN 56270 USA
Toll Free: 800.342.8968 or 507.697.6393
Fax Free: 877.342.8968 or 507.697.6900
email: info@easystand.com
www.easystand.com



EasyStand  [®] **CE**
standing made easy



Standing technology should only be used under the guidance of a physician with recommendations for standing program protocol and any medical precautions. Standing programs should be monitored by the attending therapist. AMI maintains a policy of continual product improvement and reserves the right to change features, specifications, and prices without prior notification. Check with AMI for latest info. FORM MBANMAN 021314 Copyright © 2014 Altimate Medical, Inc. All rights reserved.



ÅTERFÖRSÄLJARE
Anatomic SITT AB, Box 6137
600 06 NORRKÖPING

BESÖKSADRESS
Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1
603 61 NORRKÖPING



SPECIALANPASSNING
Kryssa i rutan vid ev. specialanpassning
CE-märkning gäller ej.

