

## Philips Healthcare är en del av Royal Philips Electronics

### Så här kontaktar du oss

[www.philips.com/healthcare](http://www.philips.com/healthcare)  
[healthcare@philips.com](mailto:healthcare@philips.com)

#### Asien

+49 7031 463 2254

#### Europa, Mellanöstern, Afrika

+49 7031 463 2254

#### Latinamerika

+55 11 2125 0744

#### Nordamerika

+1 425 487 7000

800 285 5585 (avgiftsfritt, endast USA)

Philips Respironics  
1010 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668

Kundservice  
+1 724 387 4000  
800 345 6443 (avgiftsfritt, endast USA)

Philips Respironics  
internationella huvudkontor  
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Asien och Stillahavsområdet  
+65 6882 5282

Philips Respironics Australien  
+61 2 9666 4444

Philips Respironics Kina  
+86 800 820 6665  
+86 400 820 6665

Philips Respironics Tyskland  
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Frankrike  
+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Italien  
+39 039 203 1

Philips Respironics Sverige  
+46 8 120 45 900

Philips Respironics Schweiz  
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics Storbritannien  
+44 800 1300 845

[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)



## Bruksanvisning

Respironics och EverFlo är varumärken som tillhör Respironics, Inc. och dess närstående organisationer.

Besök [www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)




© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Med ensamrätt.

Philips Healthcare förbehåller sig rätten att ändra i specifikationerna och/eller sluta saluföra produkter när som helst utan föregående meddelande eller utfästelse och åtar sig inget ansvar vad gäller eventuella konsekvenser av detta dokument.

Broudy AE 9/1/2012 MCI 4103861 PN1081279



## Så ansluter du befuktarflaskan

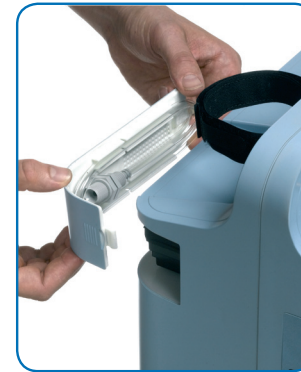

1. Använd slangen på filterluckan.



2. Anslut slangen till flaskan.



3. Anslut den andra änden till syrgasutloppet.

### Larm

●	Enheten är påslagen och fungerar som den ska.
Endast ljudlarm	Kontrollera att enhetens kontakt är i och att det inte är strömavbrott.
● ●	Låg syrgaskoncentration: fortsatt använda enheten men ring din vårdgivare.
● ●	Slå av enheten, vänta 5 minuter och slå på den igen. Om felet kvarstår, slå av enheten och ring leverantören.
● ● ●	Slå av enheten: kontrollera att kontakten är i, kontrollera ratten på flödesmätaren, kontrollera syrgasslangen, kontrollera anslutningen till syrgaskoncentratoren.
● ● ●	Slå av enheten, anslut till en alternativ syrgaskälla och ring din vårdgivare.

## Obligatoriskt underhåll:

Torka med jämna mellanrum av enhetens utsida med en fuktig trasa och se till att hålen i filterdörren är fria. Rengör filtret 1 gång/veckan. Skölj grovfiltret under rinnande varmt vatten och använd ett mildt rengöringsmedel. **OBS! Grovfiltret måste vara helt torrt innan det används igen.** Byt filtret 1 gång/år.

## Om larmet fortsätter, anslut till en alternativ syrgaskälla och ring din vårdgivare.

Denna bruksanvisning är avsedd som snabbguide för användning av EverFlo. Den ersätter inte handboken till EverFlo, som ger mer ingående information och anvisningar.