

RECONDITIONING GUIDE:

ROHO Cushions, Cushioning Devices, Covers, Foam Components, Mattress Overlay



Operation manuals are available at permobil.com.

General Safety Information (Applies to all ROHO products listed on this page.)






- Warnings:**
- Cleaning and disinfecting are separate processes. Cleaning must precede disinfection. Before use by a different individual: clean, disinfect, and check the product for proper functioning and confirm that all package contents are provided with the product. Refer to the operation manual provided with the product.
 - Clean the product regularly and when it becomes soiled.
 - Use of the following may cause damage: abrasives (steel wool, scouring pads); caustic, automatic dishwasher detergents; cleaning products that contain petroleum or organic solvents, including acetone, toluene, Methyl Ethyl Ketone (MEK), naphtha, dry cleaning fluid, adhesive remover; oil-based lotions, lanolin; ozone gas; ultraviolet light cleaning methods.
 - Follow all manufacturer bleach container and germicidal disinfectant safety guidelines. For a list of acceptable disinfectants, contact the equipment provider or local health authority.
 - High temperatures accelerate aging and will damage the product assembly. ROHO products are not packaged in a sterile condition, nor are they intended or required to be sterilized prior to use. If institution protocol demands sterilization: First, follow the cleaning and disinfecting instructions; then, open the inflation valve and use the lowest possible sterilizing temperature, but not to exceed 70°C (158°F), for the shortest time possible. DO NOT autoclave.
 - After cleaning and disinfecting, and before using, check all components for proper functioning and replace if necessary.

Cushions and Cushioning Devices: DRY FLOATATION Cushion**, HYBRID ELITE Cushion Insert, Toilet Seat Cushion, Commode Cushion





** Includes the following: ROHO LOW and HIGH PROFILE® Single Compartment Cushions; HIGH PROFILE Sensor Ready® Cushion; LOW, MID, and HIGH PROFILE QUADTRO SELECT® Cushions; CONTOUR SELECT® Cushion; ENHANCER® Cushion

Note: Deflated air cells may be easier to thoroughly clean. To deflate the air cells: with the inflation valve(s) open, roll up and/or compress the cushion, and then completely close the inflation valve(s).

- Warnings for WASHING and DISINFECTING by HAND or by MACHINE; and for DRYING CABINET Use:**
- Washing and disinfecting the cushion by hand and air drying is strongly recommended.
 - Valves MUST be closed: DO NOT allow water or cleaning solution to enter the cushion. Valve(s) MUST be closed before cleaning or disinfecting. Water in a Sensor Ready Cushion may cause a false reading when using Smart Check.
 - Before cleaning or disinfecting the Sensor Ready Cushion, remove the Smart Check.
 - Before cleaning or disinfecting the HYBRID ELITE Cushion Insert, carefully remove the cushion insert from the contoured foam base.
 - DO NOT expose cushions to temperatures above 70°C (158°F), which may damage cushion components. Overheating neoprene rubber can cause permanent product damage.
 - Machine washing can cause wear and damage, including cuts and tears to the cushion and the detachment of required product information. High water temperature may cause cushion discoloration and label detachment.
 - For machine washing or disinfecting, make sure the washing machine capacity is sufficient. A washing machine that isn't large enough may not remove all soil or contaminants from a cushion.
 - ALWAYS confirm that any hook fastener strips remain attached and in the correct position, as they may loosen after machine washing or disinfecting the cushion or after exposing the cushion to a hand held dryer or drying cabinet.
 - Using a damaged cushion will reduce or eliminate the benefits of the cushion and increase risk to skin and other soft tissue.
- Caution:** Rinse thoroughly. Detergent residue may cause air cells to stick together.

<p>HAND WASH Instructions: Remove the cover and close the inflation valve(s). Hand wash, using mild liquid hand soap, hand dishwashing liquid, laundry detergent, or a multipurpose detergent (follow product label instructions). Gently scrub all cushion surfaces, using a soft plastic bristle brush, a sponge or a cloth. Rinse with clean water. Air dry. DO NOT expose to direct sunlight.</p> 	<p>HAND DISINFECTING Instructions: Repeat cleaning instructions, using 1 part household liquid bleach per 9 parts water. Keep the product wet with the bleach solution for 10 minutes. Rinse thoroughly with clean water. Air dry.</p> 
<p>Prepare for MACHINE WASHING or MACHINE DISINFECTING: 1) Remove the cover and close the inflation valve(s). 2) Examine the cushion for damage, and patch any holes (refer to Repair Kit instructions provided with the product). 3) Remove stains or odors as needed: Place the cushion in warm water and a disinfectant cleaning agent. Gently scrub, using a soft plastic bristle brush, and rinse with clean water. 4) Deflate the cushion: Open the inflation valve and roll up the cushion, starting at the corner opposite the valve. After removing as much air as possible, CLOSE THE INFLATION VALVE. 5) Inspect for any sharp edges in the washing machine that may damage the cushion.</p>	<p>MACHINE WASHING Instructions: 1) Place the cushion in a laundry bag and then into the washing machine. When folding the cushion, make sure the air cells face outward. 2) Use a washing machine that has a sanitize cycle. 3) Use warm water 30° - 40°C (85° - 105°F) and laundry detergent or machine- and cushion-safe cleaner/biocide, placed in the detergent dispenser. 4) Gentle cycle: Use a machine setting that does not include a high-speed spin cycle. 5) Rinse thoroughly. Detergent residue may cause air cells to stick together. 6) Remove the cushion from the laundry bag and air or cabinet dry.</p> 
<p>DRYING CABINET Instructions: For optimal drying of the air cells after machine washing and/or disinfecting, open the inflation valve and place the cushion in the drying cabinet with the valve pointing down for 30 minutes. Do not exceed temperatures above 70°C (158°F). HANDHELD DRYER Instructions: For faster drying, use a hand-held hair dryer, hold no closer than 6 in. (15 cm) from the cushion, and use a sweeping motion.</p> 	<p>MACHINE DISINFECTING Instructions: Follow the machine washing instructions and use hot water 60°C (140°F). Use biocide (refer to the manufacturer instructions). Bleach with care: Only use a dilution of 1 part household liquid bleach per 9 parts water. Rinse with clean water.</p> 
<p>Recommended Overinflation Test: After machine washing and/or after using a handheld dryer or drying cabinet, confirm proper functioning: 1) Overinflate the cushion with the supplied hand pump until all air cells touch each other, and close the inflation valve; 2) Allow the cushion to remain overinflated for at least 12 hours; 3) Inspect the cushion for damage or air loss; if necessary, refer to the repair kit instructions provided with the product or contact Customer Care.</p>	








Hybrid Elite Foam Base and Foam Insert

- Warning:** DO NOT machine wash or machine dry the contoured foam base or the foam insert.  
- | | |
|---|---|
| <p>Hybrid Elite Foam Base - Cleaning and Disinfecting: Remove the cover, foam insert and cushion insert.
To clean, wipe gently with a cloth dampened with water and a household detergent, then rinse with cool, clean water.
To disinfect, follow the cleaning instructions, but use disinfectant instead of household detergent. After cleaning or disinfecting, allow the foam to air dry thoroughly before putting the cover on.</p>  | <p>Hybrid Elite Foam Insert - Cleaning and Disinfecting:
To clean, moisten a cloth, then wring to remove excess water. Wipe gently with the cloth and a household detergent, then wipe again with a clean, slightly damp cloth.
To disinfect, follow the cleaning instructions, but use disinfectant instead of household detergent. After cleaning or disinfecting, allow the foam to air dry thoroughly before putting the cover on.</p>  |
|---|---|

AirLITE® Cushion and Convex Insert

- Warnings:** Disinfectants are not effective on porous surfaces such as certain types of foam. If the foam becomes soiled or contaminated, DO NOT use with multiple individuals. Replace soiled or contaminated foam components. DO NOT machine wash or sanitize. DO NOT machine dry.  
- AirLITE Cushion and Convex Insert - Cleaning:** Remove the cover. Wipe gently with a cloth dampened with water and a household detergent. Rinse the cloth and re-wipe. Allow the foam to air dry thoroughly before putting the cover on or replacing the Convex Insert. 

ROHO Cushion Covers: Standard Cushion Cover, Heavy Duty Cushion Cover, HYBRID ELITE Cover, AirLITE Cover

- Before cleaning and disinfecting, remove the cushion from the cover. Remove any hook fastener pieces from the bottom of the cover.
- | | |
|---|--|
| <p>Cover - Cleaning: To Clean the Cover: Machine wash in cold water (30°C) with mild detergent, gentle cycle, or wipe clean with neutral detergent and warm water. Tumble dry low.</p>    | <p>Cover - Disinfecting: To Disinfect the Cover: Hand wash in cold water (30°C) using 1 part household liquid bleach per 9 parts water. Keep the product wet with the bleach solution for 10 minutes, then rinse thoroughly. Or machine wash in hot water (60°C). Tumble dry low.</p>     |
|---|--|

General Safety Information (Applies to all ROHO products listed on this page.)

Warnings:

- Valves **MUST** be closed: **DO NOT** allow water or cleaning solution to enter the cushioning product.
- **DO NOT** machine wash or sanitize or machine dry mattress overlay products.
- Cleaning and disinfecting are separate processes. Cleaning must precede disinfection. Before use by a different individual: clean, disinfect, and check the product for proper functioning and confirm that all package contents are provided with the product. Refer to the operation manual provided with the product.
- Clean the product regularly and when it becomes soiled.
- Use of the following may cause damage: abrasives (steel wool, scouring pads); caustic, automatic dishwasher detergents; cleaning products that contain petroleum or organic solvents, including acetone, toluene, Methyl Ethyl Ketone (MEK), naphtha, dry cleaning fluid, adhesive remover; oil-based lotions, lanolin; ozone gas; ultraviolet light cleaning methods.
- Follow all manufacturer bleach container and germicidal disinfectant safety guidelines. For a list of acceptable disinfectants, contact the equipment provider or local health authority.
- High temperatures accelerate aging and will damage the product assembly. ROHO products are not packaged in a sterile condition, nor are they intended or required to be sterilized prior to use. If institution protocol demands sterilization: First, follow the cleaning and disinfecting instructions; then, open the inflation valve and use the lowest possible sterilizing temperature, but not to exceed 70°C (158°F), for the shortest time possible. **DO NOT** autoclave.
- After cleaning and disinfecting, and before using, check all components for proper functioning and replace if necessary.

DRY FLOATATION Mattress Overlay System


To Clean the Overlay:

Remove all linens and straps. Unsnap overlay sections. Close valve(s) and place each overlay section in a large sink. Hand wash, using mild liquid hand soap, hand dishwashing liquid, laundry detergent, or a multipurpose detergent (follow the product label instructions). Gently scrub all product surfaces, using a soft plastic bristle brush, a sponge or a cloth. Rinse with clean water. Air dry. **DO NOT** expose to direct sunlight.



To Disinfect the Overlay:


Repeat the cleaning instructions, using 1 part household liquid bleach per 9 parts water. Keep the product wet with the bleach solution for 10 minutes. The mattress overlay may also be disinfected by wiping with an alcohol-based disinfectant or with an oxidizing surface disinfectant with a surfactant-based additive. Rinse thoroughly with clean water. Air dry.

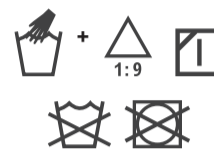

ROHO Reusable Mattress Overlay System Cover


To Clean the Reusable Cover:

Remove the cover from the overlay. Machine wash in cold water (30°C) with mild detergent, gentle cycle, or wipe clean with neutral detergent and warm water. Tumble dry low.

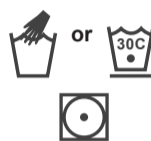

To Disinfect the Reusable Cover:

Hand wash, using 1 part household liquid bleach per 9 parts water. Keep the product wet with the bleach solution for 10 minutes. Quaternary-type disinfectants may also be used in concentrations recommended by the manufacturer. Rinse the product thoroughly. Or machine wash in hot water (60°C). Note: Repeated washing at high temperatures can accelerate deterioration of the cover and is not recommended). Tumble dry low.

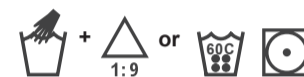

Caution: **DO NOT** dry clean the Reusable Overlay Cover.

Care Symbols

Hand wash.	Line dry in the shade.	Bleach (1 part bleach: 9 parts water).	Machine wash, warm, gentle.	Machine wash hot, normal, at the temperature shown.	Use a handheld dryer.
Hand wash cold.	Dry flat in the shade.	Line dry.	Tumble dry low.	Machine wash cold, gentle.	Wipe with a damp cloth.
Do not machine wash.	Do not machine dry.	Do not dry clean.			

ROHO, Inc., 1501 South 74th St., Belleville, IL 62223 U.S.A.
 U.S.A.: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449 • Customer Care: orders.roho@permobil.com
 Outside the U.S.A.: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518 • intlorders.roho@permobil.com
 permobil.com

Products may be covered by one or more U.S. and foreign patents and trademarks, including AirLITE®, CONTOUR SELECT®, ENHANCER®, DRY FLOATATION®, HIGH PROFILE®, HYBRID ELITE®, MID PROFILE®, LOW PROFILE®, QUADTRO SELECT®, ROHO®, Sensor Ready®, and Smart Check®.

Product information is changed as needed; current product information is available at permobil.com. Contact Customer Support for previous versions of product information.

ROHO, Inc. is part of Permobil Seating and Positioning.

© 2018, 2021 Permobil Rev. 2021-03-04

REKONDITIONERINGSANVISNING: ROHO-dynor, tillbehör till dynor, överdrag, skumkomponent

permobil
SEATING + POSITIONING

 Bruksanvisningar finns tillgängliga på permobil.com.

Generell säkerhetsinformation (Gäller alla ROHO® produkter som anges i detta dokument.)

Varningar:

- Rengöring och desinfektion är separata processer. Rengöring måste göras före desinfektion. Före användning av andra individer: rengör, desinficera och kontrollera att produkten har korrekt funktion och bekräfta att allt förpackningsmaterial ingår i produkten. Se bruksanvisningen* som medföljer produkten.
- Rengör produkten regelbundet och när den blir smutsig.
- Användning av följande kan orsaka skador: slipmedel (stålull, skurkuddar); kaustiska medel, automatisk diskmaskin, rengöringsmedel; som innehåller petroleum eller organiska lösningsmedel, inklusive aceton, toluen, metyletylketon (MEK), lacknafta, kemtvättmedel, limborttagningsmedel; oljebaserade lotioner, lanolin; ozongas, rengöringsmetoder med ultraviolett ljus.
- Följ alla instruktioner och säkerhetsföreskrifter för blekmedel och desinfektionsmedel. För en lista över acceptabla desinfektionsmedel, kontakta tillverkaren eller lokal hälsovårdsmyndighet.
- Höga temperaturer ökar åldrandet och skadar produktmonteringen. ROHO-produkter är inte packade i en steril miljö, och är heller inte avsedda eller nödvändiga att sterilisera innan användning. Om institutionsprotokollet kräver sterilisering: Följ först instruktionerna för rengöring och desinfektion; öppna sedan ventilen och använd lägsta möjliga steriliseringstemperatur, överstig ej 70°, i kortast möjliga tid. Autoklavera INTE.
- Efter rengöring och desinfektion, före användning: kontrollera att allt fungerar korrekt och ersätt vid behov.


Dynor och tillbehör till dynor: DRY FLOATATION Dyna**, HYBRID ELITE dynilägg, Sittdyna för toalett, kommoddyna

** Inkluderar följande: ROHO LOW och HIGH PROFILE® Enkammars -dynor; HIGH PROFILE Sensor Ready® -dyna; LOW, MID och HIGH PROFILE QUADTRO SELECT® -dynor; CONTOUR SELECT® -dyna; ENHANCER® -dyna

Obs! Tömda luftceller kan underlätta en ordentlig rengöring. För att tömma luftcellerna: Öppna uppblåsningsventilen(-erna) och rulla ihop och/eller tryck ihop dynan och stäng sedan uppblåsningsventilen(-erna) helt.

Varningar vid TVÄTT och DESINFICERING för HAND eller med MASKIN; och användning av TORKSKÅP:

- Tvätt och desinficering för hand och lufttork är starkt rekommenderat.
- Ventil MÅSTE vara stängd: Låt INTE vatten eller rengöringsmedel komma in i dynan. Ventil(er) MÅSTE stängas innan rengöring eller desinficering. Vatten i en Sensor Ready-dyna kan orsaka felaktig avläsning vid användning av Smart Check.
- Före rengöring eller desinficering av Sensor Ready-dynan, avlägsna Smart Check.
- Före rengöring eller desinficering av HYBRID ELITE dynilägg, avlägsna försiktig ilägget från skumbasen.
- EXPONERA INTE dynor för temperaturer över 70°C, vilket kan orsaka skada på dynans komponenter. Överhettning av neoprengummi kan orsaka permanent produktskada.
- Maskintvätt kan orsaka slitage och skador, inklusive skär-, och rivmärken i dynan. Hög vattentemperatur kan orsaka missfärgning och att etiketten lossnar.
- För maskintvätt eller desinfektion, säkerställ att tvättmaskinens kapacitet är tillräcklig. En tvättmaskin som inte är tillräckligt stor kan inte avlägsna all smuts från dynan.
- Bekräfta ALLTID att kardborrefästena sitter kvar och i rätt läge, eftersom de kan lossna efter maskintvätt eller desinfektion av dynan, eller efter exponering av en hårtork eller torkskåp.
- Användning av en skadad dyna kan reducera eller eliminera fördelarna hos dynan och öka risk för skador på hud och annan mjuk vävnad.

 **Försiktighet!** Skölj noggrant. Tvättmedelsrester kan orsaka att luftcellerna klibbar ihop.


Instruktioner för HANDTVÄTT:

Ta av överdraget och stäng av ventilerna. Handtvätta med mild handtvål, handdiskmedel, tvättmedel eller ett mångsidigt rengöringsmedel. (Följ instruktionerna på etiketten.) Skrubba försiktigt alla dynans ytor med en mjuk plastborste, en svamp eller en trasa. Skölj med rent vatten. Lufttorka. Utsätt ej för direkt solljus.



DESINFEKTION för hands:

Upprepa rengöringsanvisningarna, använd 1 del desinfektionsmedel per 9 delar vatten. Håll produkten fuktig med lösningen i 10 minuter. Skölj noga med rent vatten. Lufttorka.

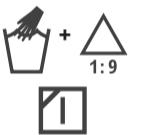

Förberedelser för MASKINTVÄTT eller MASKINDESINFEKTION: 1) Ta bort överdraget från dynan. 2) Undersök dynan för skador och laga eventuella skador (se reparationsanvisningar som medföljer produkten). 3) Ta bort fläckar eller lukt efter behov: Placeradynan i varmt vatten och ett desinfektionsmedel. Skrubba försiktigt med en mjuk plastborste och skölj med rent vatten. 4) Töm dynan på luft: Öppna uppblåsningsventilen och rulla upp dynan, börja i hörnet mitt emot ventilen. När du har tagit bort så mycket luft som möjligt, STÄNG VENTILEN. 5) Kontrollera om det finns eventuella vassa ytor i tvättmaskinen som kan skada dynan.

Instruktioner för MASKINTVÄTT: 1) Lägg dynan i en tvättpåse och lägg sedan i tvättmaskinen. Se till att luftcellerna vetter utåt när du lägger på dynan. 2) Använd en tvättmaskin som har en sanitetscykel. 3) Använd varmt vatten (30° - 40°C) och tvättmedel eller maskin- och dynsäkert rengöringsmedel, placerat i tvättmedelsfacket. 4) Tvätta försiktigt: Använd en maskininställning som inte innehåller en hög centrifugering. 5) Skölj noggrant. Tvättmedelsrester kan orsaka att luftcellerna klibbar ihop. 6) Ta bort dynan från tvättpåsen och lufttorka eller med hjälp av torkskåp.




Instruktioner för TORKSKÅP: För optimal torkning av luftcellerna efter tvätt och/eller desinfektion av maskinen, öppna uppblåsningsventilen och placera dynan i torkskåpet med ventilen pekade ned i 30 minuter. Överstig inte 70°C.

Instruktioner för HÅRTORK: För snabbare torkning, använd en hårtork, håll inte längre än 6 cm från dynan och använd en svepande rörelse.



Instruktioner för MASKINDESINFEKTION: Följ anvisningarna för maskintvätt och använd hett vatten. Använd biocid (se tillverkarens anvisningar). Desinficera försiktigt: Använd endast en spädning av 1 del desinfektionsmedel per 9 delar vatten. Skölj med rent vatten.



 **Rekommenderat överinflationstest:** Efter maskintvätt och/eller efter användning av en hårtork eller torkskåp, bekräfta korrekt funktionalitet: 1) Blås upp dynan med den medföljande handpumpen tills alla luftceller rör vid varandra; 2) Låt dynan förbli överfylld med luft i minst 12 timmar; 3) Kontrollera dynan efter skador eller luftförlust. Om det behövs, se instruktionerna om reparationssetsen som medföljer produkten eller kontakta kundservice.

Hybrid Elite Skumbas och skumilägg

 **Varning:** Maskintvätta eller maskintorka INTE konturerad skumbas eller skumilägg. 

Hybrid Elite Skumbas - Rengöring och desinfektion: Ta bort överdraget, skumilägget och dynilägget. För att rengöra, torka försiktigt med en trasa fuktad med vatten och ett hushållsrengöringsmedel, skölj sedan med kallt, rent vatten.

För att desinficera, följ rengöringsanvisningarna, men använd desinfektionsmedel istället för hushållsrengöringsmedel. Efter rengöring eller desinfektion, låt skummet lufttorka noga innan du drar på överdraget.




Hybrid Elite skumilägg - Rengöring och desinfektion:

För rengöring, fukta en trasa med vatten och vrid sedan för att ta bort överskott av vatten. Torka försiktigt med trasan och ett hushållspapper, torka sedan av med en ren, lätt fuktig trasa.

För att desinficera, följ rengöringsanvisningarna, men använd desinfektionsmedel istället för hushållsrengöringsmedel. Efter rengöring eller desinfektion, låt skummet lufttorka noga innan du drar på överdraget.



AirLITE®-Dyna och Convex-ilägg

 **Varning:** Desinfektionsmedel är inte effektiva på porösa ytor, så som vissa typer av skum. Om skummet blir smutsigt eller förorenat, använd INTE till flera personer. Byt ut smutsiga eller förorenade skumkomponenter. Maskintvätta INTE. Maskintorka INTE.



AirLITE-dyna och Convex-ilägg - Rengöring: Ta bort överdraget. Torka försiktigt med en trasa fuktad med vatten och ett hushållsrengöringsmedel. Skölj tyget och torka igen. Låt skummet lufttorka noga innan du drar på överdraget eller byter ut Convex-ilägget.



ROHO överdrag: Standard dynöverdrag, HD dynöverdrag, HYBRID ELITE överdrag, AirLITE överdrag

Innan du rengör och desinficera ta bort överdraget från dynan. Ta loss kardborrefästet från nedre delen av överdraget.

Överdrag - Rengöring: För att rengöra överdraget: Maskintvätta i max 30°C med mild tvättmedel, försiktig centrifugering, eller torka rent med neutralt rengöringsmedel och varmt vatten. Torktumla på låg temperatur.



Överdrag - Desinfektion: För att desinficera överdraget: Handtvätta i kallt vatten (30°C) med 1 del desinfektionsmedel per 9 delar vatten. Håll produkten fuktig med lösningen i 10 minuter, skölj noggrant. Eller maskintvätta i varmt vatten (60°C). Torktumla, låg temp.




Generell säkerhetsinformation (Gäller alla ROHO produkter som anges i detta dokument.)**⚠ Varningar:**


- Ventiler **MÅSTE** vara stängda: Låt **INTE** vatten eller rengöringsmedel komma in i produkten.
- Maskintvätta, sanera eller torktumla **INTE** madrassöverdragsprodukter.
- Rengöring och desinfektion är separata processer. Rengöring sker före desinfektion. Innan användning av en annan individ: rengör, desinficera och kontrollera att produkten har korrekt funktion och bekräfta att allt förpackningsmaterial ingår i produkten. Se bruksanvisningen* som medföljer produkten.
- Rengör produkten regelbundet och när den blir smutsig.
- Användning av följande kan orsaka skador: slipmedel (stålull, skurkuddar); kaustiska medel, automatisk diskmaskin, rengöringsmedel; som innehåller petroleum eller organiska lösningsmedel, inklusive aceton, toluen, metyletylketon (MEK), lacknafta, kemtvättmedel, limbortagningsmedel; oljebaserade lotioner, lanolin; ozongas, rengöringsmetoder med ultraviolett ljus.
- Följ alla instruktioner och säkerhetsföreskrifter för blekmedel och desinfektionsmedel. För en lista över acceptabla desinfektionsmedel, kontakta tillverkaren eller lokal hälsovårdsmyndighet.
- Höga temperaturer ökar åldrandet och skadar produktmonteringen. ROHO-produkter är inte packade i en steril miljö, och är heller inte avsedda eller nödvändiga att sterilisera innan användning. Om institutionsprotokollet kräver sterilisering: Följ först instruktionerna för rengöring och desinfektion; öppna sedan ventilen och använd lägsta möjliga steriliseringstemperatur, överstig ej 70°, i kortast möjliga tid. Autoklavera **INTE**.
- Efter rengöring och desinfektion, före användning: kontrollera att allt fungerar korrekt och ersätt vid behov.

DRY FLOATATION Madrasssystem**Rengöring:**

Ta bort alla sängkläder och remmar. Knäpp isär madrasssektionerna. Stäng ventil(er) och placera överdraget i en stor balja. Handtvätta med mild flytande handtvål, handdiskmedel, tvättmedel eller ett allsidigt rengöringsmedel (Följ instruktionerna på förpackningen.) Skrubba försiktigt på alla produktens ytor med hjälp av en mjuk borste, svamp eller duk. Skölj med rent vatten. Låt lufttorka. Exponera **INTE** för direkt solljus.

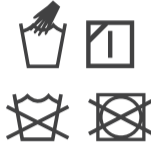**Desinficering:**

Upprepa rengöringsinstruktionerna, använd 1 del hushållsblekmedel per 9 delar vatten (följ produktens anvisningar). Håll produkten fuktig med blekmedelslösningen i 10 minuter. Överdraget kan också desinficeras genom att torkas med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel. Skölj med rent vatten. Låt lufttorka.

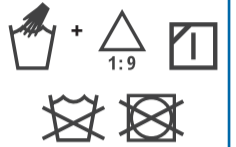**ROHO återanvändningsbara överdrag****Rengöring:**

Ta bort överdraget från bäddmadrassen. Maskintvätta kallt (30°C) med mildt rengöringsmedel, skonsamt program, eller torka rent med ett neutralt rengöringsmedel och varmt vatten. Torktumla på låg värme.

**Desinficering:**

Handtvätta, och använd 1 del hushållsblekmedel per 9 delar vatten (följ produktens anvisningar). Håll produkten fuktig med blekmedelslösningen i 10 minuter. Skölj produkten noggrant.



Eller maskintvätta varmt (60°C). Notera: Upprepad tvätt i hög temperatur kan påskynda försämringen av skyddet och rekommenderas inte). Torktumla på låg värme.

⚠ Varning: kemtvätta **INTE** det återanvändningsbara överdraget.

Vårdsymboler

Handtvätt.	Hängtorkas i skuggan.	Blekning (1 del blekmedel: 9 delar vatten).	Maskintvättas varmt, mildt.	Maskintvättas mycket varmt, normalt, temperatur visas.	Torkas med handtork.
Handtvättas kallt.	Torkas platt i skuggan.	Hängtorkas.	Torktumlas svagt.	Maskintvättas kallt, mildt.	Torka med fuktig trasa.
Får inte tvättas.	Får inte torktumlas.	Får inte kemtvättas.			

ROHO, Inc., 1501 South 74th St., Belleville, IL 62223 U.S.A.
Inom USA: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449 • Kundtjänst: orders.roho@permobil.com
Utanför USA: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518 • intlorders.roho@permobil.com
permobil.com

Produkter kan omfattas av ett eller flera patent och varumärken i USA eller andra länder, bland annat AirLITE®, CONTOUR SELECT®, ENHANCER®, DRY FLOATATION®, HIGH PROFILE®, HYBRID ELITE®, MID PROFILE®, LOW PROFILE®, QUADTRO SELECT®, ROHO®, Sensor Ready®, och Smart Check®.

Produktinformationen uppdateras efter behov; aktuell produktinformation finns tillgänglig på permobil.com. Kontakta kundtjänst för tidigare versioner av produktinformationen.

ROHO, Inc. ingår i Permobil Seating and Positioning.

© 2018, 2021 Permobil Rev. 2021-03-04