

Max: 150 kg/330 lbs

FlexiGrip används som ett hjälphandtag för enklare och mer aktiv uppresning från liggande till sittande. FlexiGrip fästes i sänggaveln och har flera handtag på båda sidorna så att brukaren kan "klättra" upp till sittande.

SystemRoMedic är en serie med olika modeller av förflyttningshjälpmiddel. Valet av hjälpmedel styrs av förflyttningssituationen och brukarens funktioner och behov.



Kontroll av funktion

Visuell inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av hjälpmedlet. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.




Läs alltid manualen

Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning. Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten. Lämna inte brukaren under förflyttningmomentet.




Mekanisk belastning

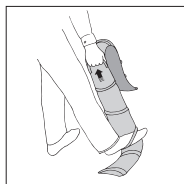


Dragbelasta handtagen och kontrollera att de håller för kraftig belastning. Vid tecken på slitage skall hjälpmedlet kasseras.

Placering av FlexiGrip

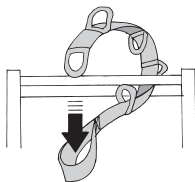


FlexiGrip fästes genom att bandet dras genom öglan. Undersök att fästpunkten håller för den belastning som bandet kan medföra.

Användning av FlexiGrip

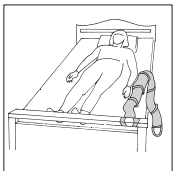

1

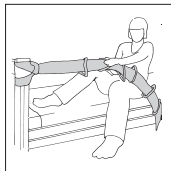


2

Låt FlexiGrip ligga i sängen så den är lättåtkomlig för brukaren (1).

Brukaren kan nu med hjälp av FlexiGrip "klättra" upp till sittande på egen hand (2). Brukaren kan även använda FlexiGrip som ett stöd vid sittande på sängkanten.

Till och från rullstol med FlexiGrip

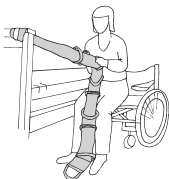

FlexiGrip kan användas som stöd vid förflyttning till och från rullstol. Brukaren kan själv göra en låg förflyttning genom att ta stöd i Flexigrip och lätta på stussen, trampa runt och sätta sig.

Material:

Polyester

Skötselråd:



Använd inte sköjmedel. Undvik torktumlning för optimal livslängd av materialet.

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se www.handicare.com för en komplett distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår hemsida www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se



handicare