


# Visit dörrsändare



## Knappar och anslutningar

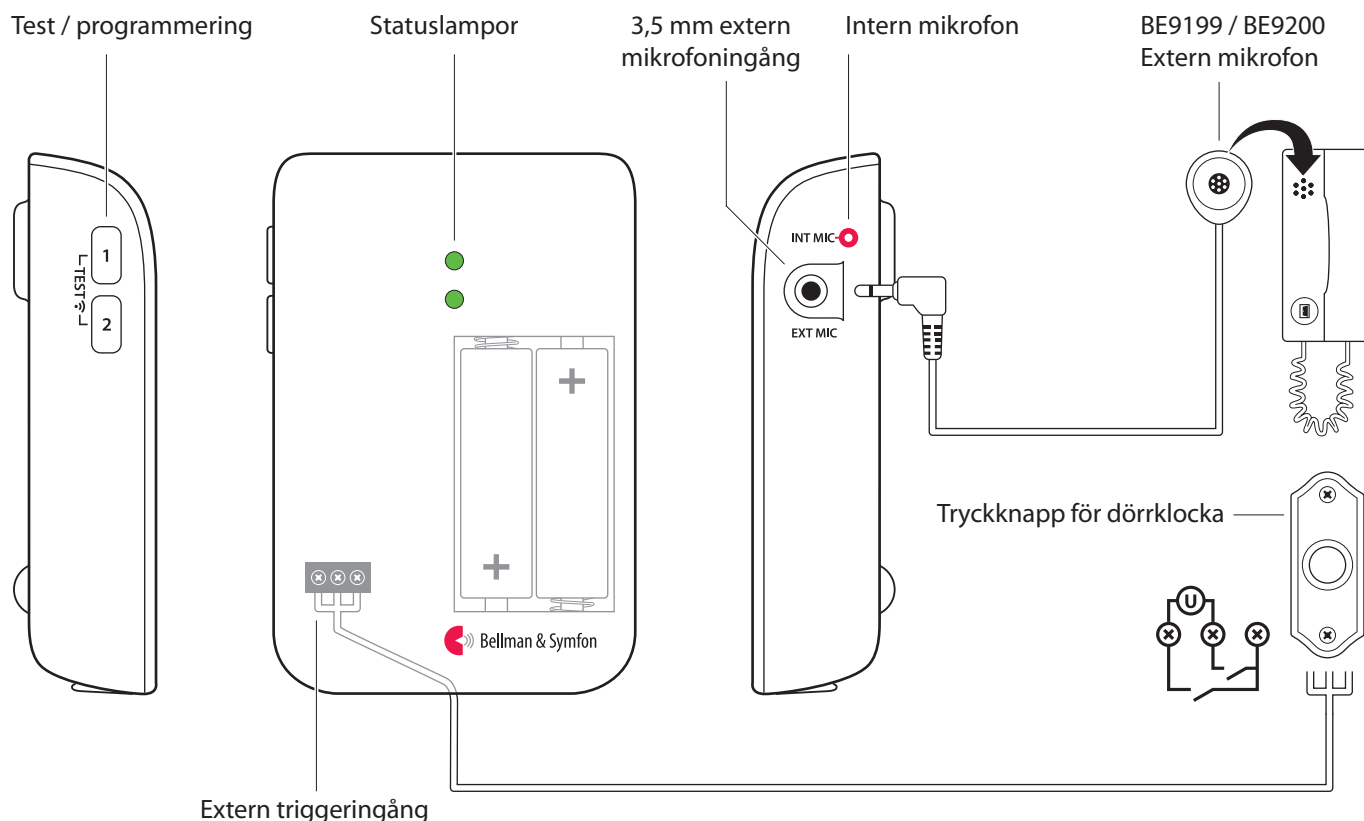

## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1411 Visit dörrsändare
- 2 x 1,5 V AA alkaliska batterier
- Kardborreband för montering
- Skruv och plugg

### Ström och batteri

- Batterityp  
2 x 1,5 V AA litium eller alkaliska batterier
- Strömförbrukning  
Aktiv < 70 mA  
Viloläge < 15 µA
- Driftstid  
Alkaliska batterier ~ 5 år  
Litiumbatterier ~ 10 år

### Storlek och vikt

- Höjd: 100 mm
- Bredd: 65 mm
- Djup: 27 mm
- Vikt: 120 g, inkl. batterier

### Aktivering

- Via mikrofonen och testknapparna
- Via den elektromagnetiska detektorn
- Via en extern mikrofon (tillbehör)
- Via en befintlig dörrklocka ansluten till den externa triggeringen

### Ingångar

- 3,5 mm extern mikrofoningång
- Extern triggergång (plint)

### Omgivning

- Endast för inomhusbruk  
Arbetstemperatur  
15° till 35° C
- Relativ luftfuktighet  
5% till 95%, icke-kondenserande

### Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens  
868,30 MHz
- Räckvidd  
50 - 250 m beroende på byggnadens konstruktion och planlösning

### Tillbehör


Dörrsändaren kan kompletteras med:

- BE9199 Extern mikrofon 2,5 m
- BE9200 Extern mikrofon 0,75 m

# Visit dörrsändare


## Installation – endast en ljudkälla

- 1 Dra bort batterifliken för att starta enheten.  
Rengör ytan med våtservett och ta bort skyddsfilm från kardborrebandet.
- 2 Montera sändaren till vänster om dörrklockans ljudkälla, så nära som möjligt.  
Du kan också använda medföljande skruv och plugg.

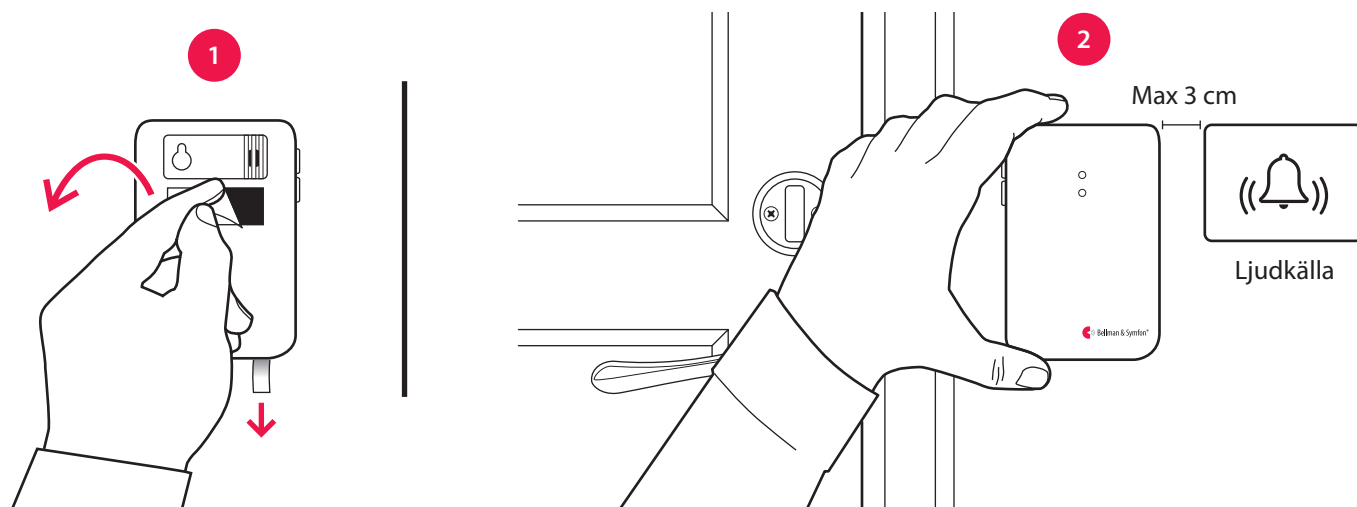

## Installation – porttelefon och elektrisk dörrklocka

- 1 Ta bort skyddsfilm från den externa mikrofonen och fäst den på porttelefonens högtalare.  
Anslut mikrofonen till dörrsändarens externa mikrofoningång.
- 2 Dra bort batterifliken för att starta enheten.  
Rengör ytan med våtservett och ta bort skyddsfilm från kardborrebandet.
- 3 Montera sändaren till vänster om dörrklockans ljudkälla, så nära som möjligt.  
Du kan också använda medföljande skruv och plugg.

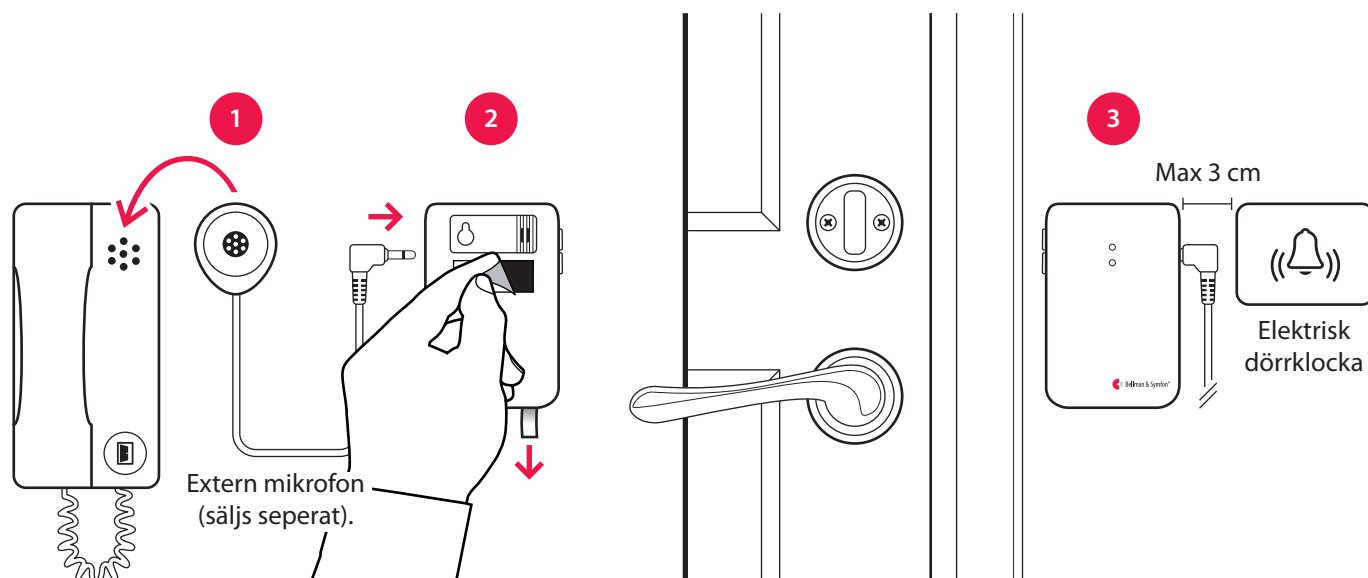


# Visit dörrsändare

## Installation – porttelefon och mekanisk dörrklocka

Om du har en porttelefon och en mekanisk dörrklocka kan du behöva två dörrsändare, dvs. en för varje ljudkälla.

- 1 Dra bort batterifliken för att starta båda enheterna.  
Rengör ytan med våtservett och ta bort skyddsfilm från kardborrebandet.
- 2 Montera en av sändarna till vänster om dörrklockan och den andra till vänster om porttelefonen, så nära ljudkällan som möjligt.

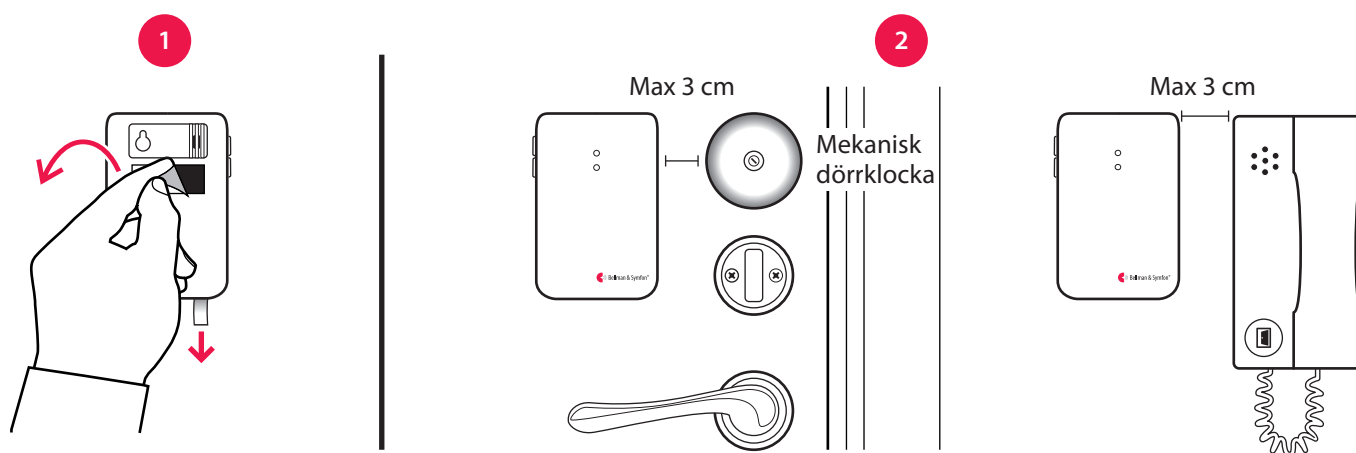


## Testa anslutningen

### Med testknapparna

- 1 Tryck samtidigt på dörrsändarens testknappar.  
Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den skickar en radiosignal.
- 2 Den gröna Visittlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.


**Notera:** Om signalmönstret har ändrats kommer mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag.

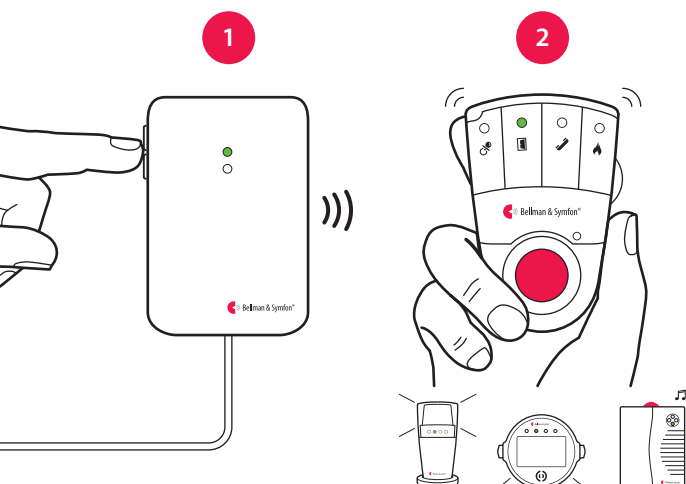

### Med dörrklocka eller porttelefon

- 1 Tryck på dörrklockan eller porttelefonen.  
Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den aktiveras av ljudet och skickar en radiosignal.
- 2 Den gröna Visittlampan på mottagaren tänds för att visa att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, blixtra eller vibrera beroende på mottagare.

**Notera:** Om signalmönstret har ändrats kommer mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag.

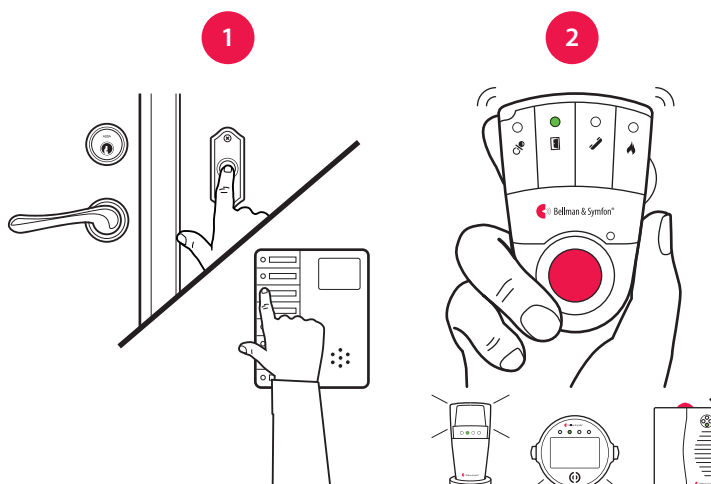

# Visit dörrsändare


## Programmera sändaren

Dörrsändaren är förprogrammerad så att den känner igen de flesta dörrklockor och porttelefoner. Om din dörrklocka varierar ovanligt mycket i styrka eller ton, kan du behöva lära sändaren att känna igen ljudet från den.

### Så här gör du för att programmera sändaren:

- 1 Tryck och håll nere knapp 1 tills den översta statuslampan börjar blinka. Släpp knappen för att starta inspelningen.
- 2 Ring på dörrklockan minst fem gånger. Pausa 1 – 2 sekunder mellan varje tryck. Inspe­lingen varar i 5 minuter och avslutas automatiskt. Du kan stoppa den manuellt genom att trycka på knapp 1.
- 3 När inspe­lingen är klar tänds statuslampan i grönt. Om den lyser rött, se **Felsökning**.
- 4 Ring på dörrklockan igen. Den översta statuslampan tänds för att visa att sändaren känner igen ljudet.

Spela in ljudet från porttelefonen genom att använda knapp 2 på sändaren och upprepa stegen ovan.

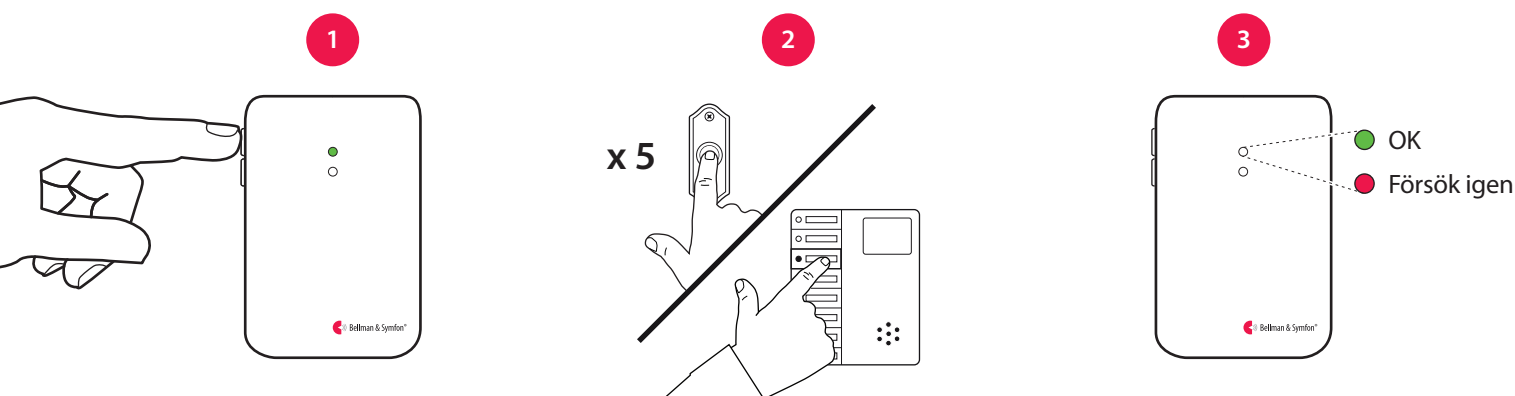

## Radera inspelade ljud

För att ta bort alla inspelade ljud, tryck och håll nere sändarens testknappar i 5 sekunder.

**Notera:** Detta kommer att radera de inspelade ljuden och återställa sändaren till fabriksinställningar. Inställningar för radionyckel och signalmönster påverkas inte.

## Använda elektromagnetisk avkänning

Sändaren kan ställas in så att den känner av elektromagnetiska fält från elektriska dörrklockor. Så här gör du:

- Öppna locket på sändaren och flytta signalomkopplare nr 4 uppåt (På) för att aktivera elektromagnetisk avkänning. Återställ signalomkopplaren för att avaktivera funktionen.



## Använda tillbehör


### Använda extern mikrofon

Om ljudkällan befinner sig för långt bort från sändarens interna mikrofon kan du behöva använda en extern mikrofon. Den kan också användas om du vill ha olika signaler för dörrklocka och porttelefon.

### Ansluta tillbehör till den externa triggeringen

Öppna locket på sändaren för att komma åt skruvplinten. Det finns tre anslutningsmöjligheter:

- Använd anslutningspunkt 1 och 2 för att koppla in en aktiv brytare, som t.ex ett strömrelä.  
**Notera:** Strömmen måste vara 2 – 30 VDC, polaritetsoberoende eller 2 – 24 VAC 5 – 150 Hz.
- Använd 2 och 3 för att koppla in en passiv mekanisk brytare, som t.ex en dörrklockas tryckknapp.

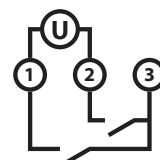

# Visit dörrsändare

## Förinställt signalmönster

När dörrsändaren aktiveras händer följande:

- 1 Statuslampan tänds i grönt för att visa att sändaren skickar en radiosignal till mottagaren.
- 2 Den gröna Visitlempen på mottagaren tänds och den börjar ljuda, blixtra eller vibrera i ett specifikt mönster, s.k. signalmönster. Sändaren och de anslutna tillbehören styr signalmönstret och förinställningen är:

### Sändare

### Signalmönster, mottagare

| Källa                 | Statuslampan | Visitlempa        | Ljud                 | Vibration    | Blixt |
|-----------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|-------|
| ■ Intern mikrofon     | Grön, övre   | Fast grönt ljus   | 1 x dörrklocka, mörk | Långsam ■□□□ | Ja    |
| ■ Extern mikrofon     | Grön, nedre  | Blinkar grönt     | 2 x dörrklocka, ljus | Långsam ■□□□ | Ja    |
| ■ Ansluten dörrklocka | Grön, övre   | 3 x blinkar grönt | 1 x dörrklocka, ljus | Långsam ■□□□ | Ja    |

## Byta signalmönster

Att byta signalmönster är enkelt. Öppna locket på sändaren och flytta signalomkopplarna enligt tabellen nedan:



### Sändare

### Signalmönster, mottagare

| Inställning                                                                         | Källa                                                                                    | Visitlempa                                                   | Ljud                                                                 | Vibration                                    | Blixt          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
|  | Int. mik. / inlärd signal 1 / test<br>Ext. mik. / inlärd signal 2<br>Ansluten dörrklocka | Fast grönt ljus<br>Blinkar grönt<br>3 x blinkar grönt        | 1 x dörrklocka, mörk<br>2 x dörrklocka, ljus<br>1 x dörrklocka, ljus | Långsam ■□□□<br>Långsam ■□□□<br>Långsam ■□□□ | Ja<br>Ja<br>Ja |
|  | Int. mik. / inlärd signal 1 / test<br>Ext. mik. / inlärd signal 2<br>Ansluten dörrklocka | 2 x blinkar grönt<br>3 x blinkar grönt<br>Blinkar grönt      | 2 x dörrklocka, mörk<br>1 x dörrklocka, ljus<br>2 x dörrklocka, ljus | Långsam ■□□□<br>Långsam ■□□□<br>Långsam ■□□□ | Ja<br>Ja<br>Ja |
|  | Int. mik. / inlärd signal 1 / test<br>Ext. mik. / inlärd signal 2<br>Ansluten dörrklocka | 3 x blinkar grönt<br>2 x blinkar grönt<br>3 x blinkar orange | 1 x dörrklocka, ljus<br>2 x dörrklocka, mörk<br>Babymelodi           | Långsam ■□□□<br>Långsam ■□□□<br>Snabb ■■■■■■ | Ja<br>Ja<br>Ja |
|  | Int. mik. / inlärd signal 1 / test<br>Ext. mik. / inlärd signal 2<br>Ansluten dörrklocka | Blinkar grönt<br>Fast grönt ljus<br>Blinkar orange           | 2 x dörrklocka, ljus<br>1 x dörrklocka, mörk<br>Babymelodi           | Långsam ■□□□<br>Långsam ■□□□<br>Snabb ■■■■■■ | Ja<br>Ja<br>Ja |
|  | Int. mik. / inlärd signal 1 / test<br>Ext. mik. / inlärd signal 2<br>Ansluten dörrklocka | Fast grönt ljus<br>3 x blinkar grönt<br>2 x blinkar grönt    | 1 x dörrklocka, mörk<br>1 x dörrklocka, ljus<br>2 x dörrklocka, mörk | Långsam ■□□□<br>Långsam ■□□□<br>Långsam ■□□□ | Ja<br>Ja<br>Ja |
|  | Int. mik. / inlärd signal 1 / test<br>Ext. mik. / inlärd signal 2<br>Ansluten dörrklocka | Fast grönt ljus<br>Blinkar grönt<br>Blinkar gult             | 1 x dörrklocka, mörk<br>2 x dörrklocka, ljus<br>2 x ringsignal, ljus | Långsam ■□□□<br>Långsam ■□□□<br>Mellan ■□■□  | Ja<br>Ja<br>Ja |
|  | Int. mik. / inlärd signal 1 / test<br>Ext. mik. / inlärd signal 2<br>Ansluten dörrklocka | 3 x blinkar grönt<br>Fast grönt ljus<br>Rött + orange ljus   | 1 x dörrklocka, ljus<br>1 x dörrklocka, mörk<br>Utryckningslarm      | Långsam ■□□□<br>Långsam ■□□□<br>Lång ■■■□    | Ja<br>Ja<br>Ja |
|  | Int. mik. / inlärd signal 1 / test<br>Ext. mik. / inlärd signal 2<br>Ansluten dörrklocka | Blinkar grönt<br>2 x blinkar grönt<br>Blinkar rött           | 2 x dörrklocka, ljus<br>2 x dörrklocka, mörk<br>Brandlarm            | Långsam ■□□□<br>Långsam ■□□□<br>Lång ■■■□    | Ja<br>Ja<br>Ja |

# Visit dörrsändare

## Byta radionyckel


Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter under sändarens lock.

### Så här byter du radionyckel:

- 1 Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (På) för att byta radionyckel. Alla radioomkopplare är från början positionerade nedåt (Av).
- 2 Tryck och håll nere test / funktionsknappen på mottagaren tills den gröna och gula Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.
- 3 Tryck på sändarens testknappar inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.
- 4 Visitlamporna på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.



**Notera:** Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans.

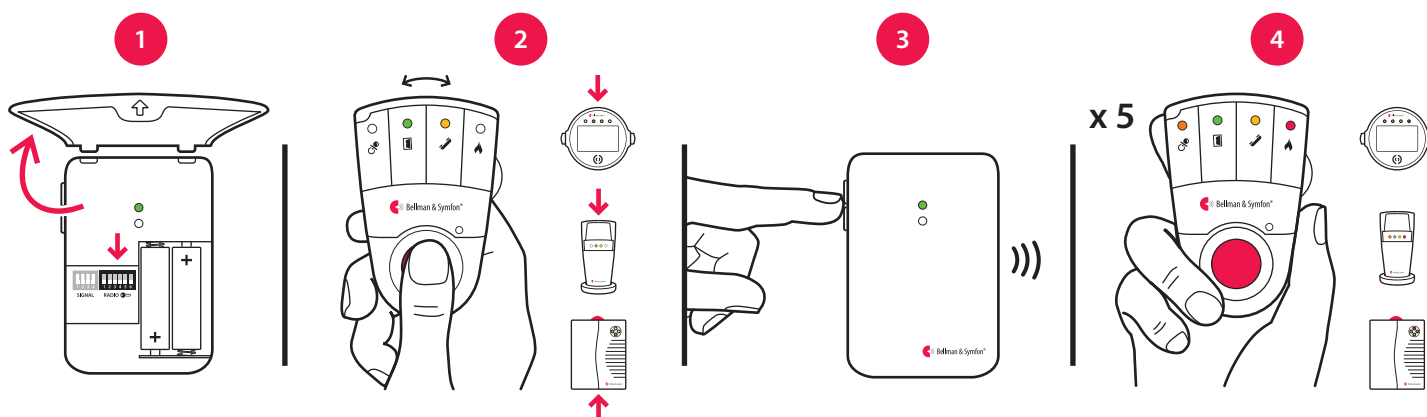

## Felsökning

| Om                                                                                                 | Gör så här                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statuslampan blinkar orange en gång i minuten                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Byt batterier. Använd enbart 1.5 V AA (LR6) litium eller alkaliska batterier.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Statuslampan blinkar orange en gång i sekunden                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Det finns andra ljudkällor som stör dörrsändaren. Stäng av dem eller sänk ljudet.</li><li>▪ Koppla ur den externa mikrofonen för att säkerställa att den inte är trasig.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Statuslampan tänds när jag ringer på dörrklockan eller porttelefonen men mottagaren aktiveras inte | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontrollera sändarens och mottagarens batterier och anslutningar.</li><li>▪ Flytta mottagaren närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd.</li><li>▪ Kontrollera att dörrsändaren och mottagaren har samma radionyckel, se <b>Byta radionyckel</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Statuslampan tänds inte när jag ringer på dörrklockan eller porttelefonen                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ring på dörrklockan samtidigt som du flyttar dörrsändaren närmare / längre bort från ljudkällan. Rekommenderat avstånd är mindre än 3 cm.</li><li>▪ Lär dörrsändaren ljudet från din dörrklocka, se <b>Programmera sändaren</b>.</li><li>▪ Om signalen varierar mycket i styrka och ton, byt till elektromagnetisk avkänning.</li><li>▪ Om dörrsändaren fortfarande inte aktiveras, tryck och håll nere testknapparna i 5 sekunder för att ta bort de inspelade ljuden, se <b>Radera inspelade ljud</b>.</li></ul> |
| Mottagaren aktiveras utan anledning                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter, se <b>Byta radionyckel</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |