

Displayfunktion


Displayen ger information

eFlow[®]rapid med eBase[®] controller har en display som ger information under inhalationen.




Exempel

Displayinformation

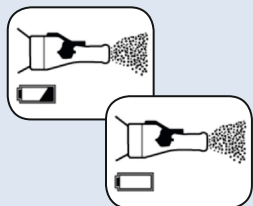


Batteri halvfullt

- Ha nya batterier till hands eller använd med nätadapter

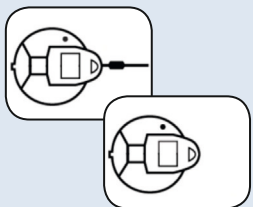

Fel på sladdanslutningen till kontrollern eller nebulisatorn

- Kontrollera sladdanslutningarna

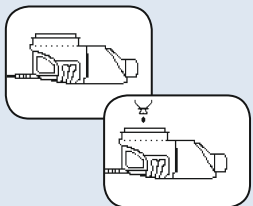

Inget läkemedel ifyllt

- Fyll på läkemedel

Bra att veta

eBase[®] kontrollern kan användas tillsammans med eFlow[®]rapid nebulisatorn samt läkemedelsspecifika nebulisatorer.



eFlow[®]rapid
nebuliser system

Beställningsnr: 178G1005

eFlow[®]rapid nebulisatorn tillsammans med eFlow[®]rapid aerosolgeneratorn är kompatibel både med eBase[®] kontrollern (blå controller med display) och den turkosfärgade kontrollern (utan display).



eFlow[®]rapid nebulisator
(inkl. aerosolgenerator)
Beställningsnr: 678G8222

eFlow[®]rapid aerosolgenerator
Beställningsnr: 678B2620



Återförsäljare

MEDI PLAST

Medioplast AB
Bronsåldersgatan 2
Box 1004, 212 10 Malmö
T 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com



PARI Pharma GmbH, Moosstraße 3, 82319 Starnberg, GERMANY
E-Mail: info@pari.de, Tel. +49 (0) 8151 279 0, www.pari.com

11300601-8-09-2019



eFlow[®]rapid

med eBase[®] controller

eFlow[®]rapid
nebuliser system

www.eFlowrapid.info

eFlow[®]rapid nebuliser system

Modern inhalationsbehandling dubbelt så snabbt!



eFlow[®]rapid möjliggör en snabb och effektiv inhalation och underlättar behandlingen avsevärt.^{2, 3}

Anvisning för hygien

1. Rengöring

Ta isär nebulisatorn i alla dess delar omedelbart efter varje inhalation och rengör med varmt kranvatten och diskmedel.



2. Desinficering

Desinficera nebulisatordelarna och aerosolgeneratoren 1x om dagen i 6 minuter eller koka dem i destillerat vatten i 5 minuter efter rengöringen i autoklaven.



3. Torkning

Lufttorka på en ren trasa.



4. Förvaring

Förvara på en ren, torr plats.



Fördelar för patienterna

- Korta inhalationstider för **mer livskvalitet**⁴
- Ljudlös drift för **diskret användning**
- Lätt, praktisk, med nät- eller batteridrift för **mer rörlighet**
- Lätt att **rengöra och desinficera**, ger en hög **hygiensäkerhet**
- Displayen ger **information** under inhalationen

1) i jämförelse med PARI LC PLUS nebulisator, D Hubert, S Leroy, S Dominique, J Kovarik: Pharmacokinetic comparison of [...] cystic fibrosis patients. European Cystic Fibrosis Society [...] 13-16 June 2007
2) Fischer R et al. 2007, J.Cyst Fibr. 6 (Suppl 1): 41.
3) Naehrig S et al. 2011, Eur J Med Res 16:63-66
4) Govoni et al. 2013, Pulm.Pharm. Ther 26 (2013)249-255

Enskilda komponenter



* Nebuliseringskammaren och läkemedelsbehållaren är förmonterade och kan inte tas isär!