
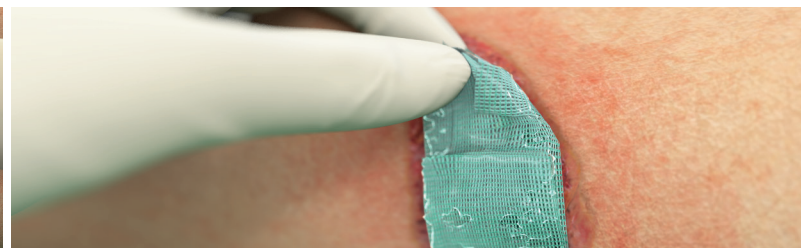
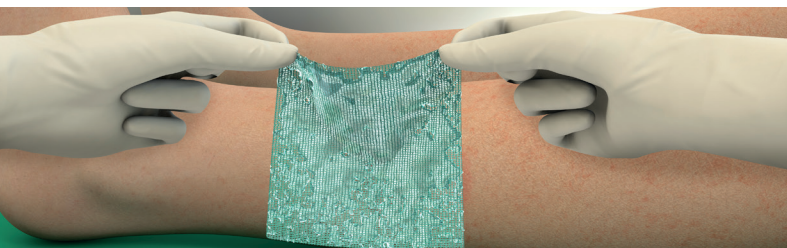


SORBACT® GEL DRESSING

INFEKTIONSFÖREBYGGANDE SÅRKONTAKTLAGER MED HYDROGEL

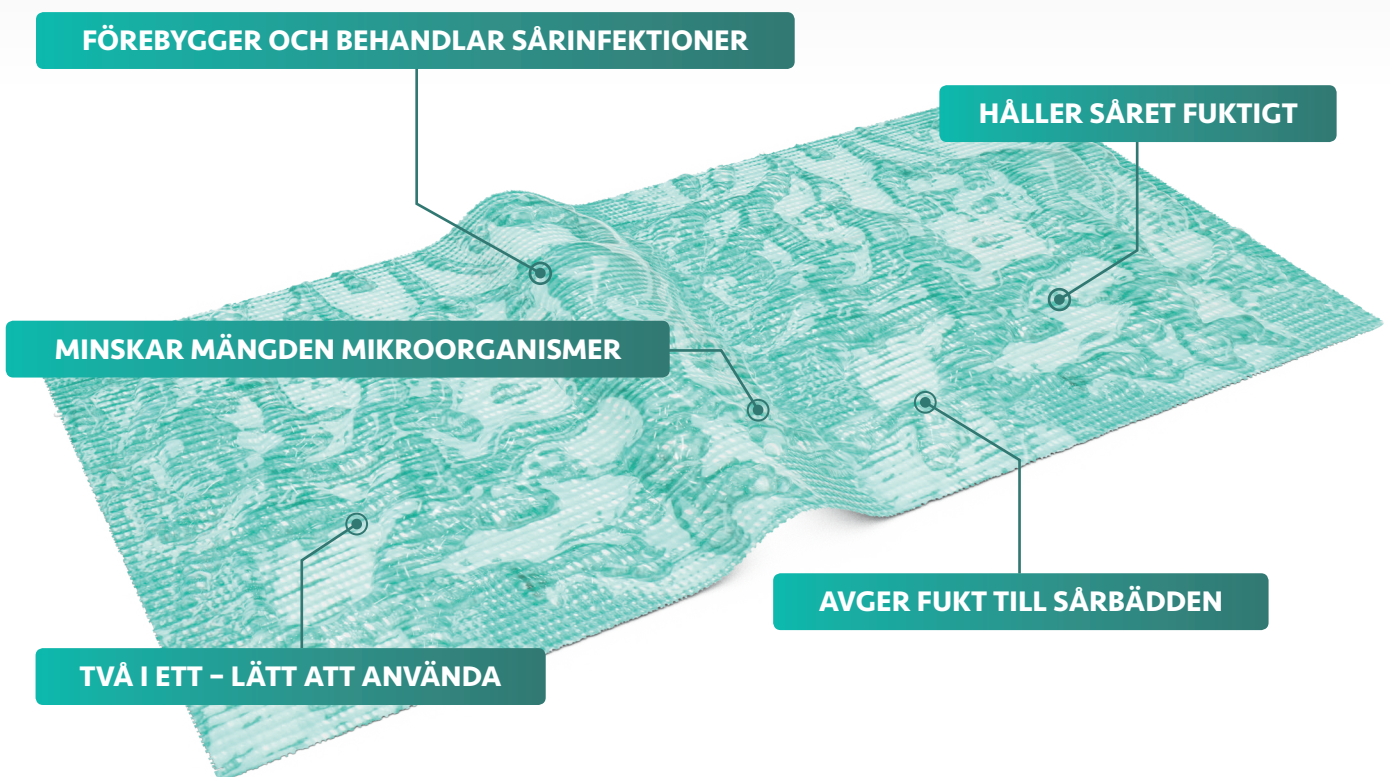

TA KONTROLL ÖVER MIKRO-ORGANISMERNÄ OCH FRÄMJA FUKTIG SÅRLÄKNING

Sorbact® Gel Dressing är ett sterilt bakterie- och svampbindande förband täckt med gel. Det består av ett grönt Sorbact®-sårkontaktlager med en vattenbaserad gel som innehåller karbomer och propylenglykol (10 %). Sorbact® Gel Dressing avger fukt till sårbädden, bidrar till att skapa en fuktig sårmiljö och underlättar autolytisk debridering.

Förebygger och behandlar sårinfektioner

Kontroll av mängden mikroorganismer hjälper den naturliga sårhäkningen. Genom att använda Sorbact® från start kontrolleras mängden mikroorganismer, vilket kan förhindra sårinfektioner och fördröjd sårhäkning.

TVÄ I ETT
- LÄTT ATT
ANVÄNDA



Håller såret fuktigt

Sorbact® Gel Dressing optimerar sårbädden genom att tillföra fukt till torra eller svagt vätskande sår. Vätskebalans främjar en naturlig sårhäkning.

Avger fukt till sårbädden

Förmågan att avge fukt till sårbädden varierar med typen av gel. Fuktagivningen är mycket viktig för förmågan till debridering i fibrinösa och nekrotiska sår samt sår med tjockt sårexudat.

Sorbact® Gel Dressing har en hög fuktagivande förmåga, vilket underlättar effektiv autolytisk debridering.

Förbandet anpassar sig efter sårbädden med minskad risk för att förbandet förskjuts.


SORBACT®-TEKNOLOGI

Underlättar sårhäkning

Förhöjda nivåer av mikroorganismer leder till infektionsrisk och fördröjd sårhäkning. Sorbact® minskar mängden mikroorganismer på ett säkert sätt och förbättrar därmed förutsättningarna för sårhäkning.

Hur det fungerar

Mikroorganismer binder till förbandets yta och avlägsnas när förbandet byts. Sorbact® underlättar sårhäkningsprocessen genom att minska mängden mikroorganismer utan att avge några aktiva ämnen till såret.

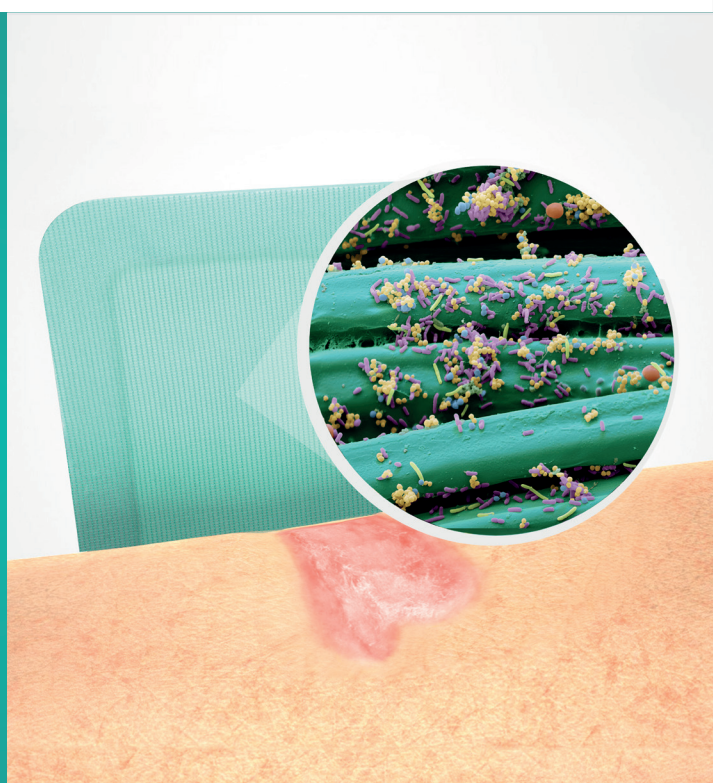

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN



Operationssår/
traumasår




Brännskador



Fotsår vid diabetes



Venösa bensår

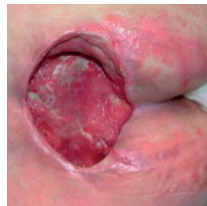

Trycksår



Cancersår

← Sorbact® Gel Dressing →

Ytliga sår



Djupa sår

Små sår



Stora sår

Sorbact® Gel Dressing finns i flera storlekar för olika typer av sår.

FALLSTUDIER – SORBACT® GEL DRESSING

Patient med svårläkt arteriovenöst sår under en period av tre år

Behandling: Sorbact® Gel Dressing och polyuretanskum som sekundärförband. Förbandet byttes var varannan till var tredje dag.



DAG 0

Olika förband, inklusive silver, provas. Odlingsprov före behandlingen med Sorbact® visar växt av *Pseudomonas aeruginosa* och *Klebsiella*.




EFTER 6 VECKOR

Sorbact® Gel Dressing möjliggjorde fortsatt autolytisk debridering av såret. Såret förbättrades kliniskt med förekomst av frisk granulationsvävnad samt avsaknad av smärta och sårluklukt.

Kvinna med rabdomyolys som utvecklade trycksår efter att ha legat hjälplös på golvet i två dagar

Behandling: En kirurgisk debridering vid start. Sorbact® Gel Dressing med ett superabsorberande sekundärförband. Förbandet byttes varje till var tredje dag.

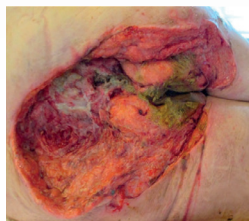

DAG 0

Infekterat, mycket vätskande och illaluktande sår, 40 x 30 cm.



EFTER 9 VECKOR

Sorbact® Gel Dressing förhindrade infektion och ansågs som säkert och lätt att använda.

BRUKSANVISNING

1. Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis.
2. Välj lämplig förbandstorlek för såret.
3. Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.
4. Använd aseptisk teknik om förbandet klipps. Kassera öppnade och oanvända förband.
5. Applicera förbandet. Se till att förbandet kommer i direktkontakt med hela sårytan. Förbandet får inte överlappa den omgivande huden.
6. Vid kaviteter och fistlar ska alltid en del av förbandet sticka ut så att det lätt kan avlägsnas.
7. Applicera ett lämpligt sekundärförband*.
8. Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar och på sårets och den omgivande hudens allmänna tillstånd. Om tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar.

Behandlande läkare ska säkerställa att produkten används enligt tillverkarens bruksanvisning.



*T.ex. Sorbact® Surgical Dressing, Sorbact® Foam Gentle Border med mjuka kanter eller Sorbact® Foam Dressing. Genom att Sorbact® används som sekundärförband skyddas den omgivande huden.

PRODUKTSTORLEKAR

Produkt	Ref nr	Storlek	st/förpackning
Sorbact® Gel Dressing	98136	7,5 x 7,5 cm	10
Sorbact® Gel Dressing	98139	3 x 15 cm	10
Sorbact® Gel Dressing	98137	7,5 x 15 cm	10
Sorbact® Gel Dressing	98180	15 x 20 cm	NYHET! 5
Sorbact® Gel Dressing	98181	20 x 25 cm	NYHET! 5

Sorbact® är en svensk innovation och sortimentet av sårforband säljs via ABIGO partners och återförsäljare i över 65 länder runtom i världen. I vissa regioner säljs Sorbact® som Cutimed® Sorbact® och Leukomed® Sorbact®. Hitta din lokala återförsäljare på abigo.com. Sorbact® är ett registrerat varumärke som ägs av ABIGO Medical AB.

