


SORBACT® GEL DRESSING

Infektionsförebyggande sårkontaktlager med hydrogel

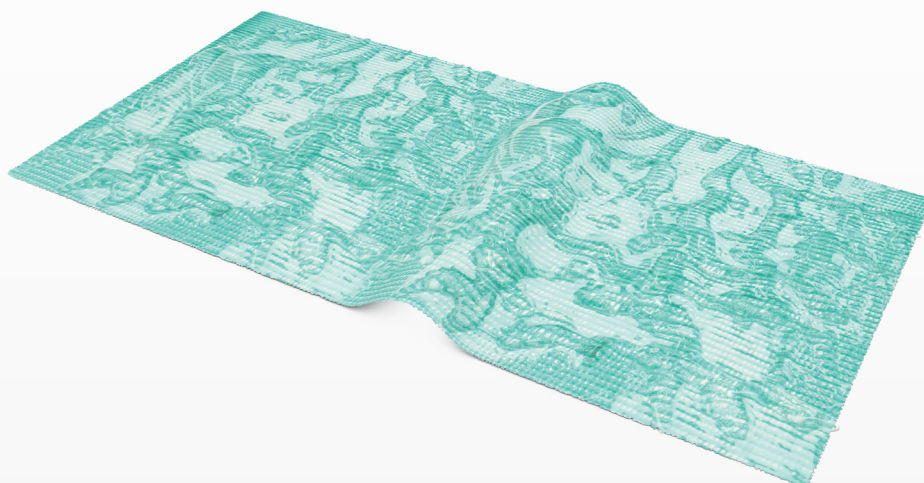

MINSKAR DEN MIKROBIELLA BELASTNINGEN I TORRA TILL LÄTT VÄTSKANDE SÅR

Sorbact® Gel Dressing är ett sterilt bakterie- och svampbindande förband täckt med gel. Det består av en grön Sorbact® sårkontaktyta med en vattenbaserad gel, som innehåller karbomer och propylenglykol (10 %). Sorbact® Gel Dressing avger fukt, möjliggör en fuktig sårmiljö och underlättar autolytisk debridering.

Produkt	Art. nr	Storlek	St/förp.
Sorbact® Gel Dressing	98136	7,5x7,5 cm	10
Sorbact® Gel Dressing	98137	7,5x15 cm	10
Sorbact® Gel Dressing	98139	3x15 cm	10
Sorbact® Gel Dressing NYHET!	98180	15x20 cm	5
Sorbact® Gel Dressing NYHET!	98181	20x25 cm	5




AVSEDD ANVÄNDNING

Sorbact® Gel Dressing är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade torra till lågexuderande sår, såsom traumasår, brännskador, kaviteter, fistlar, trycksår, diabetessår samt fot- och bensår.

BRUKSANVISNING

1. Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis.
2. Välj lämplig förbandstorlek för såret.
3. Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.
4. Använd aseptisk teknik om förbandet klipps. Kassera öppnade och oanvända förband.
5. Applicera förbandet. Se till att förbandet kommer i direktkontakt med hela sårytan. Förbandet ska inte överlappa den omgivande huden.
6. Vid kaviteter och fistlar ska alltid en del av förbandet sticka ut så att det lätt kan avlägsnas.
7. Applicera ett lämpligt sekundärförband.
8. Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt på sårets och den omgivande hudens allmänna tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar.

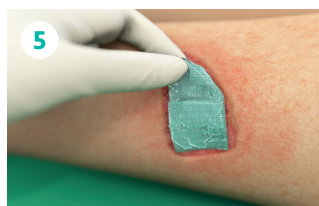

Sjukvårdspersonal har ansvar för att produkten används i enlighet med tillverkarens bruksanvisning.

SORBACT® RIGHT FROM THE START FÖREBYGGER OCH BEHANDLAR SÅRINFEKTIONER

Sorbact® mikrobiellt bindande förband förebygger och behandlar sårinfektioner genom att reducera den mikrobiella belastningen på naturlig väg. Mikroorganismerna binds irreversibelt till förbandets yta och avlägsnas när förbandet byts.

Sorbact® är en svensk innovation och sortimentet av sårförband säljs via ABIGO partners och återförsäljare i över 65 länder runtom i världen. I vissa regioner säljs Sorbact® som Cutimed® Sorbact® och Leukomed® Sorbact®. Hitta din lokala återförsäljare på abigo.com.

Sorbact® är ett registrerat varumärke som ägs av ABIGO Medical AB.