

# Mepitac®

## Fixeringstejp med mjuk silikon

### Polyuretanfilm


- Andningsbar
- Vattentät

### Vävd textil

- Formbar
- Enkel att klippa till rätt storlek

### Safetac® yta

- Minskar smärta och vävnadsskada vid borttagande

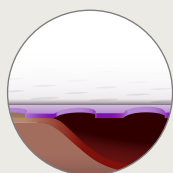


### Safetac® teknologi

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.




- Varsam fixering utan strippning av hudceller
- Minskar smärta och vävnadsskada vid borttagande
- Idealisk fixering för patienter med skör och känslig hud


## Så här används Mepitac®

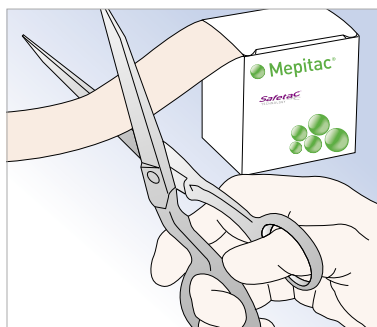

Huden ska vara ren, torr och fri från crème, salva eller dylikt. Vid start av ny förpackning, dra i den gröna markeringen till dess att tejen blir synlig. Klipp därefter till önskad storlek.

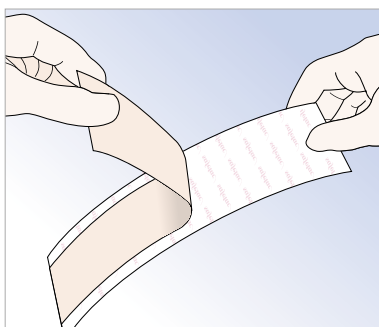

Ta bort skyddsfilm.

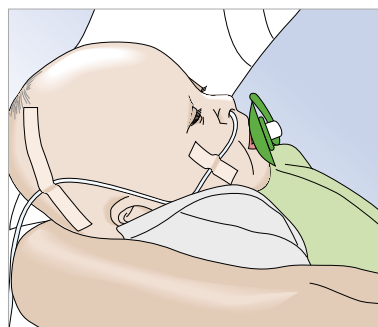

Applicera Mepitac utan att sträcka den. Vid inspektion eller justering kan Mepitac lyftas utan att förlora sina vidhäftande egenskaper.

## Så här fungerar Mepitac

Mepitac är en tejp som är mycket behaglig och lätt att ta på och av. Ytan med SafetaC ger varsam men säker fixering. Mepitac minskar smärta (även på hårbetäckta områden) och vävnadsskada vid borttagande. Mepitac lämnar inga rester på huden eller på katetrar/slangar. Mepitac är den ideala fixeringen för patienter med skör och känslig hud, allergi eller hudsjukdomar. Mepitac är lämpligt för patienter som kräver varsam applicering och upprepat borttagande av tejp från samma hudområde. Detta kan t. ex. gälla vid neonatalvård eller vård av stomi – och dialyspatienter. Mepitac innehåller inga ämnen som orsakar hudirritation, vilket gör tejen särskilt lämplig för personer som har tendens att få hudreaktioner.

## Användningsområden

Mepitac är utvecklad för fixering av förband och medicinsk utrustning såsom dräneringskanyler, slangar, sonder, elektroder, och IV kanyler. Dessutom ger Mepitac ett varsamt skydd för huden under t. ex. slangar.

## Observera

Mepitac har sämre vidhäftning i fuktig miljö t ex. i kuvöser och på patienter som svettas mycket. Mepitac är inte lämpligt för fixering av livsuppehållande utrustning. Använd inte Mepitac på arteriella katetrar och kanyler.

## Fördelar med Mepitac

- Minskar smärta och vävnadsskada vid borttagande
- Lämnar inga klisterrester
- Vattentät
- Ångpermeabel
- Anpassas väl till kroppskonturen

## Mepitac sortiment

Art.nr.	Storlek	Avd fp	Transp fp
298300	2 cm x 3 m	1	12
298400	4 cm x 1,5 m	1	12



Referenser: **1.** Wound Union of Wound Healing Societies. Principles of best practice. Minimising pain at wound dressing related procedures. A consensus document. 2004. Published by Medical Educational Partnership London. **2.** Principles of best practice: Minimising pain at dressing-related procedures. A consensus document. Toronto, Ontario, Canada: ©WoundPedia Inc 2007.

Mer information på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00  
The Mölnlycke Health Care name and logo, SafetaC and Mepitac are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

  
**Mölnlycke®**