



VELA Tango

VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL

Manual. nr. 105023



VELA Tango 100

VELA Tango 100
Coxit

VELA Tango 200



VELA Tango 100EL

VELA Tango El
Ståstöd

VELA Tango 200EL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.0. INLEDNING	3
1.1. SÄKERHET	4
1.1.1. Användning	4
1.1.2. Transport	4
1.2. GARANTI/REKLAMATIONSRÄTT	4
1.3. PACKA UPP STOLEN	4
1.4. UNDERHÅLL	5
1.4.1. Hjul	5
1.4.2. Underrede	5
1.4.3. Klädsel	5
1.5. BORTSKAFFANDE AV PRODUKT	5
1.6. ANVÄNDARMANUAL	7
1.6.1 Fästa ryggstödet	7
1.6.2. Höjdinställning (VELA Tango El)	7
1.6.3. Ändra manövrering (VELA Tango El)	7
1.6.4. Höjdinställning (VELA Tango)	7
1.6.5. Ställa in sätesvinkeln	8
1.6.6. Ställa in ryggvinkeln	8
1.6.7. Ställa in rygghöjd	8
1.6.8. Ställa in armstöd, höjd	8
1.6.9. Ställa in armstöd, bredd	9
1.6.10. Broms	9
1.6.11. Rotation (VELA Tango) (tillval)	9
1.6.12. Rotation (VELA Tango El) (tillval)	9
1.6.13. Ryggspärr (VELA Tango 200 och 200El)	10
1.6.14. Uppladdning (VELA Tango El)	10
1.6.15. coxitsäte (tillval)	10
1.6.16. Uppfällbart fotstöd (tillval)	10
1.6.17. Fotstöd (tillval)	11
1.6.18. Körbygel (tillval)	11
1.6.19. Fotpedal till broms (tillval)	11
1.6.20. Vinkelkontakt (tillval)	11
1.6.21. Handkontroll (tillval)	12
1.6.22. Elektriskt sätesvinkeln (tillval)	12
1.6.23. Elbroms (tillval)	12

1.0. INLEDNING

KÄRA KUND!

Tack för att du har köpt en VELA Tango. Vi är säkra på att stolen kommer att bli till daglig glädje för dig. Den här användarmanualen tar upp nyttig information om hur VELA Tango ställs in, manövreras och sköts.

Viktigt

Läs igenom den här användarmanualen noggrant och spara den för framtida bruk. Den bör alltid finnas tillgänglig för användaren och följa med stolen. Användarmanualen finns även på VELAs webbsida, www.vela-stolar.se, där det även finns annan relevant information om VELA Tango.

Har du frågor kan du kontakta din VELA-återförsäljare.

VELA förbehåller sig rätten till ändringar.

Vermund Larsen Sverige AB

C/O RSM Göteborg KB

Bohusgatan 15

411 39 Göteborg

Sverige

www.vela-stolar.se

GENERELLT

1.1. SÄKERHET

Den här stolen är CE-märkt och uppfyller alla gällande EU-regler. Stolen är tillverkad av:
VELA, Gøteborgvej 8-12,
9200 Aalborg SV, Danmark.

VELA Tango El är EMC-kompatibel och uppfyller alla EU-krav för elsäkerhet. Var extra försiktigt om kraftigt störande källor används, t.ex. högfrekvent kirurgisk utrustning o.likn. så att HF-kablar inte dras i närheten av stolen. Vid tvivel ska du kontakta en auktoriserad tekniker.

1.1.1. ANVÄNDNING

VELA Tango är en stol avsedd att användas inomhus av sittande personer.

- :: Stolen är inte byggd för att stå på.
- :: När en person ska sätta sig i och resa sig ur stolen ska den alltid vara bromsad.

VELA Tango 100/100El/200/200El har testats och godkänts för en användarvikt på max 160 kg.

Tänk på: Personer som använder sele i VELA Tango ska alltid hållas under uppsyn när selen är i bruk.

1.1.2. TRANSPORT

När stolen transporteras i bil, flyg och andra transportfordon bör man alltid lägga i dess broms. Stolen är inte godkänd som passagerarsäte i transportfordon och får därför inte användas som sådant.

Stolen klarar följande transportspecifikationer:

Temperatur: - 40°C till + 70°C
Luftfuktighet: 15-95 %
Lufttryck: PPP upp till 1000 meter över havet

1.2. GARANTI/REKLAMATIONSRÄTT

VELA ger garanti och reklamationsrätt enligt gällande avtal med kunden och/eller gällande köplag. Vid reklamation eller andra frågor om produkten måste produktens identifikationsnummer anges (finns under stolens säte).

VELA tar inget ansvar för skador på produkten eller användaren som uppstår p.g.a.:

- :: Transport
- :: Missbruk
- :: Vanligt slitage
- :: Felaktig användning
- :: Användning av reservdelar och tillbehör som inte är original
- :: Anpassningar gjorda av obehörig servicetekniker

1.3. PACKA UPP STOLEN

VELA Tango levereras i ett miljövänligt pappemballage.

Om det fattas delar eller om stolen är transportskadad ska du direkt kontakta VELA. Om det händer får du inte själv försöka reparera eventuella skador eller ta stolen i bruk.

Lådan stolen levereras i ska innehålla:

:: VELA Tango-stol

:: Användarmanual till stolen

Tänk på: Se punkt 1.6.1. för instruktioner om hur ryggstödet monteras korrekt.

1.4. UNDERHÅLL

Vi rekommenderar att VELA Tango kontrolleras en gång om året för att exempelvis identifiera defekta och slitna delar. Man bör själv regelbundet efterspanna alla avtagbara delar.

1.4.1. HJUL

Vi rekommenderar att hjulen kontrolleras regelbundet och att eventuella trådrester och liknande tas bort.

1.4.2. UNDERREDE

Rengörs med ljummet vatten och ev. lite pH-neutralt rengöringsmedel.

1.4.3. KLÄDSEL

Tyg: rengörs med möbelrengöringsmedel eller en hårt urvriden trasa med vatten.

Konstläder: rengörs med vatten eller mildt rengöringsmedel.

Medicinska textilier: rengör som ovanstående. Det går dock även att

använda desinfektionsmedel samt spritrengöring.

Läder: rengörs med dammsugare med mjuk borste. Undvik att använda rengöringsmedel.

1.5. BORTSKAFFANDE AV PRODUKT

Denna produkt innehåller återvinningsbara material som plast, metall och elektrisk och elektronisk utrustning etc. Som ett resultat måste bortskaffande av produkter utföras i enlighet med lokal lagstiftning och separat från vanligt hushållsavfall. Korrekt bortskaffande och återvinning bidrar till att förhindra att produkten påverkar miljön och människor negativt.

Notera: Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med ikonerna nedan. Detta identifierar utrustning som innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön om de bortskaffas felaktigt och därför måste samlas in separat.




Det är viktigt att du lämnar in använda batterier till etablerade institutioner. Detta säkerställer att batterierna återanvänds i enlighet med gällande lagstiftning och inte orsakar onödig belastning på miljön.

1.6. ANVÄNDARMANUAL

Merknad: Funktioner kan vara olika på stolar efter avtal med köpare.

Att byta ut gasfjädern eller den elektriska höjningsanordningen får endast göras av tekniker från VELA eller av en person med relevant utbildning.

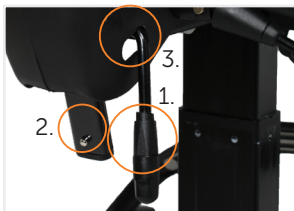

1.6.1 FÄSTA RYGGSTÖDET

Handtaget till ryggstöd (1) ställs i öppet läge. Knop fjäder (2) pressas inn och ryggstång föres ner genom skyddskåpan och hålet i holdaren. Dra fast handtaget efteråt. Handtaget föres genom skyddskåpan (3) som visas på bilden.

Obs: Ryggstöd stången ska föras genom hål så knop fjäderen går ut och låser. Se till att ryggstödet inte kan dras upp igen.



1.6.2. HÖJDINSTÄLLNING (VELA TANGO EL)

Kan betjänas från undersidan av både höger och vänster armstöd, beroende på var kontakten placeras (se punkt 1.6.3.).

Tänk på: VELA Tango El finns även med höjdställning via handkontroll (om vårdpersonalen ska kunna ställa in höjden).



1.6.3. ÄNDRA MANÖVRERING (VELA TANGO EL)

Dra ut kontakten från armstödet baksida och sätt in det på motsatta sidans armstöd eller i handkontrollens botten.

Tänk på: Höjdfunktionen får endast användas kontinuerligt i en minut, därefter krävs nio minuters paus.



1.6.4. HÖJDINSTÄLLNING (VELA TANGO)

Ställs in genom att man drar det främsta greppet på höger sida uppåt.

Obs: Symmetriska armstöd (tillval) betjänas från undersidan av det höger armstöd. Om man vill höjdställning på den vänster sidan, flyttas armstödet til den vänster sidan - og armstöd fra vänster flyttas til höger sidan.



1.6.5. STÄLLA IN SÄTESVINKELN

Ställs in genom att man drar det mittersta handtaget på höger sida uppåt.



1.6.6. STÄLLA IN RYGGVINKELN

Ställs in genom att man drar det bakersta handtaget på höger sida uppåt.




1.6.7. STÄLLA IN RYGGHÖJD

Dra upp handtaget som sitter bak på ryggen. Ställ in ryggen. Kom ihåg att dra åt handtaget efteråt.




1.6.8. STÄLLA IN ARMSTÖD, HÖJD

Ställs in genom att skruven på armstödsstängens lossas och höjden på armstödet regleras. Kom ihåg att dra åt skruven igen.

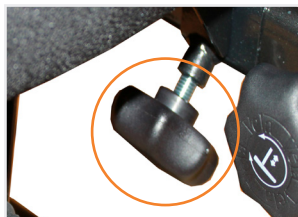

1.6.9. STÄLLA IN ARMSTÖD, BREDD

Ställs in genom att man lossar skruven under sätet och reglerar armstödsbredden genom att dra ut armstödet. Kom ihåg att dra åt skruven igen.

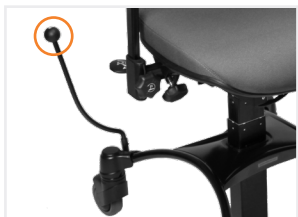

1.6.10. BROMS

VELA Tango bromsas genom att man för handtaget på sidan av stolen framåt. Lås upp stolen genom att föra tillbaka handtaget i upprätt position. **Tänk på:** Bromsen flyttas genom att man lossar skruven nederst på bromsstången, tar bort plastknoppen från hålet på den motsatta sidan och sätter i bromsstången. Kom ihåg att späanna fast handtaget igen.



1.6.11. ROTATION (VELA TANGO) (TILLVAL)

Sätet roteras genom att man drar upp det främre greppet på vänster sida.



1.6.12. ROTATION (VELA TANGO EL) (TILLVAL)

Sätet roteras genom att det främsta greppet på vänster sida skjuts bakåt. Rotationen gör att sätet kan vridas och låsas i följande positioner: 90° åt vänster och 90° åt höger. **Tänk på:** Inte alla konfigurationer av VELA Tango El kan rotera.



1.6.13. RYGGSPÄRR (VELA TANGO 200 OCH 200EL)

Ryggstödet kan ställas in i en specifik vinkel genom att man ställer in och fäster spärren som är monterad bak på stolsryggen.



1.6.14. UPPLADDNING (VELA TANGO EL)

Daglig uppladdning rekommenderas. Sätt in kontakten i laddaren – om stolen laddar lyser en diod på laddaren gul och om den är färdigladdad lyser dioden grön. Om batterispänningen är för låg under användningen hörs ett visslande ljud. Då måste stolen laddas så snabbt som möjligt. Tänk på: Stolen får inte användas medan den laddas.



1.6.15. COXITSÄTE (TILLVAL)

Vinkeln på atrodeskloffarna kan ställas in oberoende av varandra så att de kan anpassas utifrån den enskildes behov för stöd. Lossa handskruven under klaffen, ställ in vinkeln och spänn skruven igen.



1.6.16. UPPFÄLLBART FOTSTÖD (TILLVAL)


Stabiliserande fotstöd som även kan användas som steg ner i och upp ur stolen.

Tänk på: Om fotstödet är uppfällt och sitsen är i lägsta positionen, kann fotstöd och sits kollidera.



1.6.17. FOTSTÖD (TILLVAL)


Fotstödet kan ställas in på längden genom att man lossar handskruven som sitter mitt på fotplattans stång. Kom ihåg att spänna skruven igen. Fotplattan kan fällas upp så att den inte är i vägen när man reser sig ur och sätter sig i stolen.

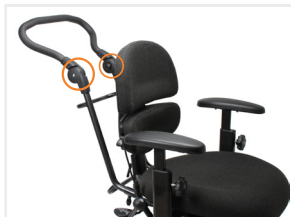

1.6.18. KÖRBYGEL (TILLVAL)

Körbygel för persontransport i stolen. Körbygeln monteras i fästena över bakhjulen.

Tänk på: Det finns även en körbygelvariant som kan ställas in på höjden. Lossa handskruven som sitter mitt på stången. Ställ in höjden. Kom ihåg att spänna skruven igen.

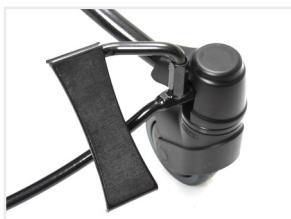

1.6.19. FOTPEDAL TILL BROMS (TILLVAL)

VELA Tango med fotpedal bromsas genom att man trycker pedalens översta del framåt. Lås upp stolen genom att föra tillbaka fotbromsen i upprätt läge.

Tänk på: Fotpedalen kan monteras till vänster eller höger bak på stolen.



1.6.20. VINKELKONTAKT (TILLVAL)


Monterad på undersidan av höger eller vänster armstöd – beroende på behov. Kom ihåg att placera uttaget korrekt (se punkt 1.6.3.).

Tänk på: VELA Tango El finns även med höjdställning via handkontroll (t.ex. om vårdpersonalen ska kunna ställa in höjden).



1.6.21. HANDKONTROLL (TILLVAL)

Handkontrollen används med hjälp av tryckknappar på framsidan. VELA-handkontroller kan ha en eller flera funktioner. Se på handkontrollens ikoner vilka funktioner knapparna har. **Tänk på:** Sätt in kontakten i handkontrollen för att använda funktionerna.

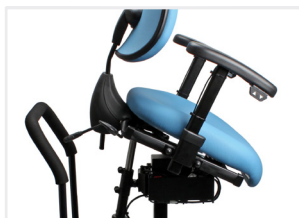

1.6.22. ELEKTRISKT SÄTESVINKELN (TILLVAL)

VELA Tango med elektriskt inställningsbar lutning ställs in till den önskade vinkeln med hjälp av handkontrollen eller vinkelkontakten.

Tänk på: Stolen bör inte användas för persontransport när sätet är lutat.



1.6.23. ELBROMS (TILLVAL)

VELA Tango med elbroms bromsas och låses upp via handkontrollen eller vinkelkontakten. Vi rekommenderar att stolen är helt bromsad/upplåst när broms används. **Tänk på:** Den här bromsen kan bara användas via kontakter under armstödet, kontakter på handkontrollen eller vinkelkontakten.