

Anpassning av Jaydynor

Korrigerig av bäckenskevhet

Korrigerig kan göras på 4 olika sätt med viss variation beroende på typ av dyna.

1. Vid beställning av ny dyna, överfylld eller överfylld från fabrik

Fluidinlägget har en höger och en vänster kammare. Då man önskar höja ena sidan för att korrigerig en felställning kan dynan beställas överfylld från fabrik i höger alternativt vänster kammare. Skulle extra fluid behövas i båda kamrarna kan även både höger och vänster kammare beställas överfyllda.

Underfylld i båda kamrarna



Överfylld i båda kamrarna



Överfylld i vänster kammare



2. Vid anpassning av befintlig dyna, med Fluidkuddar

Som tillbehör finns extra fluidkuddar som kommer i en stor och en liten variant (se bilden till vänster). Den stora har artikelnummer F119 och den lilla F1119. För korrigerig av bäcken kan dessa sättas fast med medföljande kardborrband på önskad sida under dynans fluid inlägg. Alternativt kan de sättas under båda sidorna om extra fluid önskas totalt sett. Montering görs genom att fluidpåsen trycks ihop något och fästes så att den hamnar i botten längst fram i sittgropen (se bilden till höger).



3. Vid anpassning av befintlig dyna, med Höftupbyggare

Som tillbehör finns extra höftupbyggare som kommer i olika storlekar beroende på dynans storlek. Dessa placeras i sittgropens botten på höger alternativt vänster sida under fluiden. Eftersom fluiden är delad i en höger och en vänster kammare höjs den sidan under vilken höftupbyggaren placeras och korrigering av bäckenskevhet sker.




4. Vid anpassning av befintlig dyna med medföljande luftinlägg

Jay Balance Air kan beställas med luftinlägg i sittgropen som har en kammare med en ventil (bilden till höger) alternativt med ett luftinlägg med 2 separata kammare med en ventil till varje kammare. Då korrigering av bäckenskevhet önskas bör luftinlägg med 2 kammare väljas. Korrigeringen görs genom att höger och vänster kammare pumpas upp med olika mängd luft.



Anpassning för ökad stabilitet

Balance kan beställas som komplett dyna med eller utan positioneringskomponenter. Man kan även beställa komponenterna som tillbehör/reservdel i efterhand. Då ökad stabilitet önskas placeras/behålls komponenterna i de fickor som sitter på det inre överdraget. Alla komponenter behöver inte användas utan detta är valbart beroende på var man önskar öka stabiliteten. För att skilja dynmodellerna åt vid beställning finns det ett P i artikelnumret på den positionerande modellen (ex JBALC4442FLMPEU).

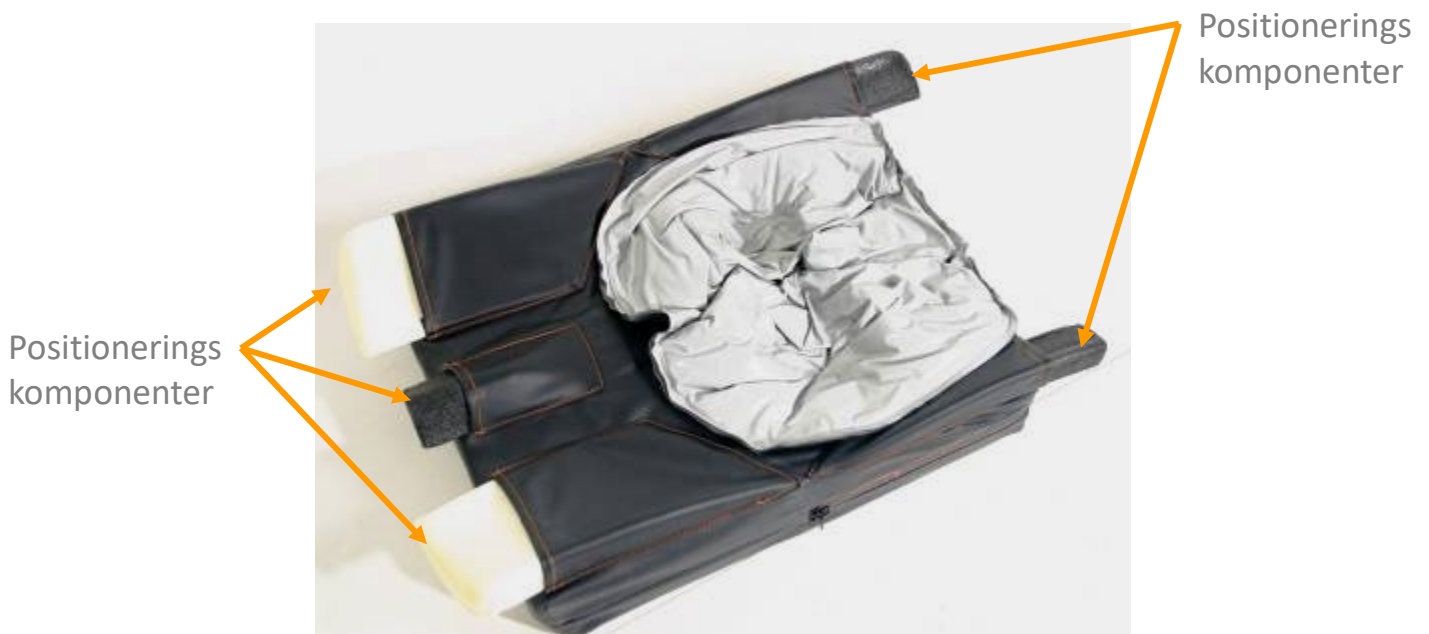

Anpassning för inskränkt flexionsförmåga i höft

Då flektionsförmågan i höften är inskränkt kan Balance anpassas genom att man gör en urgröpfung i dynans bas under valfritt lår (blå områdena i bilden). Eftersom Balance har ett mjukt skumskikt på toppen av den hårdare basen rekommenderar vi att detta skikt sparas och läggs som en polstring i urgröpfungen.

