



FreeStyle Libre 2

FLASH GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM

Snabbstartguide



Installationsöversikt

Se din bruksanvisning för fullständiga instruktioner och information om systemet.



1 Montera och applicera sensorn på kroppen

Förberedelse

STEG 1



Välj en plats på överarmens baksida.


Obs! Undvik ärr, födelsemärken, hudbristningar, hudknölar och insulininjektionsställen. Växla appliceringsställe för att förhindra hudirritation. Tänk på att det ska kännas bekvämt och fungera med dina aktiviteter.

STEG 2



Tvätta stället med vanlig tvål, torka och rengör sedan med alkoholservett. Låt stället lufttorka innan du fortsätter.

STEG 3

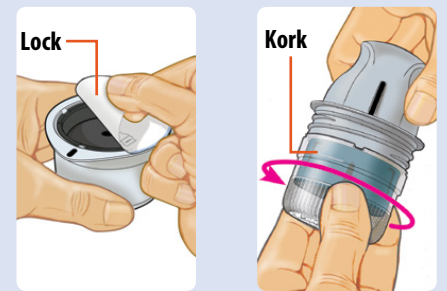


Dra av locket helt från sensorförpackningen. Skruva loss korken från sensorapplikatorn.

FÖRSIKTIG: Sensorkoderna måste matcha koderna på sensorförpackningen och sensorapplikatorn.



Förbereda sensorapplikatorn

STEG 4

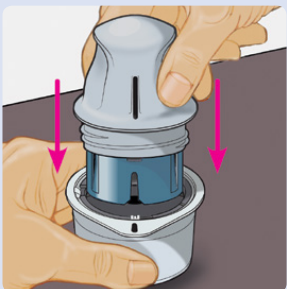

Placera den mörka markeringen på sensorapplikatorn mot den mörka markeringen på sensorförpackningen. Placera produkten på en hård yta och tryck ned sensorapplikatorn ordentligt tills det tar stopp.

STEG 5



Lyft ut sensorapplikatorn ur sensorförpackningen.

STEG 6




Sensorapplikatorn är redo att applicera sensorn.

FÖRSIKTIG: Sensorapplikatorn innehåller nu en nål. Vidrör inte sensorapplikatorns insida och sätt inte tillbaka den i sensorförpackningen.

Applicera sensorn


STEG 7

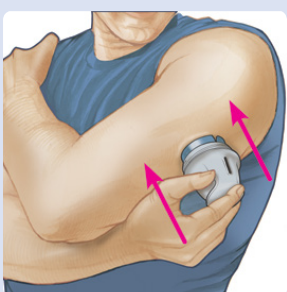

Placera sensorapplikatorn över stället och tryck ned ordentligt för att applicera sensorn.

FÖRSIKTIG: Tryck inte ned sensorapplikatorn förrän den placerats över ett förberett ställe för att förhindra oavsiktliga resultat eller skada.

STEG 8

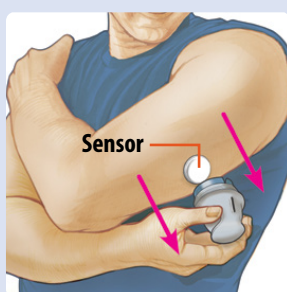

Dra försiktigt bort sensorapplikatorn från kroppen.

STEG 9




Kontrollera att sensorn sitter säkert.

Kassera den använda sensorförpackningen och sensorapplikatorn. Se *Kassering* i bruksanvisningen.



2 Starta ny sensor med avläsaren

STEG 1

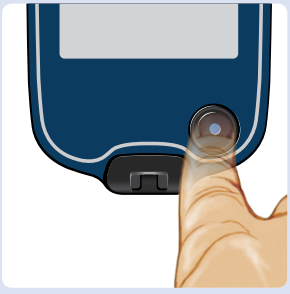

Tryck på hemknappen för att starta avläsaren.

Obs! Om du använder avläsaren för första gången följer du uppmaningarna för att ställa in datum och tid.

STEG 2



Tryck på **Starta ny sensor**.

STEG 3



Håll avläsaren inom 4 cm (1,5 tum) från sensorn för att läsa av den.

Sensorn kan användas för att kontrollera glukos efter 60 minuter.



3 Kontrollera ditt glukosvärde

STEG 1



Tryck på hemknappen för att starta avläsaren.

STEG 2




Håll avläsaren inom 4 cm (1,5 tum) från sensorn för att läsa av den.

STEG 3

Meddelande
Tryck för mer information

Aktuellt glukos
Glukos från din senaste avläsning

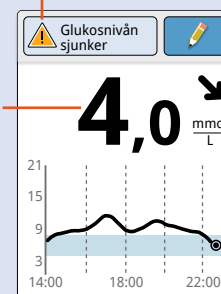

Glukostrendpil	Vad den betyder
↑	Glukosnivån stiger snabbt
↗	Glukosnivån stiger
→	Glukosnivån ändras sakta
↘	Glukosnivån sjunker
↓	Glukosnivån sjunker snabbt

Avläsaren visar ditt glukosvärde. Detta inkluderar Aktuellt glukos, Glukostrendpil och Glukosdiagram.

Ställa in larm


Sensorn kommunicerar med avläsaren automatiskt och kan avge glukoslarm om du väljer att slå **PÅ** dessa. Larmen är **AV** som grundinställning. Följ nedanstående steg för att slå **PÅ** larmen eller ändra deras inställningar.

STEG 1




Tryck på hemknappen för att gå till hemskrmen. Tryck på .

STEG 2

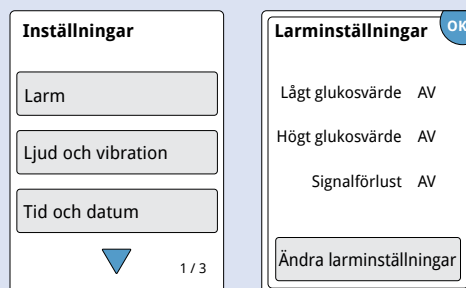

Tryck på **Larm** och sedan på **Ändra larminställningar**.

STEG 3

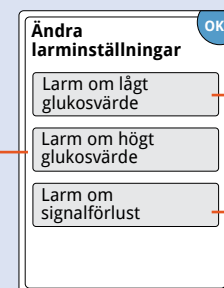

Meddelar dig när glukosvärdet är över nivån du har ställt in.


Meddelar dig när glukosvärdet är under nivån du har ställt in.

Meddelar dig när sensorn inte kommunicerar med avläsaren och att du inte får larm om lågt eller högt glukosvärde.


Välj och ställ in dina larm. Tryck på **klar** för att spara. **Obs!** Första gången du slår på larmet om lågt eller högt glukosvärde slås även Larm om signalförlust på automatiskt. Tryck på **Larm om signalförlust** för att stänga av det.

Använda larm


Du måste läsa av sensorn för att se ditt glukosvärde.

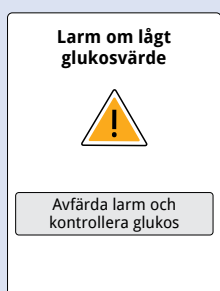

Tryck på **Avfärda larm och kontrollera glukos** eller tryck på hemknappen för att avfärda larmet och kontrollera ditt glukosvärde.

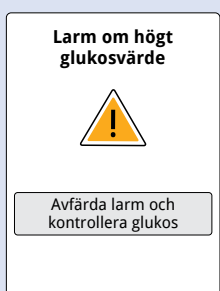

Tryck på **Nej** för att avfärda larmet. Tryck på **Ja** eller tryck på hemknappen för att avfärda larmet.

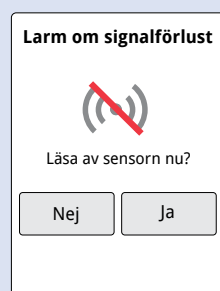

När ett larm är **PÅ**, visas status för ljud/vibration och signal på hemskrmen.

Symbol	Vad den betyder
	Ljud och vibration PÅ
	Ljud och vibration AV
	Sensorn kommunicerar med avläsaren
	Sensorn kommunicerar inte med avläsaren

Se bruksanvisningen för fler symboler.

Kontakta sjukvårdspersonal om du har följt instruktionerna som beskrivs i användarhandboken och fortfarande har problem med att ställa in systemet eller om du får symtom som inte stämmer med glukosövervakningen.

FreeStyle, Libre, and related brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc. in various jurisdictions. ©2019 Abbott. ART41106-007 Rev. A 10/19

EC REP

Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp, The Netherlands

i

CE 2797

Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon OX29 0YL, UK

Abbott