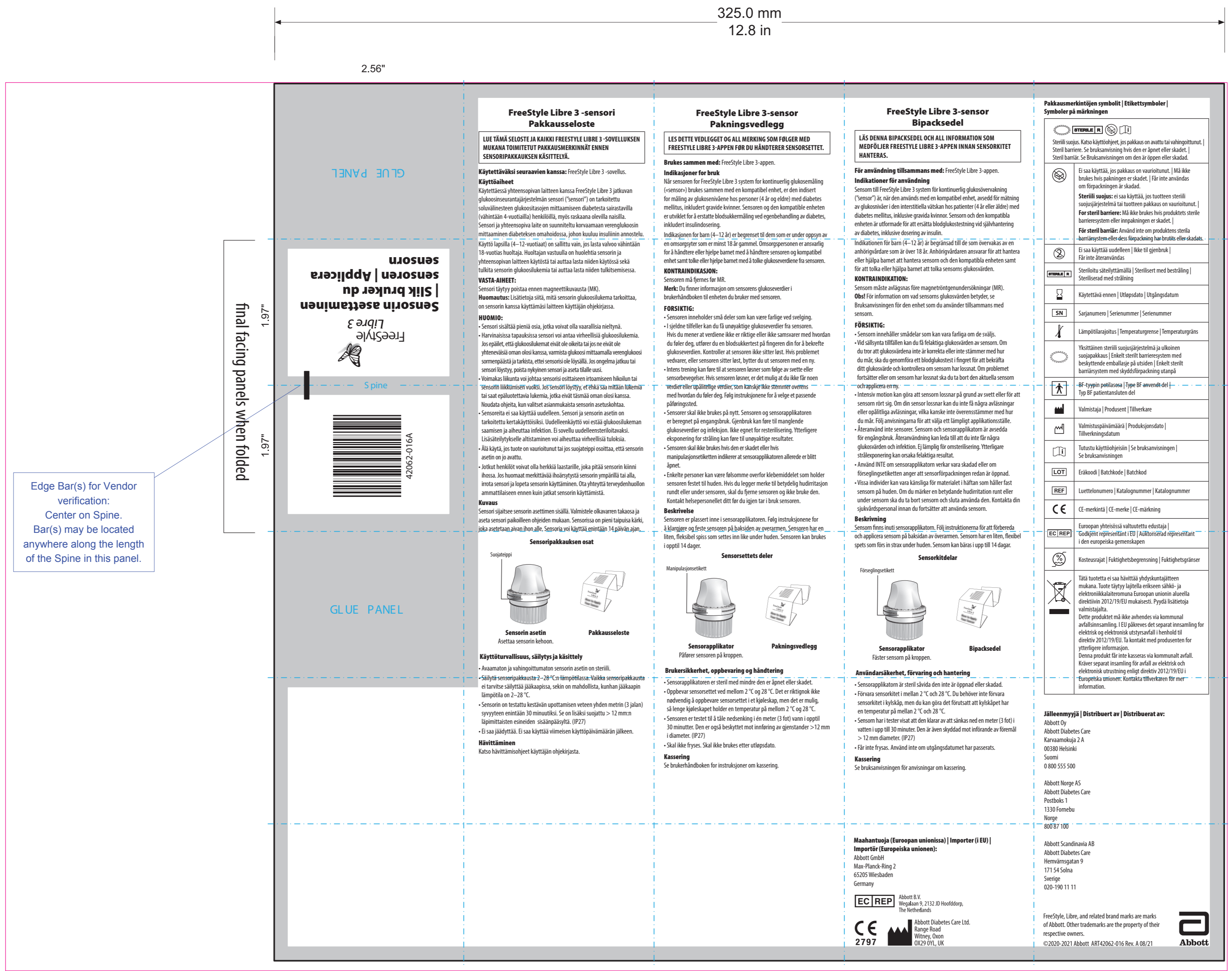


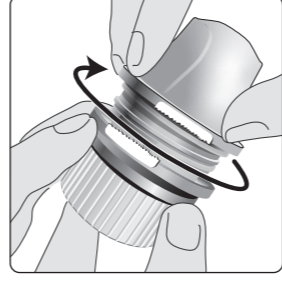
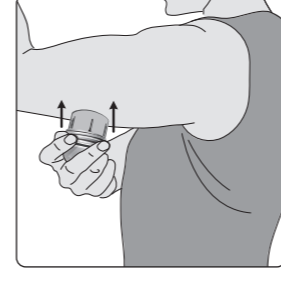
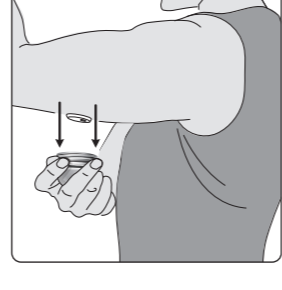





DO NOT PRINT FROM THIS FILE - FOR REFERENCE ONLY



Edge Bar(s) for Vendor verification: Center on Spine. Bar(s) may be located anywhere along the length of the Spine in this panel.

300.0 11.8 in

<p>VAIHE 1: Valitse kohta.</p> <p>VAIHE 2: Pese kohta tavallisella saippualla, kuivaa ja puhdista sitten alkoholipyyhkeellä. Anna kohdan kuivua.</p> <p>VAIHE 3: Kierä korkki irti sensorin asettimesta.</p> <p>HUOMIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÄLÄ käytä, jos tuote on vaurioitunut tai suojaiteippi osoittaa, että sensorin asetin on jo avattu. • ÄLÄ aseta korkkia takaisin, koska se voi vahingoittaa sensoria. • ÄLÄ kosketa sensorin asettimen sisäpuolta, koska siellä on neula. <p>VAIHE 4: Aseta sensorin asetin kohdan päälle. Aseta sensori painamalla asetinta lujasti alaspäin.</p> <p>HUOMIO: Sensorin asetinta EI saa painaa, ennen kuin se on asetettu valmistellun kohdan päälle, jotta ei aiheudu tahattomia seurauksia tai vammaa.</p> <p>VAIHE 5: Vedä sensorin asetin varovasti irti iholta.</p> <p>VAIHE 6: Varmista, että sensori on kunnolla kiinnittynyt. Hävitä käytetty sensorin asetin. Katso käyttäjän ohjekirjan kohta <i>Hävittäminen</i>.</p> <p>Katso sensorin käyttöohjeet FreeStyle Libre 3 -sovelluksen käyttäjän ohjekirjasta.</p> <p>TRINN 1: Velg påføringssted.</p> <p>TRINN 2: Rengjør stedet med vanlig såpe, tork og rengjør deretter med en spritserviett. La det lufttørke.</p> <p>TRINN 3: Skru av hetten på sensorapplikatoren.</p>	<p>STEG 1: Välj ett ställe.</p> <p>STEG 2: Tvätta stället med vanlig tvål, torka och rengör sedan med alkoholservett. Låt stället lufttorka innan du fortsätter.</p> <p>STEG 3: Skruva loss hylsan från sensorapplikatoren.</p> <p>FÖRSIKTIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Använd INTE om sensorapplikatoren verkar vara skadad eller om förseglingsetiketten anger att sensorförpackningen redan är öppen. • Sätt INTE på locket igen eftersom det kan skada sensorn. • Vidrör INTE sensorapplikatorns insida eftersom den innehåller en nål. <p>STEG 4: Placera sensorapplikator över stället. Tryck ner ordentligt för att applicera sensorn.</p> <p>FÖRSIKTIG: Tryck inte ned sensorapplikatorn förrän den placerats över ett förberett ställe för att förhindra oavsiktliga resultat eller skada.</p> <p>STEG 5: Dra försiktigt bort sensorapplikatoren.</p> <p>STEG 6: Kontrollera att sensorn sitter säkert. Kassera den använda sensorapplikatoren. Se <i>Kassering</i> i bruksanvisningen.</p> <p>För att använda sensorn, se bruksanvisningen i FreeStyle Libre 3-appen.</p>	     	
<p>FORSIKTIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skal IKKE brukes hvis den er skadet eller manipulasjonsetiketten indikerer at sensorapplikatoren allerede har vært åpnet. • IKKE sett på hetten igjen, da det kan skade sensoren. • IKKE rør innsiden av sensorapplikatoren, da den inneholder en nål. <p>TRINN 4: Plasser sensorapplikatoren over påføringsstedet. Trykk godt ned for å påføre sensoren.</p> <p>FORSIKTIG: For å hindre utilsiktede resultater eller skader må du IKKE trykke ned på sensorapplikatoren for den er plassert over det klargjorte påføringsstedet.</p> <p>TRINN 5: Trekk sensorapplikatoren forsiktig bort.</p> <p>TRINN 6: Pass på at sensoren sitter godt fast. Kast den brukte sensorapplikatoren. Se delen <i>Kassering</i> i brukerhåndboken.</p> <p>Se i brukerhåndboken i FreeStyle Libre 3-appen for bruken av sensoren.</p>		<p>Abbott Diabetes Care Ltd. vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi FreeStyle Libre 3 -sensori on direktiivin 2014/53/EU vaatimusten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: www.diabetescare.abbott/doc</p> <p>Abbott Diabetes Care Ltd. erklærer herved at radioutstyrstypen FreeStyle Libre 3-sensor overholder kravene i direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.diabetescare.abbott/doc</p> <p>Härmed försäkrar Abbott Diabetes Care Ltd. att radioutrustningen av typen FreeStyle Libre 3-sensor, överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. EU-direktivets fullständiga text avseende försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.diabetescare.abbott/doc</p>	
		<p>Lataa FreeStyle Libre 3 -sovellus ja käynnistä sensori noudattamalla sovelluksen ohjeita.</p>  <p>Last ned FreeStyle Libre 3-appen og følg trinnene i appen for å starte sensoren.</p>  <p>Hämta FreeStyle Libre 3-appen och följ stegen i appen för att starta sensorn.</p> 