



StarLock storleksguide

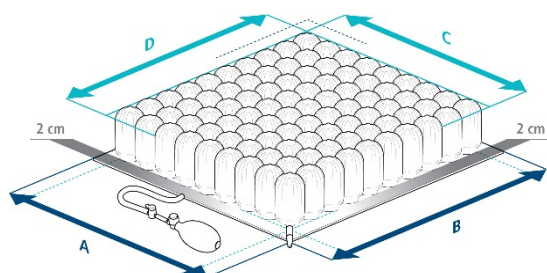

StarLock med en cellhöjd på 5, 7,5 eller 10 cm har celler som är ca 5 cm i omfång.

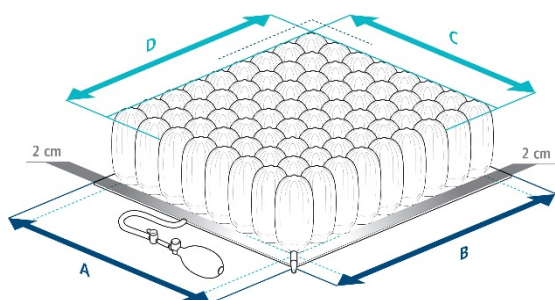

StarLock med en cellhöjd på 13 cm har celler som är ca 6 cm i omfång.

Samtliga StarLock dynor har en bottenplatta som är ca 2 cm bredare på samtliga sidor (A och B) än måttet från yttercell till yttercell (C och D).

Det är bottenplattans yttermått (A x B), som anges i all dokumentation.

Sitsbredd: Placerad i en rullstol får bottenplattans ytterkanter vikas uppåt. En dynbredd passar utmärkt till sitsbredder i ett spann av 3-6 cm. Det större spannet för breda dynor med höga celler. Se tabell.

Sitsdjup: Sitsdjupet mäts på mitten av sitsen, från framkant till ryggklädseln. Mät sitsdjupet när ryggklädseln är korrekt inställd. Placera dynan så långt bak på sitsen som möjligt.

Tabellens breddangivelser; "yttercell – yttercell" kan användas för att beräkna dynans djupmått.