

Bima active

Stadig tryckfördelande rullstolsdyna. Avsedd för aktiva personer som föredrar en offensiv sittställning. Dynan lutar 5 grader framåt.




- ✓ Stadig och form stabil
- ✓ Formgjutet tryckfördelande sittskikt
- ✓ Plan sittyta för ökad rörlighet
- ✓ 5 graders framåtlutning
- ✓ Svag sittgrop
- ✓ Lätt konstruktion
- ✓ Vinklade kanter för ryggör
- ✓ Kardborre hona på undersidan
- ✓ Kupad eller plan botten
- ✓ Flera storlekar

Konstruktion

Bima active är uppbyggd på en bas av polyeten (Evazote 50) Det gör konstruktionen lätt och stadig. 42x50cm väger endast 1050 gram. Framåtlutning 5 grader och sittgrop tillverkas av regenererat skum 100kg/m³ och polyeter 75kg/m³.

Det formgjutna sittskiktet med hexagoner skapar luftighet och en god tryckfördelning.

Dynans främre del under lår har plan ovsida för ökad rörlighet

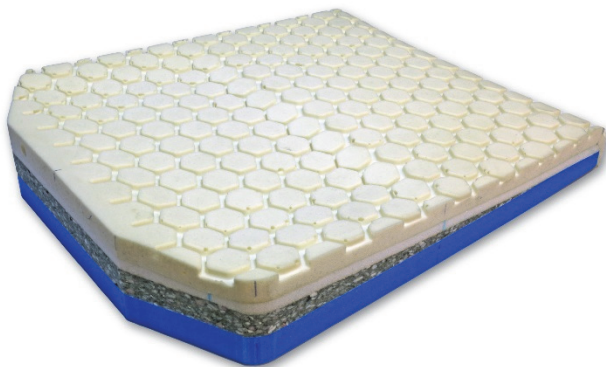

Bima active kan beställas med kupad eller plan botten. Kupad bottenform används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Plan bottenform används när rullstolen har en fastare och stadigare sits som inte behöver kompenseras med utjämningskiva.

Överdrag

Dynan har som standard ett heltäckande överdrag av svart laminerad velour. Sittytan är monterad med motsatt fiberriktning. Det förhindrar glidning framåt och samtidigt underlättar sidoförflyttning och förflyttning bakåt.

Överdraget är försett med handtag. Kardborre hona på undersidan

Alternativa överdrag

Förutom standard överdraget finns heltäckande inkontinensöverdrag med sittyta av mjuk och luftig frotté. Vätsketät undersida av slitstark polyuretan. Frottéytan har god värme- och fuktavledningsförmåga. Kardborrehona på undersidan. För att beställa lägg till **-2** i slutet av artikelnumret. T.ex. 70-4545-P-2

Anpassningar

Bima active kan anpassas direkt i fabrik enligt önskemål. Enligt beskrivning/ skiss kan vi anpassa mått, sitsvinkel och benlängdsskillnad.

Bima active med kupad botten. Artikelnummer, mått och max brukarvikt									
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd ^{tot} där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd ^{tot} = Sitsdjup på mitten						Dynans höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	35/40	40/45	45/50	50/55					
33	70-3335-K	70-3340-K	70-3345-K	70-3350-K				9/5	135
36	70-3635-K	70-3640-K	70-3645-K	70-3650-K				9/5	135
39	70-3935-K	70-3940-K	70-3945-K	70-3950-K				9/5	135
42	70-4235-K	70-4240-K	70-4245-K	70-4250-K				9/5	150
45	70-4535-K	70-4540-K	70-4545-K	70-4550-K				9/5	150
50	70-5035-K	70-5040-K	70-5045-K	70-5050-K				9/5	150


Bima active med plan botten. Artikelnummer, mått och max brukarvikt									
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd ^{tot} där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd ^{tot} = Sitsdjup på mitten						Dynans höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	35/40	40/45	45/50	50/55					
33	70-3335-P	70-3340-P	70-3345-P	70-3350-P				8/4	135
36	70-3635-P	70-3640-P	70-3645-P	70-3650-P				8/4	135
39	70-3935-P	70-3940-P	70-3945-P	70-3950-P				8/4	135
42	70-4235-P	70-4240-P	70-4245-P	70-4250-P				8/4	150
45	70-4535-P	70-4540-P	70-4545-P	70-4550-P				8/4	150
50	70-5035-P	70-5040-P	70-5045-P	70-5050-P				8/4	150

Fakta

Klassificering: AB Tryckfördelande ISO-kod 181006

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt (LVFS) MD 93/42/EEG 

Märkning enligt Hjälpmedelsinstitutets föreskrift

Dynans vikt: Bima active 42x50x8/4cm ca 1,05 kg

Material i dynbas: polyeten, polyeter, polyuretan

Material i överdrag: Svart laminerad velour, alternativt inkontinensskyddad mjuk frotté

Rekonditionering:

Tvättas för hand med tvållösning eller sprayas försiktigt

Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Dynbasen klarar även att ångtvättas.

Överdraget tvättas i maskin 60°C, med avigsidan utåt och stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumlning

Extra överdrag

För att beställa extra överdrag ange **Ö** framför artikelnumret (**Ö70-4545-P**)

För att beställa extra heltäckande inkontinensöverdrag i luftig frotté ange **Ö** framför artikelnumret **Ö70-4545-P-2**

BIMA PLASTTEKNIK AB
Dynor för rehabiliteringsvård



BIMA PLASTTEKNIK AB
Trålvägen 5
432 74 TRÅSLÖVSLÄGE
Telefon 0340-41950
Fax 0340-41790
info@bimaplastteknik.se
www.bimaplastteknik.se