


Utjämningskiva

Utjämningskivan används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta.

Den används tillsammans med dyna med plan botten utan kompensering för hängmatteeffekt.

Skivan är tillverkad i ett fast formstabilt material med låg vikt.

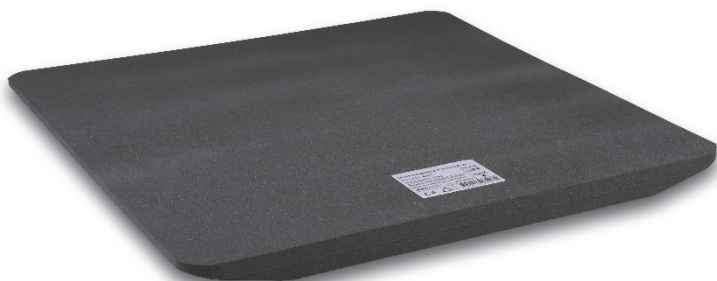

- ✓ Låg vikt
- ✓ Två höjder
- ✓ Enkel att anpassa

Artikelnummer Utjämningskiva höjd 2,4cm								
(cm)	Sitsdjup							
Bredd	35	38	40	43	45	47	50	55
35	01-3535	01-3538	01-3540	01-3543				
37,5	01-3735	01-3738	01-3740	01-3743	01-3745	01-3747	01-3750	
40	01-4035	01-4038	01-4040	01-4043	01-4045	01-4047	01-4050	
42,5		01-4238	01-4240	01-4243	01-4245	01-4247	01-4250	
45		01-4538	01-4540	01-4543	01-4545	01-4547	01-4550	
47,5		01-4738	01-4740	01-4743	01-4745	01-4747	01-4750	
50		01-5038	01-5050	01-5043	01-5045	01-5047	01-5050	
52,5			01-5240	01-5243	01-5345	01-5247	01-5250	
55			01-5540	01-5543	01-5545	01-5547	01-5550	01-5555
57,5			01-5740	01-5743	01-5745	01-5747	01-5750	01-5755
60					01-6045	01-6047	01-6050	01-6055

Artikelnummer Utjämningskiva höjd 1,5cm								
(cm)	Sitsdjup							
Bredd	35	38	40	43	45	47	50	55
35	01-3535-2	01-3538-2	01-3540-2	01-3543-2				
37,5	01-3735-2	01-3738-2	01-3740-2	01-3743-2	01-3745-2	01-3747-2	01-3750-2	
40	01-4035-2	01-4038-2	01-4040-2	01-4043-2	01-4045-2	01-4047-2	01-4050-2	
42,5		01-4238-2	01-4240-2	01-4243-2	01-4245-2	01-4247-2	01-4250-2	
45		01-4538-2	01-4540-2	01-4543-2	01-4545-2	01-4547-2	01-4550-2	
47,5		01-4738-2	01-4740-2	01-4743-2	01-4745-2	01-4747-2	01-4750-2	
50		01-5038-2	01-5050-2	01-5043-2	01-5045-2	01-5047-2	01-5050-2	
52,5			01-5240-2	01-5243-2	01-5345-2	01-5247-2	01-5250-2	
55			01-5540-2	01-5543-2	01-5545-2	01-5547-2	01-5550-2	01-5555-2
57,5			01-5740-2	01-5743-2	01-5745-2	01-5747-2	01-5750-2	01-5755-2
60					01-6045-2	01-6047-2	01-6050-2	01-6055-2

Kombinationer

Utjämningskivan är avsedd för användning i, på marknaden vanligen förekommande rullstolar. För att få en jämn sittyta i rullstolar med hängmattesits.

Skivan används i överdraget under sittdynan på marknaden vanligen förekommande plana sittdynor.

Rekonditionering

Utjämningskivan rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning 40gr som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Sköljs sedan av med ljummet vatten och lufttorkas.


Fakta

Klassificering: ISO-kod 181006

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

Vikt: 45x45x2,4cm 0,1kg

CE-märkt enligt (LVFS) MD 93/42/EEG 

Märkning enligt Hjälpmedelsinstitutets föreskrift

Material: Cellpolyeten

BIMA PLASTTEKNIK AB

Trålvägen 5

432 74 TRÄSLÖVSLÄGE

Telefon 0340-41950, Fax 0340-41790

info@bimaplastteknik.se, www.bimaplastteknik.se



BIMA PLASTTEKNIK AB
Dynor för rehabiliteringsvård