

GATE
REHAB DEVELOPMENT AB™



Bure™
Gåbord



Nya möjligheter för patienten. Nya förutsättningar för dig som hjälper till.

BureTM Gåbord

Gåbordet har en central funktion i vården men har ändå levt ett liv i skymundan. Nu har GATE kastat ut alla gamla lösningar och börjat om från början. Resultatet är Bure Gåbord som är unikt i sin ergonomi.

Förbättrar allmäntillståndet

Gåbord är förutom en utmärkt hjälp vid förflyttning och uppresning av patienter också ett värdefullt redskap vid rehabilitering. Rehabilitering med gåbord stimulerar och håller igång patienters muskler och tarmar och bidrar sammantaget till att förbättra allmäntillståndet hos sängliggande. Med hjälp av ordentligt stöd blir det enklare för den benvsaga eller orkeslösa patienten att gå och en del kan till och med gå utan stöd av vårdpersonal.

Bättre arbetsergonomi

Bure Gåbord skapar möjlighet till en mycket bättre arbetsergonomi för dig som vårdar, tränar och arbetar tillsammans med patienter. Den öppna konstruktionen ger till exempel ökat manöverutrymme och gör det lättare att komma åt i samband med uppresning eller påklädning. Sammantaget leder Bure Gåbord till en minskad arbetsbelastning och en investering i personalens hälsa.

Ökad stabilitet

Bure har anatomiskt utformade kuddar med en lätt lutning som hjälper axlar och armar att slappna av. Gåbordets konstruktion bidrar till att flytta fokus från muskulatur i händer, armar och axlar till större muskelgrupper som ben- och bröstmuskulatur. Stabiliteten förbättras och bordet blir lättare att styra samtidigt som bårrullningar dämpas och hållningen blir bättre.

NYA

Bure Double 2.0

EL

Nya Bure Double är utrustad med dubbel eldrift, dels med eldriven höj- och sänkning och dels med eldriven breddning av benstativen. Den nya versionen har en väsentligt lägre höjd över benstativen – för bättre åtkomst samt en högre brukarvikt (150kg) jämfört med tidigare version.

Hållbart

Gåbordet har extra förstärkningsband runt armstödsdynorna för att förhindra att dessa spricker vid påkörning från sidan. Armstöd i PU skum finns som alternativ för ytterligare komfort/hygien.

Lättåtkomlig handkontroll

Handkontrollen är placerad så att vårdarens och brukarens båda händer enkelt kan nå den.

Smidig steglös justering

Med eldriven höj- och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd. När patienten sedan står på plats kan höjden finjusteras steglöst så att den blir bekväm och ger optimalt stöd för gång.

Eldriven uppresning

Bure Double är en utmärkt assistent vid uppresning av patienter. Personalens belastning minimeras och därmed också förslitnings-skadorna. En del patienter kan till och med själva resa sig upp med hjälp av gåbordet.

Extra lämpligt i hemmiljö

Eftersom Bure Double är så flexibelt är det extra lämpligt för hemmiljöer. Med benen i det inre läget blir gåbordet smalt och smidigt att manövrera och kommer igenom de flesta dörrhäll.

Höjjustering i handtagen

Se tillbehör.

Ergonomiska handtag

Ergonomiskt utformade handtag som kan justeras steglöst i alla riktningar för bästa individuella anpassning. Viktigt inte minst för strokepatienter som på det här sättet kan nå sin "normala" handställning.

Lägst höjd

Bure Double kan sänkas till 85 cm och har därmed lägst höjd av alla GATEs gåbord.

Stabilt

Gåbordet har anatomiska kuddar som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben- och bröstmuskulatur. På så vis förbättras stabiliteten och bordet blir lättare att styra.

Öppen konstruktion

Den öppna konstruktionen ger samma stabilitet men större manöverutrymme. Patienten behöver inte känna sig instängd och det blir lättare för dig som hjälper till vid uppresning eller påklädning.

Låg höjd

Den låga höjden över golvet minimerar problem med att komma intill brukaren exempelvis vid sängsittande.

Låsbara hjul

Bure Double har individuellt låsbara hjul som standard på alla fyra hjul.

Benstativ med elbreddning

Elbreddningen gör det enkelt att skjuta gåbordet ända fram till brukaren, oberoende av rullstolsbredd, sängkonstruktion eller stolsbredd. Detta underlättar också för personalen vid uppresning. Med benen i det yttre läget blir gåbordet extra stabilt och kan med fördel användas av brukaren själv. Detta underlättar också för patienter som behöver extra gångutrymme.

Tål vatten

Alla eldetaljer på Bure Double har elsäkerhetsklassning IP 65 och kan därmed användas även i våta utrymmen.

Tekniska specifikationer

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. | Testad och godkänd enligt EN-11199-3/ 2005

Art. Nr.	Produkt	Bredd	Maxbrukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/Innermått
56-303/75	Bure Double 2.0 EL, 75mm hjul	58-89 cm	150 kg	87 cm	85-125 cm	25-50 cm

Bure Standard Bure S

EL | GAS | MANUELL

Bure Standard och Bure S finns i tre utföranden: EL, GAS, och MANUELL. Bure S är en smalare version av Bure Standard och speciellt anpassad för att fungera i trånga utrymmen. Samtliga modeller har en steglös höjdställning av underarmstöden.

Ergonomiska handtag

Ergonomiskt utformade handtag som kan justeras steglöst i alla riktningar för bästa individuella anpassning. Viktigt inte minst för strokepatienter som på det här sättet kan nå sin "normala" handställning.

Lättåtkomlig handkontroll

Handkontrollen är placerad så att vårdarens alternativt brukarens båda händer enkelt kan nå den.

Eldriven uppresning

Bure Standard EL och Bure S är en utmärkt assistent vid uppresning av patient eller brukare. Personalens belastning minskas och därmed också risken för förslitnings-skador. En del patienter kan till och med själva resa sig upp med hjälp av gåbordet.

Extra lämplig i hemmiljö

Bure S är extra lämplig i trånga miljöer så som hemma eller på vissa vårdboenden. Bure S kommer igenom de allra flesta dörröppningar som är 70 cm och bredare.

BURE S



EL

Bure Standard och Bure S EL passar dig som behöver ett gåbord som är utrustat med uppresningshjälp och går att ställa in i höjdlöd när patienten redan står på plats.

GAS

Bure Standard och Bure S GAS passar dig som vill ha ett kvalitativt gåbord som går att ställa in steglöst och snabbt men inte behöver uppresningshjälp med hjälp av elställdonet.



MANUELL

Bure Standard och Bure S MANUELL är för dig som behöver ett bra och individuellt anpassningsbart gåbord men inte behöver ställa in det i höjdlöd särskilt ofta och inte är i behov av uppresningshjälp med hjälp av elställdonet.



Höjdställning i handtagen

Se tillbehör.

Hållbart

Gåbordet har konstruerats för att hålla länge. Exempelvis finns det ett extra förstärkningsband runt armstödsdynorna för att förhindra att dessa spricker vid påkörning från sidan.

Stabilit

Gåbordet har anatomiska kuddar som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben- och bröst-muskulatur. På så vis förbättras stabiliteten och bordet blir lättare att styra.

Smidig steglös justering

Med eldriven höj och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd. När patienten står på plats kan höjden sedan finjusteras steglöst så att den blir bekväm, ger rätt stöd och är optimal för gång.

Broms och riktningsspärning

Som tillbehör finns det en- eller tvåhandsbroms som placeras så att brukaren själv kan nå den från sin gå-position. Handbromsen verkar på bakhjulen och i bromskittet ingår också riktningsspärrade hjul som underlättar för brukaren att hålla rätt kurs vid gång.

Öppen konstruktion

Den öppna konstruktionen ger samma stabilitet men större manöverutrymme. Patienten behöver inte känna sig instängd och det blir lättare för dig som hjälper till vid uppresning eller påklädning.

Tål vatten

Alla detaljer på Bure Standard EL och Bure S EL har elsäkerhetsklassning IP 65 och kan därmed användas även i våta utrymmen.

Samtliga Gåbord kan beställas med 75, 100 eller 125mm hjul – anges vid beställning. (Om inget annat anges så avser höjdmått nedan produkter med 125mm hjul).

Tekniska specifikationer

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. | Testad och godkänd enligt EN-11199-3/ 2005

Art. Nr.	Produkt	Bredd	Maxbrukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/Innermått
56-312	Bure Standard EL	78 cm	150 kg	80 cm	91-131 cm	25-50 cm
56-311	Bure Standard GAS	78 cm	150 kg	80 cm	91-129 cm	25-50 cm
56-310	Bure Standard MANUELL	78 cm	150 kg	80 cm	91-133 cm	25-50 cm
56-302	Bure S EL	66 cm	150 kg	79 cm	91-131 cm	30-45 cm
56-301	Bure S GAS	66 cm	150 kg	79 cm	91-129 cm	30-45 cm
56-300	Bure S MANUELL	66 cm	150 kg	79 cm	91-133 cm	30-45 cm

Bure Ortho

ORTHO | ORTHO S

Ortho är speciellt framtaget för Ortopedavdelningen och situationer som kräver extra ben- och gångutrymme för brukaren. Ortho har en kraftig elmotor för eldriven höjdjustering. Den optimala höjden för gåbordet kan därmed ställas in med patienten på plats och gåbordet kan också användas som uppresningshjälp. Ortho finns också i en smal version, Ortho S (finns enbart i version GAS)- maxbredd på stativ endast 65cm.

Ergonomiska handtag

Kan justeras steglöst i alla riktningar.

Lättåtkomlig handkontroll

Placerad så att vårdarens eller brukarens båda händer enkelt kan nå den.

Tål rinnande vatten

Elektronik har IP65 och tål därför rinnande vatten.

Eldriven uppresning

Bure Ortho är en utmärkt assistent vid uppresning av brukare.

Obegränsat gångutrymme framåt

Brukare med kontrakturer samt patienter med helbensgips kan ha ett rakt ben och ändå få bordet nära sig.

Höjdjustering i handtagen

Se tillbehör.

Låg lägsta höjd

Endast 85 cm (då 75mm hjul används).

Stabilt

Gåbordet har anatomiska kuddar som avlastar axlar, armar och nacke.

Smidig steglös justering

Gör det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd.

Låg höjd på bottenstativet

Vilket gör det möjligt att komma under de flesta sängmodeller.

Broms och riktningsspärning

Placeras så att brukaren själv kan nå den från sin gå-position.

Öppen konstruktion

Ger samma stabilitet men större manöverutrymme.

ORTHO S



Samtliga Gåbord kan beställas med 75, 100 eller 125mm hjul – anges vid beställning. (Om inget annat anges så avser höjdmått nedan produkter med 125mm hjul).

Tekniska specifikationer

CE CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.

Art. Nr.	Produkt	Bredd	Maxbrukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd
56-317T	Bure Ortho, 125mm hjul	78 cm	150 kg	80 cm	90-130 cm	25-50 cm
56-317T/75	Bure Ortho, 75mm hjul	78 cm	150 kg	80 cm	85-125 cm	25-50 cm
56-318	Bure Ortho Gas, 125mm hjul	78 cm	150 kg	80 cm	90-130 cm	25-50 cm
56-318/75	Bure Ortho Gas, 75mm hjul	78 cm	150 kg	80 cm	85-125 cm	25-50 cm
56-318-S	Bure Ortho S Gas, 125mm hjul	65 cm	150 kg	79 cm	90-130 cm	30-45 cm
56-318-S/75	Bure Ortho Smal Gas, 75mm hjul	65 cm	150 kg	79 cm	85-125 cm	30-45 cm

Bure XL

EL

Bure XL är framtagen för större och tyngre patienter och har därför extra plats och styrka. Eftersom det vid vård och omvårdnad av tyngre patienter är extra viktigt med kraftfulla hjälpmedel levereras Bure XL alltid med eldrift.

Ergonomiska handtag

Ergonomiskt utformade handtag som kan justeras steglöst i alla riktningar för bästa individuella anpassning. Viktigt inte minst för strokepatienter som på det här sättet kan nå sin "normala" handställning.

Lättåtkomlig handkontroll

Handkontrollen är placerad så att vårdarens alternativt brukarens båda händer enkelt kan nå den.

Eldriven uppresning

Bure XL är en bra hjälp vid uppresning av patient eller brukare och minskar belastningen för personalen. En del patienter kan till och med själva resa sig upp med hjälp av gåbordet.

Öppen konstruktion

Den öppna konstruktionen ger samma stabilitet men större manöverutrymme. Patienten behöver inte känna sig instängd och det blir lättare för dig som hjälper till vid uppresning eller påklädning.

Tål vatten

Alla eldetaljer på Bure XL har elsäkerhetsklassning IP 65 och kan därmed användas även i våta utrymmen.

Sjukhus- och vårdmiljöer

På grund av sin storlek lämpar sig Bure XL bäst i sjukhus- och vårdmiljöer.

Höjjustering i handtagen

Se tillbehör.

Hållbart

Gåbordet har konstruerats för att hålla länge. Exempelvis finns det ett extra förstärkningsband runt armstödsdynorna för att förhindra att dessa spricker vid påkörning från sidan.

Stabil

Gåbordet har anatomiska kuddar som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben- och bröstmuskulatur. På så vis förbättras stabiliteten och bordet blir lättare att styra.

Smidig steglös justering

Med eldriven höj och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd. När patienten står på plats kan höjden sedan finjusteras steglöst så att den blir bekväm, ger rätt stöd och är optimal för gång.

Designad för tyngd

Bure XL är framtagen för att ge ett bra stöd åt tyngre patienter på upp till 240 kg. Gåbordet är också breddat för att ge god stabilitet och bra utrymme. Inermåttet är på 44-62 cm. Det extra benutrymme underlättar speciellt mycket för patienter som behöver extra gångutrymme på grund av exempelvis spasmiska benrörelser.

Samtliga Gåbord kan beställas med 75, 100 eller 125mm hjul – anges vid beställning. (Om inget annat anges så avser höjdmått nedan produkter med 125mm hjul).

Tekniska specifikationer

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. | Testad och godkänd enligt EN-11199-3/ 2005

Art. Nr.	Produkt	Bredd	Maxbrukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/Inermått
56-315	Bure XL EL	88 cm	240 kg	78 cm	91-131 cm	44-62 cm

Tillbehör

Drophållare med fäste

56-338 Skapar goda möjligheter för patienten att röra sig fritt i rummet, på avdelningen eller i hemmet. Levereras tillsammans med fäste.



Förhöjningskudde armstöd

56-327 Ger extra stöd till långa brukare och höjer armstödsytan med 70mm. (Ej Rise & GO, Rise & Go Double)

Mjukkorg med fäste

56-389 Korg med fäste har plats för det allra viktigaste.



Tramprör

56-331 Fungerar som en motvikt och ger extra stabilitet och säkerhet då gåbordet ska användas vid uppresning. Standard på Bure Rise & GO.

Riktningsspärrat hjul

56-359 125 mm
56-355 100 mm
57-043 75 mm

Hjul med broms

56-361 125mm
56-358 100mm
56-387 75mm

Handbromstillsats

Två bromsar

56-326-0 Bure Standard/S/Ortho
58-334-0 Bure Rise & Go
56-320-0 Bure XL

En broms

56-326-1 Bure Standard/S/Ortho
58-334-1 Bure Rise & Go
56-320-1 Bure XL

Kompletterar gåbordet med handbroms så att brukaren vid gångträning själv kan bromsa bordets rörelse. Riktningsspärrade hjul ingår för extra säkerhet/hjälp. Enhandsbroms finns både som vänster och höger.

Då Handbromstillsats är monterad så ökar bottenstativets bredd med +4cm.



Höjjustering i handtagen*

Till alla elmanövrerade gåbord finns möjligheten att vid beställning välja till inbyggd höjjustering i handtagen. Användaren kan därmed tryggt och enkelt manövrera höjden själv utan att släppa taget.

Ställbart sidostöd

56-337 Förhindrar att armarna glider av armstödsdynorna. Justeras steglöst längs med gåbordets sida vilket stabiliserar gången ytterligare.

Gaskolv

56-330 150N
56-380 200N



Syrgastubshållare med fäste

56-336 Gör att patienten inte längre behöver vara låst vid sängen.

Elmotorsats höj/sänk

56-332T Uppgraderar Bure Standard och Bure S från GAS till EL.

Ståplatta/Stål

(ej på bild)
56-333 Bure Std
56-325 Bure Double
56-339 Bure S
56-386 Bure XL

Ståplatta/Aluminium (se bild)


56-333-STD Kort (Std, S, Rise & Go)
56-333-DB Kort (Double, Rise & Go Double)
56-383-STD Lång (Std, S, Rise & Go)
56-383-DB Lång (Double, Rise & Go Double)
56-392 Kort Bure Ortho
56-393 Lång Bure Ortho

Ett smidigt alternativ när du vill förflytta patienten en kort bit.

BureTM

Gåbord

- Mänskligare formgivning med följsamma linjer som inte innesluter patienten.
- Konstruktion som ökar stabilitet och kontroll.
- Finns i åtta grundutföranden med stora möjligheter till individuell anpassning.
- En rad funktionella tillbehör fulländar den individuella passformen.
- Formgivning och funktioner som skapar god arbetsergonomi och underlättar det dagliga arbetet.
- Eldriven uppsyningshjälp som gör att patienten ofta själv kan delta vid uppsyningen.
- Eldriven breddning av benstativen skapar större frihet och ger en bättre funktion vid uppsyning eller förflyttning.

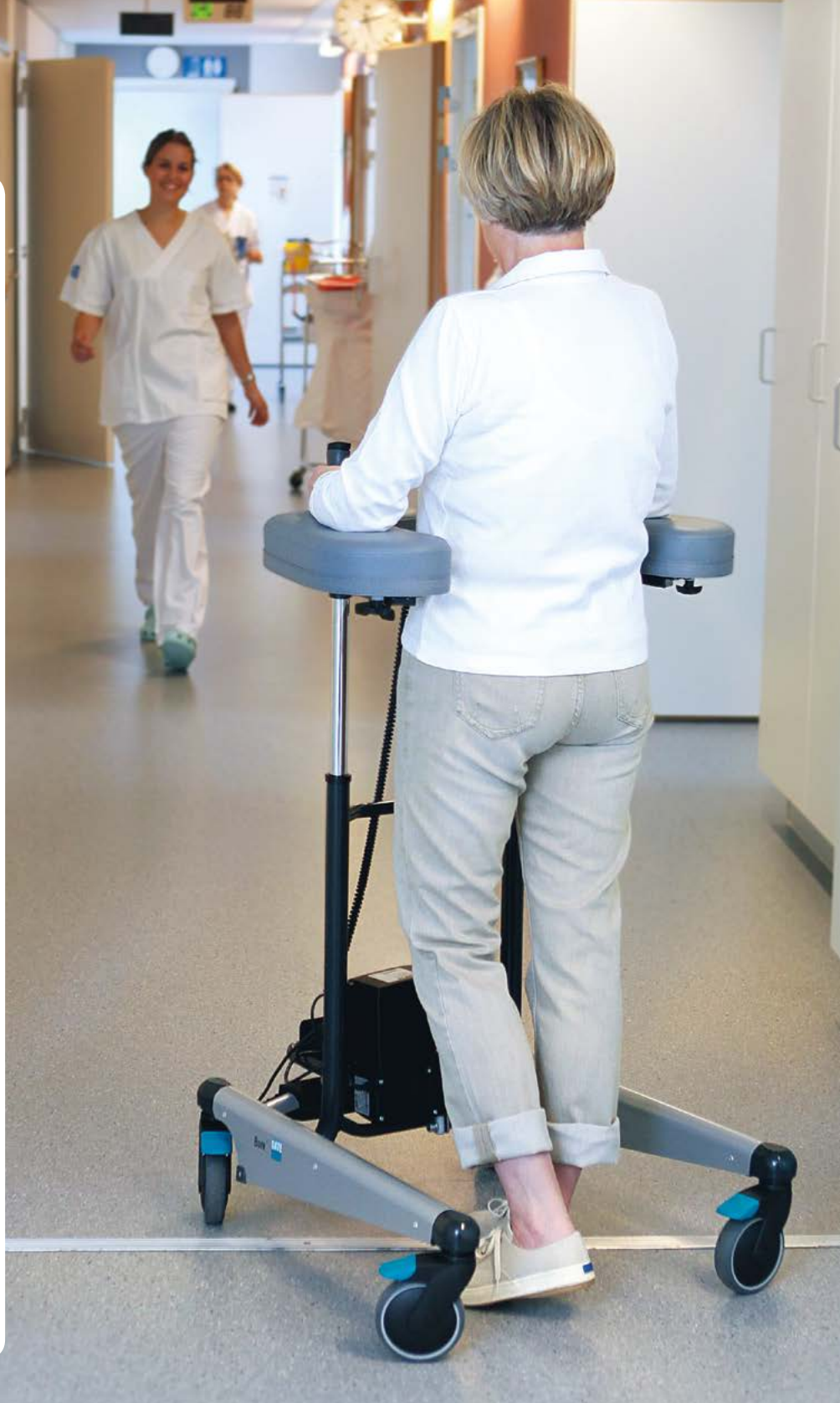

GATE

WE DO BETTER.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-330 21 Reftele
info@gaterd.se | www.gaterd.se



GATE COLLECTION