

Kort-information-till brukare

Gåstol Meywalk 4

Meywalk 4 är en gåstol som finns i fyra storlekar: Mini, Small, Medium och Large

Storlek Micro, svart/grå

Storlek Mini, gul

Storlek Small, grön

Storlek Medium, röd

Storlek Large, svart

Standardutförande: Bålstödsring, sadel, fjädrar, handtagsbygel, parkeringsbromsar, släpbroms, riktningsspärr, avbärarhjul och massiva hjul.



Meywalk 4, storlek Medium

Användningsområde

Meywalk 4 är en gåstol som skall användas av en person som behöver stöd vid upprätt gående eller stående. Gåstolen kan användas både ute och inne. Gåstolen skall vara individuellt inställd i bålstöds- och sadelhöjd. Meywalk 4 får inte användas att köra någon/något på.

Läs igenom bruksanvisningen innan gåstolen används första gången. Bruksanvisningen hittar du på vår hemsida: www.maydayaid.se



Viktigt att veta

Vid utomhusanvändning får du som brukare aldrig lämnas ensam i gåstolen, en vuxen person måste alltid vara med. Gå alltid på slätt, plantunderlag. Tänk på att ojämn mark kan orsaka att gåstolen välter eller rullar iväg.

Försök att förutse olycksrisker såväl i inomhusmiljö som utomhus!

Kort-information-till brukare

Gåstol Meywalk 4




Ta med i bil / Ta isär vid transport



Meywalk 4 kan delas i två delar. Dra upp sättenheten, som sitter fästad på de två vertikala rören, ur den nedre chassidelen.

Sättenheten, övre delen, får inte placeras i nedre chassit om inte fjädrarna är på plats i vardera röret.

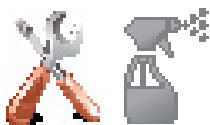

Skötsel / Underhåll

Runt hjul samlas mycket damm och hår, ta bort smuts och damm regelbundet eller när gåstolen rullar trögt.

Kontrollera alltid att hjulen sitter fast och att bålstöds- och sadelhöjd är placerad på rätt höjd för dig som använder gåstolen. Använd aldrig en skadad eller felaktig gåstol.

Tvätta ren gåstolen med mjuk, fuktig trasa och milda rengöringsmedel t ex diskmedel. Kontrollera alltid att bromsarna fungerar efter tvätt!
Förvara gåstolen inomhus.

Mer information hittar du på www.maydayaid.se