



**VELOX®**

Ett lättare liv



**VELOX®**

**lätt och effektiv inhalation**

Oerhört tyst – otroligt mobil –  
ovanligt annorlunda

**Made in Germany**

 **ACTIVE**  
care  
[www.activecare.se](http://www.activecare.se)



VELOX®



VELOX®  
Junior



VELOX®  
care

VELOX är en helt ny nebulisator med mesh-teknik från tyska PARI. Stor vikt har lagts vid att det skall vara så **få delar** och **enkelt handhavande** som möjligt. Som kvitto på sina ansträngningar har de vunnit pris för sin ergonomiska design.

VELOX är en **mycket lätt och snabb** nebulisator med en batteritid på 4 timmar och normal inhalationstid på 3-4 minuter. Allt förpackat i en apparat som väger 110 g (exkl. batteri). VELOX drivs av antingen batterier eller nätanslutning i väggen.


Både VELOX (vuxen) och VELOX Junior kommer med en praktisk förvaringsväska, VELOX Care rengöringsset för aerosol-huvudet samt nätanslutning. Till VELOX Junior medföljer även vår nya SMARTMASK Baby.

Då det är en mesh-nebulisator är den naturligtvis **tyst**.

Produktspecifikation	
Vikt totalt	110 g exkl. batteri, 140 g inkl. batteri
Nätadapter	100-240V, 50-60 Hz
Garanti	2 år på VELOX kontrollenhet 6 mån på VELOXcare
Förväntad livslängd aerosolgenerator	1 år


Artikel	Artikelnr	
VELOX inkl. munstycke För vuxna och för barn 3 år och äldre.	055G1001	
VELOX Junior inkl. SMARTMASK Baby och munstycke. För barn upp till 3 års ålder.	055G1101	
VELOX årsförpackning	055G3010	
VELOX Junior årsförpackning	055G3110	
VELOXcare rengöringsset	055G6100	
VELOX nätadapter (EU)	055G7100	
VELOX väska	055E8000	
Lock till VELOX	055G3500	
Lock till VELOX Junior	055G3510	

PARI Tillbehör	Artikelnr	
PARI SMARTMASK	041G0730	
PARI SMARTMASK Kids	078G5000	
PARI SMARTMASK Baby	055G4500	
PARI PEP S-system	018G4000	
PARI utandningsventil för filter	041G0500	

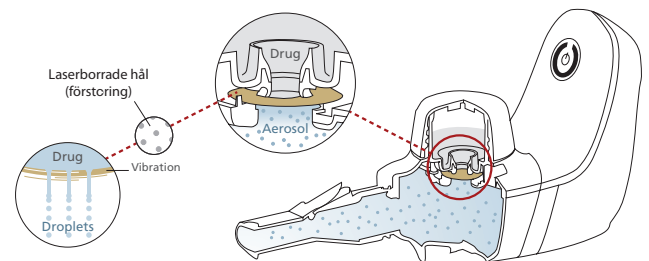

Velox är en elektronisk nebulisator som använder sig av en teknik som bygger på ett aktivt vibrerande membran för att skapa aerosol, även kallat mesh-teknik. Aerosolen skapas genom att vätska pressas genom de små laserborrade hålen i membranet.

I jämförelse med en konventionell jet-nebulisator, så produceras en mer homogen aerosol med meshtekniken. Detta innebär att vid samma MMD så bildar Velox en högre andel respirabla partiklar än med en jet-nebulisator.

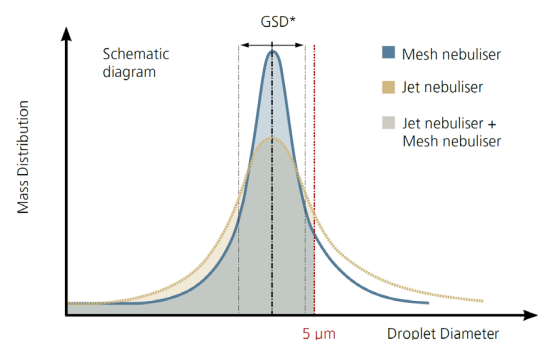

Aerosoldata	
Total Output Rate	497 mg/min
MMD	3,8 µm
Mass percentage < 5 µm	74%

VELOX passar ihop med övriga PARI-sortimentet



Active Care Sverup AB  
Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL  
Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05  
E-mail: info.activecare.se  
Internet: www.activecare.se