



reddot design award

MagniLink Vision Premium

– möjligheternas system för hem, skola och arbete



MagniLink Vision Premium

MagniLink Vision Premium – möjligheternas system

MagniLink Vision Premium är en avancerad läskamera med prisbelönt design* som förstorar och förstärker text och bilder med ett fantastiskt resultat. Systemet är ergonomiskt utformat och fullt modulariserat – varje användare väljer sin egen kombination.

- **Genomtänkt design** – funktion och form i harmoni
- **Hög tillgänglighet** – enkel att hantera och använda
- **Individuellt anpassningsbar** – möter allas behov
- **God ergonomi** – bättre helhetsupplevelse
- **Hög bildkvalitet** – äkta HD/Full HD
- **God belysning** – jämn och dimbar för ljuskänsliga
- **Låg initial förstoring** – ger full översikt
- **Stabilt läsbord A3** – ergonomiskt och tystgående läsbord av aluminium med mjuka kanter och separata friktionsbromsar (tillval)



MagniLink Vision Premium

1. Välj grundmodell

MagniLink Vision kan levereras med HD- eller Full HD-kamera** och med eller utan ett bekvämt läsbord som underlättar läsning av längre textstycken.



2. Komplettera med bildskärm

MagniLink Vision kan kompletteras med en low vision-anpassad monitor, som finns med 18,5" eller 23" skärmstorlek. LVIs skärmar passar designmässigt med MagniLink Vision-systemet.



3. Komplettera med panel

Välj panel med tre eller fem tryckknappar, alternativt tre vred. MagniLink Vision kan även fås med en extern kontrollpanel.



Valfrihet

4. Välj TTS Talfunktion och få texten uppläst

Med TTS (Text To Speech) blir MagniLink Vision både en läskamera och en läsmaskin, som kan läsa upp text.



5. Välj datortillkoppling – Split

Anslut en splitbox, en PC/Mac och/eller en avståndskamera och bilden kan delas mellan dessa enheter och läskameran. Perfekt i skol- eller arbetsmiljö.



* Designen har belönats med det prestigefyllda priset reddot design award.

** Äkta Full HD innebär Full HD-kamera, Full HD-bildskärm samt 100% digital bildöverföring. Därtill använder LVI en rad egenutvecklade bildförbättringstekniker.

MagniLink Vision – tillval TTS



Tillvalet Text To Speech erbjuder det bästa av två världar – en högkvalitativ läskamera och läsmaskin med uppläsning av text i en och samma produkt. Det innebär ökad läshastighet och uthållighet samt avslappnad läsning.

- Kan skanna en hel A4-sida/US Letter
- Möjlighet att öppna/spara text på USB
- Funktion för läsning av papper som placerats snett
- Automatisk språkigenkänning
- Justering av storlek, färg och typsnitt
- Lyssna till text med de inbyggda högtalarna eller med anslutna hörlurar

Texten kan presenteras på olika sätt – och även scrolas i "tyst läge":

The Page mode, displays text as a page with automatic line breaks.

1. Kolumnläge

This is line mode

2. Radläge

word

3. Ordläge

In Photo mode, text is shown as the photo was taken. A rectangle highlights the word.

4. Bildläge*

Läge 1-3 är perfekt för AMD-användare

Läge 4 är användbart för RP-användare

* Det finns även ett "bild- och radläge" samt ett "bild- och ordläge".



MagniLink Vision – tillval Split



Tillvalet Split är en flexibel lösning som erbjuder datorkoppling och hårdvarusplit. Den möjliggör växling och delning av skärmbilden mellan läskamera, avståndskamera och dator (PC/Mac). Systemet är ergonomiskt och lämpar sig för arbets- och skolmiljöer.

- Dela skärmbilden mellan dator (PC/Mac) och läs-/avståndskamera
- Välj mellan hårdvarusplit eller mjukvarusplit
- Unik funktion för optiskt centrum – bildens centrum blir aldrig beskuret
- Alla funktioner styrs från en användarvänlig kontrollpanel
- Hela skrivbordets arbetsyta tillgänglig även i Split-läget
- Det finns flera olika fästansordningar för både avståndskamera och bildskärm.




EUC – anpassning på individnivå

EUC (End User Configuration) är en mjukvara som gör det möjligt att anpassa systemet till varje användares unika behov. Funktioner som inte önskas kan tas bort och färger, typsnitt etc kan ställas in efter önskemål från användaren. Detta gör systemet enklare att använda och är även praktiskt vid recirkulation.

Med EUC är det möjligt att kontrollera bland annat följande funktioner:

- Förstoringsnivåer
- Artificiella färger
- Referenslinje och gardin
- Gråskalor
- Ljusnivå
- Bildrotation
- Typsnitt

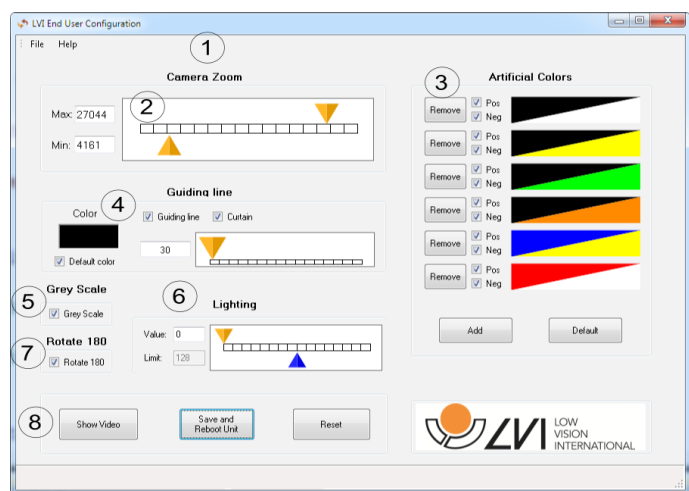

1 Välj grundmodell

Artikelnr	Benämning
MLV-HD	HD 720p-kamera inklusive X/Y läsbord
MLV-FHD	FHD 1080p-kamera inklusive X/Y läsbord
MLV-HD-1	HD 720p-kamera inklusive bordsfäste
MLV-FHD-1	FHD 1080p-kamera inklusive bordsfäste



2 Komplettera med bildskärm/kontrollpanel

Artikelnr	Benämning
A0	Ingen monitor inkluderad
A1 (MLV-A103)*	18,5" LVI Low Vision-anpassad monitor**
A2 (MLV-A104)*	23" LVI Low Vision-anpassad monitor**
B0	Utan panel. Används vid beställning av hårdvarusplit (C3-C4 / D1-D4)
B1 (MLV-A106-3)*	3-vredspanel
B2 (MLV-A105)*	3-knappspanel
B3 (MLV-A107)*	5-knappspanel
B4 (MLV-A110A)*	Extern kontrollpanel



3 Välj tillval (datortillkoppling/avståndskamera/TTS)

Artikelnr	Benämning
C1 (MLV-A100)*	DVI Switch MagniLink
C2 (MLV-A101)*	Mjukvarulicens Win/Mac+USB
C3 (MLV-A111A)*	Hårdvarusplit (splitbox, extern kontrollpanel, kablar)
C4	Som ovan, men splitboxen monterad på MagniLink Vision
D1 (MLV-A112)*	SD Avståndskamera MagniLink Vision inkl extern kontrollpanel + hårdvarusplit
D2	Som ovan, men splitboxen monterad på MagniLink Vision
D3 (MLV-A113)*	HD Avståndskamera MagniLink Vision inkl extern kontrollpanel + hårdvarusplit
D4	Som ovan, men splitboxen monterad på MagniLink Vision
E1	TTS Text To Speech, inbyggd textuppläsning, inklusive extern kontrollpanel***



4 Välj tillbehör

Artikelnr	Benämning
MLV-A114A / B	Väggfäste avståndskamera SD / Väggfäste avståndskamera HD
MLV-A114C / D	Takfäste avståndskamera SD / Takfäste avståndskamera HD
MLV-A115	Monitorfot
T005	Monitorarm
MLV-A116	Hållare för extern kontrollbox



* Vid separat beställning används artikelnumret inom parentes

** Om bildskärmen ej ska monteras direkt på systemet krävs även monitorfot/monitorarm

*** TTS måste levereras från start och kan ej efterbeställas



Läs mer om MagniLink Vision på
[www.lvi.se/produkter/laskamera/
magnilink-vision](http://www.lvi.se/produkter/laskamera/magnilink-vision)



LVI Low Vision-skärmar

LVI tillverkar egna monitorer, anpassade för användare med nedsatt syn. De är antireflexbehandlade, har hög ljusnivå, snabb responstid, hög kontrast, naturlig färgåtergivning och hög upplösning. Inbyggd panel minskar också risken för oavsiktlig av/påstängning.



End User Configuration (EUC)

Ett konfigurationsprogram som individuellt kan modifiera inställningarna efter användarens preferenser när det gäller förstoring (min + max), referenslinje (färg + tjocklek), ljus och hur många färger man vill använda sig av.



Optical Center Focus

Unik funktion för optiskt centrum – när bildförhållandet i avståndskameran förändras, behålls bildens optiska centrum. Bildens centrum blir därmed aldrig beskuret.



ECO friendly

All aluminum och alla plastdetaljer är återvinningsbara och enheten uppfyller kraven för RoHS, WEEE, ErP och REACH. LVI Low Vision International är också certifierat enligt ISO 14001.

LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5,
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE

Svensk kvalitet – sedan 1978

LVI Low Vision International är en av världens ledande tillverkare av synhjälpmedel med uppdrag att göra vardagen enklare för människor med synnedsättning. MagniLink läskameror utvecklas och tillverkas i Växjö, Småland.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 & 9001.

