


Meywalk® 2000

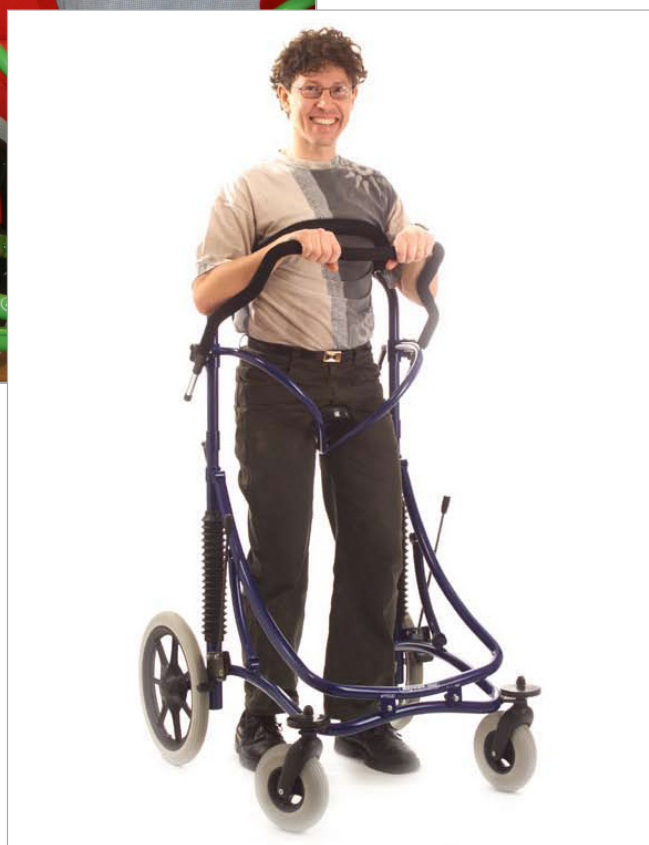

Den fjädrande gästolen

MAYDAY AID

MEYWALK® 2000 säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



MEYWALK®2000

- den fjädrande gåstolen



Meywalk®2000 har en stabil ram, stora bakhjul och lättmanövrerade svängbara framhjul. Gåstolen är trygg, säker och smidig att använda. Bålstödsringen ger användaren bra stöd för en upprätt kroppshållning.

Förutom de massiva fram- och bakhjulen finns det parkeringsbroms och avbärarhjul monterade.

Fjädrarna ger användaren en mjuk och följsam gång. Olika fjädrar väljs beroende av användarens vikt.

Meywalk®2000 har i standardutförande en bålstödsring som är upphöjd mitt fram. En rak bålstödsring kan också väljas. Bålstödsringen finns i storlek 70 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm och 130 cm.



Gåstolen kan enkelt delas, en övre sittenhets och en undre hjuldel, för att kunna transporteras i en personbil (kombi).



Den övre delen med sittenhetsen kan lyftas av.

Alla ramdelar är av pulverlackerad stål, vilket ger en stabil konstruktion och en tålig yta. Bålstödsringen, handbygeln och rumpstoppet är polstrat med skumrör som är mjuka och behagliga att hålla i. Vardagsjusteringar görs med insexnycklar som följer med, diskret placerade vid rumpstoppet.

Fakta

	Small	Medium	Large
Artikelnr	104-75	104-76	104-77
Längd	85 cm	95 cm	95 cm
Bredd	68 cm	68 cm	68 cm
Sadelhöjd*	44-62 cm	58-82 cm	70-94 cm
Bålstödshöjd*	77-96 cm	90-113 cm	102-125 cm
Bakhjul	400x40 mm	16x1,75"	16x1,75"
Framhjul	150x50 mm	200x50 mm	200x50 mm
Max belastning	100 kg	100 kg	100 kg
Vikt	22	25	26
Färg	Grön	Marinblå	Marinblå

*då sadeln belastas



MEYWALK®2000 säljs i Sverige genom:
MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01
info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

MAYDAY AID



Öppen design med praktiska funktioner



Den öppna designen hos **Meywalk®2000** och sittenhetsens höj- och sänksystem, gör det enkelt för användaren att förflytta sig i och ur gåstolen.

Fram på hävbygeln finns två metallknappar. Då dessa trycks in lösgörs hävbygeln och sittenhetsen sänks ner. Höjden motsvarar sitthöjden på en säng, brits eller rullstol.

Användaren kan tryggt och säkert flytta över till gåstolen, för att därefter få hjälp att resa sig med hjälp av hävbygeln. Belastningen för medhjälparen blir ca 1/3 av användarens vikt.

Gåstolen är främst avsedd att användas inomhus, men kan också användas utomhus på plant, hårt och torrt underlag.

Tillbehör

- Toppstöd
- Släpbromsar
- Fotskyddskenor, långa
- Fotskyddskenor korta
- Benskiljare
- Höftstöd
- Lägre sitthöjdsbeslag
- Bakåtspärr
- Riktningsspärr medium/large
- Riktningsspärr small
- Stödbygel
- Limpsadel