

Miniwalk är en gåstol för barn som finns i två storlekar.

Storlek 1, turkos

Storlek 2, röd

Standardutförande: Bålstödsring, sadel, fjädrar, handtagsbygel, parkeringsbromsar, avbärarhjul och massiva hjul.



Miniwalk storlek 2

Användningsområde

Miniwalk är en gåstol som skall användas som stöd vid gående eller stående av barn. Gåstolen kan användas både ute och inne. Gåstolen skall endast användas av ett barn åt gången och vara individuellt inställd i bålstöds- och sadelhöjd. Miniwalk får inte användas att köra någon/något på. Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Se www.maydayaid.se



Viktigt att veta

Vid utomhusanvändning får aldrig barnet lämnas ensam i gåstolen Miniwalk, en vuxen person måste alltid övervaka. Tänk på att ojämn mark kan orsaka att gåstolen välter eller rullar iväg. Barn saknar förmåga att förutse olycksrisker såväl i inomhusmiljö som utomhus. Du som målsman bär alltid yttersta ansvaret för ditt barns säkerhet!




Ta med i bil / Fäll ihop



1. Miniwalk kan delas i två delar. Lossa på låsvreden på de två vertikala rören. Tryck in låsfjädern och dra upp rören som sitheten är fästad på ur nedre chassit.

2. Önskar man bibehålla Miniwalk i en del, kan bålstödsringen med sitheten tryckas ner. Lossa på låsvreden på de vertikala rören på var sida. Tryck ner rören så långt som möjligt.

OBS! Mät innan och notera i vilken höjd bålstödsring samt sadel skall placeras i efter transporten.

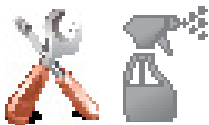

Skötsel / Underhåll

Runt hjul samlas mycket damm och hår, skruva av hjulen och ta bort smuts och damm regelbundet eller när gästolen rullar trögt.

Kontrollera alltid att hjulen sitter fast och att bålstöds-och sadelhöjd monteras på rätt höjd för användaren. Använd aldrig en skadad eller defekt produkt.

Tvätta ren gästolen med mjuk, fuktig trasa och milda rengöringsmedel t ex diskmedel. Kontrollera alltid att bromsar fungerar efter tvätt!

Förvara gästolen inomhus.

Mer information hittar du på www.maydayaid.se