

# Bra mellan- riskdyna!



Stabilt sittande ●—————

Tryckavlastning ●—————


Motverkar skjuvning ●—————


Komfortabelt sittande ●—————

Enkel att handha ●—————

## Stealth Solution

Bra mellanriskdyna

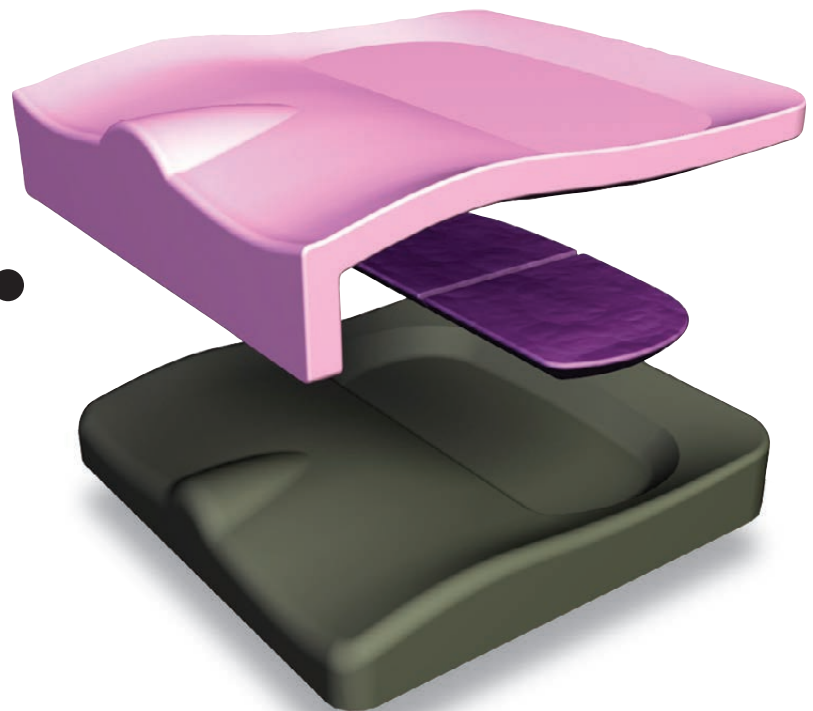

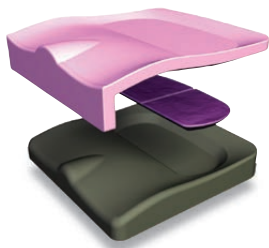

## Stealth Solutiondynans konstruktion:


- Skumbas av skum med utskuren sittgrop
- Sittgrop fylld med tvådelad tryckavlastande gel
- Överdel av tryckavlastande trögskum
- Liten bendelare fram till på dynan
- Inkontinensskyddad med inre överdrag - lätt att rengöra - lång livslängd
- Luftgenomsläppligt yttre mesh-överdrag alt. Coolcore överdrag och inkontinensskyddat inre överdrag ingår alltid i standardpaketet. Finns även separat som tillval.
- Dynan är försedd med bärhandtag
- Som tillbehör finns även följande överdrag:
  1. Coolcore: Luftgenomsläppligt, temperaturreglerande och håller brukaren torr.
  2. Mesh: luftigt med extra god friktion.
  3. Stealthtech inkontinensöverdrag: avtorkningsbart och fyrvägs-stretchigt (nyttjas innanför luftigt överdrag alt. Coolcore överdrag vid hög risk).

## Stealth Solutiondynans egenskaper:

- Enkel att handha
- Tryckavlastande dyna
- Stort urval av storlekar: 30 x 30cm - 60 x 60cm
- Tydlig märkning för placering och handhavande
- Rekommenderad brukarvikt max 160 kg
- Dyna i stolec 43 x 43 cm väger 1,9 kg
- 2 års garanti
- Lättskött

Storlekar - se vår hemsida där de kan hållas uppdaterade.

Tvättanvisning - se medföljande bruksanvisning.

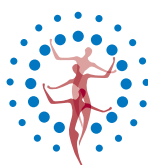

**Salubrious**  
Good Medical

Box 5021 • 448 51 Tollered • Sverige • växel: +46 (0)31-710 44 70 • fax: +46 (0)31-710 44 75  
e-post: [rehab@salubrious.se](mailto:rehab@salubrious.se) • hemsida: [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se) • webbshop: [www.goodmedical.se](http://www.goodmedical.se)