

TouchCare® System Nano Patchpump

Nu med app-
kontroll som tillval

ALLMÄNNA FUNKTIONER

- Slangfri patch, vattentät¹
- Upp till 3 dagars kontinuerlig insulintillförsel som ersätter dagliga injektioner
- Enkel handkontroll (PDM) med pekskärm för en diskret kontroll
- App-kontroll som tillval (EasyPatch)
- Bolus-kalkylatorn inbyggd i PDM- och EasyPatch-appen
- Liten, lätt patch (40,5mm x 31,5mm x 11,5mm, 13,8g)
- Kan bäras under kläder på arm, buk, nedre delen av ryggen eller låret
- Möjlighet att integrera med Medtrum CGM
- Stopp innan lågt Semi-closed loop och förberedd för Hybrid-closed loop med Medtrum Nano CGM
- Fjärruppdateringar är möjliga
- Patchbehållare rymmer MAX 200 enheter, MIN-fyllning 70 enheter

- Återanvändbar pumpbas
- 30-gauge kanyl i rostfritt stål, manuell 90-graders insättning
- Säkerhetsvarningar och larm på patchpumpen, PDM / EasyPatch-appen
- Händelser för att registrera träning, hälsa, injektioner, BG och kolhydrater
- Licensierad för användning från 2 års ålder

PROGRAMVARAMJUKVARA & APPAR (iOS och android)

- EasyPatch App - Gör det möjligt för användare att styra sin insulinpump med sin mobil, ingen handenhet (PDM) krävs. Data laddas automatiskt upp till Medtrum EasyView webbaserad programvara.
- EasyTouch App - Gör det möjligt för användare att visa och dela pump- och CGM-information. PDM laddar automatiskt upp data till EasyTouch App, som sedan kan dela och följas på distans
- EasyFollow App – för närstående att se och följa din pump / CGM-status i realtid .
- EasyView (Pro) - Webbaserad programvara för användning av både användare och vårdgivare. Synliga CGM-data och rapporter.

1 IP28 1 timme kontinuerligt till ett djup av 2,5m
2 Fråga din sjukvårdspersonal om fördelarna och lämpligheten att använda Medtrums produkter


BASALINFORMATION

- Från noll i leverans av basal upp till 30E/tim med steg 0,05E/tim
- 8st basalmönster kan förprogrammeras
- Upp till 48 olika basal segment under 24 timmar, för varje basalmönster
- Temporär basal från 0% till 200% (från 30 minuter till 24 timmar)
- 7st förinställda temporära basalmönster kan programmeras
- Manuell stopp funktion (15 minuter – 2 timmar)
- Basal-leveransen fortsätter även om den separeras från PDM/EasyPatch App (basalhastigheter lagras i pumpbasen)



BOLUSLEVERANS

- Bolus med PDM eller EasyPatch-appen
- Minsta Bolus - 0,05 enheter (0,05U/2 sek)
- Max singel Bolus - 30 enheter (Max 300g Kolhydrater)
- Normal, kombi eller förlängda Bolus-alternativ (30 min-8 timmar)
- 6 Förinställda bolusalternativ

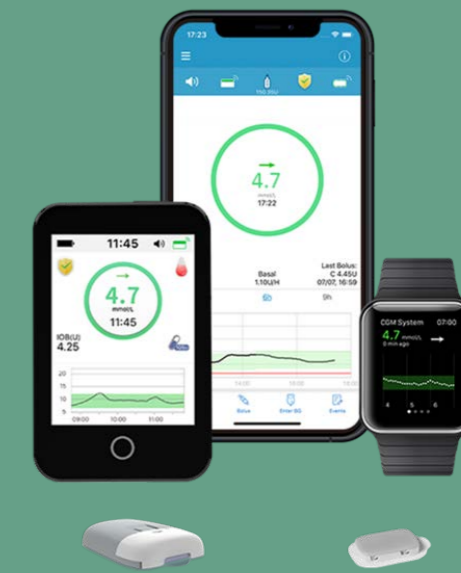

EasyPatch App (iOS & Android)

UTBILDNING OCH KUNDSUPPORT

- Tillgänglig i många regioner
- Skräddarsydd utbildning hos klinik eller online
- Instruktionsvideo online, snabbstartsguider och användarmanualer på svenska
- Svensk support dygnet runt på 010-330 03 62
- Ersättningspump inom 48 timmar



TouchCare® NANO CGM

Kontinuerlig glukosövervakning

ALLMÄNNA FUNKTIONER

- INGEN KALIBRERING krävs^{1,6}
- Upp till 14 dagars användning
- Vattentät³, liten och diskret (28,3 x 17,8 x 5,1 mm)
- Anpassningsbara varningar och larm varnar i förväg för låga eller höga värden
- Använd fristående med EasySense-appen
- Integrera med Medtrum patchpump som möjliggör stopp av insulinleverans för lågt glukos
- Dela glukos i realtid med obegränsade följare
- 7 riktningstrendpilar
- Består av 3 delar: sändare, sensor, handenhet (smartphone eller PDM⁴)
- Mätområde 2,2 -22,2 mmol/L
- 9,7% MARD⁵-noggrannhet
- Licensierad för användning från 2 års ålder

SÄNDARFUNKTIONER

- Tunn / liten sändare
- Uppladdningsbar (12 månaders garanti)
- Ladda via mini-USB
- Vid uppstart ladda 2 timmar, sedan 10-30 minuter vid byte
- 14 dagars datalagring, ingen förlust av data med automatisk återställning

SENSORFUNKTIONER

- Fabrikskalibrerad^{1,6}
- Upp till 14 dagars användning²
- 1 timmes uppvärmning
- Glukosavläsningar i realtid varannan minut (720/dag)
- Placering på arm
- Snabb och enkel insättning



EasySense App (iOS & Android)

Mjukvara & APPAR (iOS / android)

EasySense App

- Övervakar och visar kontinuerligt glukosavläsningar i realtid på din mobil eller Apple Watch.
- Anpassningsbara mål, varningar och larm, ger dig förvarning när glukos förutspås bli lågt eller högt
- 7 trendpilar
- Trendgrafer
- Dela med obegränsade följare och vårdgivare

EasyFollow App


- För närstående att se och följa din pump/CGM-status i realtid .

EasyView (Pro)

- Webbaserad programvara för användning av både användare och vårdgivare. Synliga CGM-data och rapporter.

UTBILDNING OCH KUNDSUPPORT

- Tillgänglig i många regioner
- Skräddarsydd utbildning hos klinik eller online
- Instruktionsvideo online, snabbstartsguider och användarmanualer på svenska
- Svensk support dygnet runt på 010-330 03 62
- Lån av semesterprodukter
- Ersättningspump inom 48 timmar

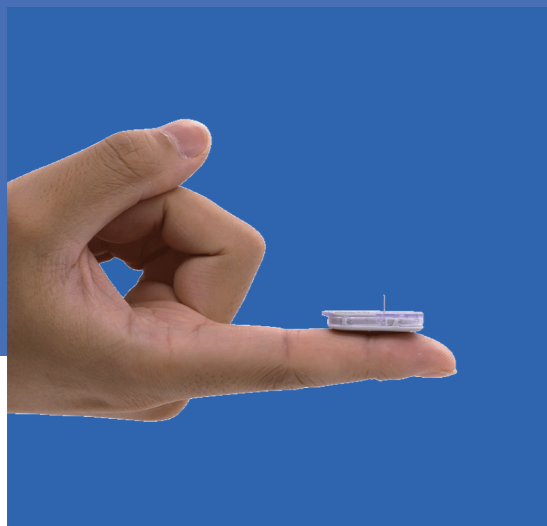

1 Bekräfta med ett fingerstick om symtom eller förväntningar inte matchar avläsningar
2 garanterat 14 dagar
3 IP28-klassad 1 timme till ett djup av 2,5 m

4 PDM extra kostnad
5 Intern studie på MARD
6 Kalibrering är möjlig om så önskas