


mySpeech med bluetooth.

TRÅDLØS STAMMEBEHANDLING.

I stedet å forsterke lyd forandrer imidlertid mySpeech lyden som går inn gjennom apparatet slik at du hører stemmen din med en liten tidsforsinkelse og med en annen tone. Formålet med forsinkelsen og toneforandringen er å gjenskape et naturlig fenomen som kalles "kor-tale". Kor-talen oppstår når stammingen din reduseres kraftig eller forsvinner helt når du snakker eller synger i harmoni med andre.

Kor-tale har vært dokumentert i flere tiår, og mySpeech benytter denne effekten i et lite, bærbar enhet som kan brukes i hverdagslivet. Helt trådløst i en liten enhet!

"Vi tilbyr tekniske løsninger for funksjonshemmede med et kommunikasjonsproblem." Aurismeds visjon.

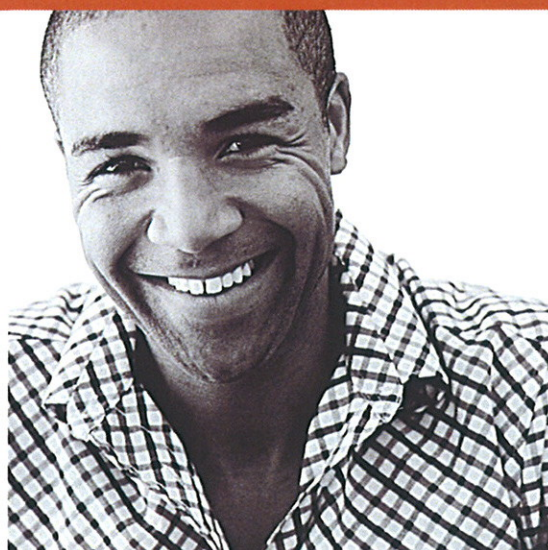

TALEFLYT NÅR DU TRENGER DET:

I presentasjoner
I telefonsamtaler
På skolen
Under intervjuer



mySpeech med bluetooth. Trådløs
stammebehandling. Tekniske data.



TEKNISKE DATA:

OSPL90 Peak Output 95-120 dB

50dB Input full on gain <35dB

Frequency range 200 -6500 Hz

Frequency auditory feedback -2000Hz - +2000Hz

Delayed auditory feedback 0-220 ms

Equivalent input noise <30dB

Harmonic Distortion(500 Hz) <10%

Harmonic Distortion(800) <10%

Harmonic Distortion(1600 Hz) <10%

Band 16

MÅL:

mySpeech enhet (lengde x bredde x tykkelse): 70,6x53,5x15(mm)

Vekt (inkludert lithium batteri): 49g

DETTE FØLGER MED:

mySpeech med bluetooth

Bruksanvisning

Bluetooth headsett

Utskiftbare fargede deksler

Trådbundet øreplugg

Lader

Hendig beskyttelseveske



VARENUMMER:

mySpeech med bluetooth 618100460



OM AURISMED

Aurismed AS ble grunnlagt i 1985. Vi tilbyr et stort spekter av hørseltekniske hjelpemidler som gjør livet til de hørselshemmede enklere og bedre. Grunnidéen bak samtlige produkter er at de skal være enkle å betjene samtidig som de utnytter den seneste teknologien.

Vi har siden 2004 levert og tilpasset SpeechEasy og mySpeech som er et teknisk hjelpemiddel som hjelper mennesker som stammer til flytende tale.