



FRIHETSKÄNSLA  
OCH UPPLEVELSE  
AV KOMFORT



VI HAR LÖSNINGAR SOM TÄCKER ALLA BEHOV

joy of life

Uppriktig glädje och komfort är bara möjligt om rullstolen uppfyller användarens behov. Tanken bakom Netti rullstolen är att ge varje användare möjlighet att leva livet fullt ut och spendera mer tid med familj och vänner – sittande i rullstolen.

**Netti**<sup>®</sup>  
BY ALU REHAB



# NETTI SEATING SOLUTION ENKELT OCH KOMFORTABELT

Brukarkomfort skapas utifrån en genomtänkt design och säkras av ett optimalt samspel mellan rullstol, dynor och tillbehör. Den genomtänkta designen skapar en synergi mellan enkla lösningar och bra avlastning och säkrar därmed en komfortabel sittställning enligt våra 7 principer för sittande.

Det är det som gör en rullstol från Netti speciell.

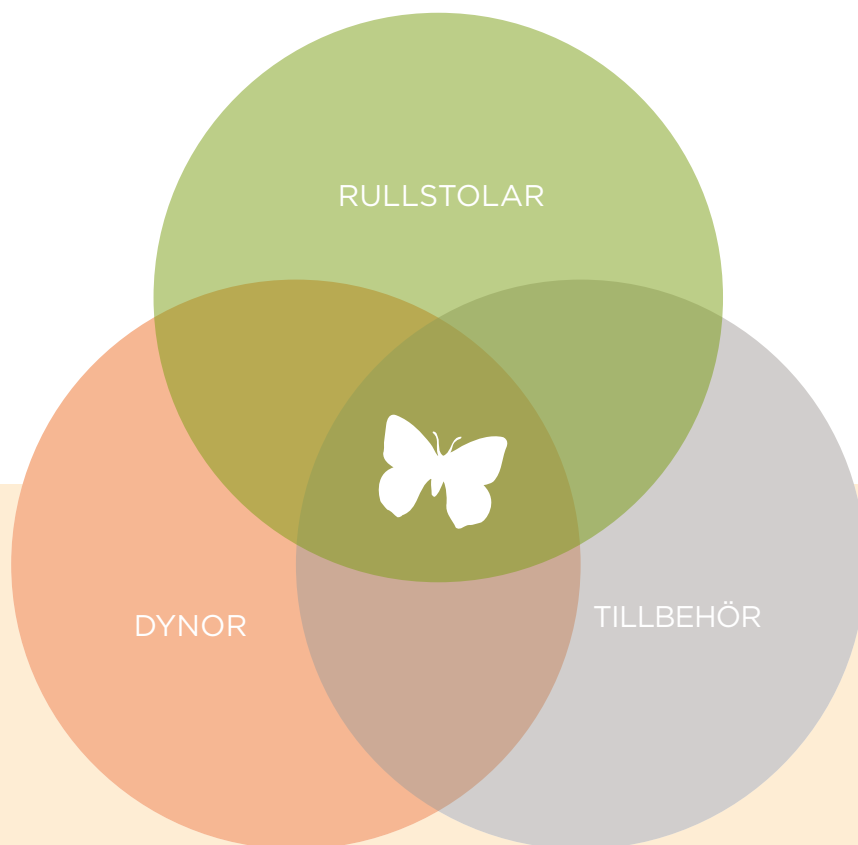


## NORSK DESIGN FÖR BÄSTA KOMFORT

Vårt urval av ergonomiska rullstolar är de mest omfattande på marknaden. En Netti rullstol skapas genom norsk teknik med en stabil ram, sitt- och ryggdynor av hög kvalitet och avancerade tyger. Denna kombination ger rullstolen en utmärkt användarvänlighet för både användare och vårdare.

Naturligtvis tillverkas alla våra produkter i enlighet med norska kvalitetsnormer och vi arbetar enligt ISO 9001 och ISO 13485. Våra produkter är CE certifierade och uppfyller alla tillämpliga europeiska standarder.





## TUSENTALS KOMBINATIONS- MÖJLIGHETER - DESIGNADE FÖR DIG

ETT STABILT BÄCKEN FÅS GENOM DEN AVANCERADE DESIGNEN HOS NETTI RULLSTOLAR I KOMBINATION MED:

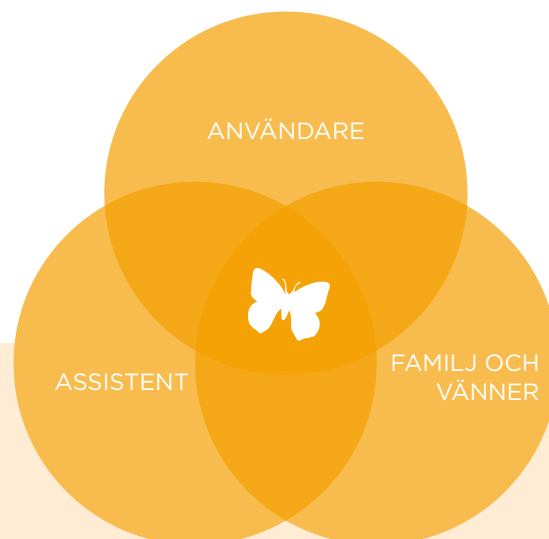
- Sittdynans utformning
- Att sittplattans design sammanfaller med dynan
- Rotationscentrum för benstöd och ryggvinkling
- Ryggdynans utformning
- Tillbehör på individnivå, exempelvis sidopolstring, abduktionskloss eller lårstöd

Det är hur vi uppmärksammar detaljerna som skapar en unik sittställning och som gör Netti till något helt speciellt.



# MER TID TILL ATT VARA TILLSAMMANS MED VÄNNER OCH FAMILJ

Netti rullstolar erbjuder många möjligheter och har ett stort urval av tillbehör. Användaren säkerställer optimal komfort samt en bra hållning och tryckfördelning. Det ger exempelvis en bättre matsituation, ger användaren möjligheten att sitta i stolen under långa tidsperioder och en förbättring av livskvaliteten vilket leder till att användaren får mer tid att spendera med vänner och familj



En rullstol från Netti kan anpassas på många sätt och kombineras med många tillbehör. Detta skapar förutsättningar för att varje stol blir individuellt anpassad utifrån användarens behov och ger därför en optimal sittkomfort över tid. Hemligheten ligger i interaktionen mellan rullstolsramens ergonomiska design, tillbehören och de unika dynorna från Netti.

Genom denna interaktion garanterar vi:

- En komfortabel och understödande sittställning över en längre period
- Förebyggande av framåtgång i stolen och därmed en sämre sittställning
- Ökad aktivitet, bättre respiration, förenklad nutrition och förenklad förflyttning i och ur stolen

## + VARIATION AV SITSTÄLLNING

Rygg, sits och benstöd är enkla att justera och användaren ges möjlighet att ofta ändra läge. Det ger en optimal tryckfördelning och trycksårsprevention samt möjlighet att sitta i stolen under en längre tid utan problem.

## + ERGONOMISK DESIGN ANPASSAD FÖR DIN KROPP

Rotationscentrum vid ryggvinkling och benstödsvinkling är anpassade efter kroppen vilket gör att användaren kan röra sig så naturligt som möjligt. Det förhindrar smärta och skada över tid.

## + NETTI SEATING SOLUTION GER STABILITET OCH KOMFORT

Nettis unika dynor erbjuder utmärkt tryckfördelning. Extra fokus läggs på mikroklimat med temperaturstabiliserande egenskaper som säkerställer en torr och frisk hud. Tillsammans med den robusta rullstolsramen tillåts användaren att sitta i stolen under en lång period.

## + TRYCKFÖRDELNING GER AVLASTNING

Dynor av hög kvalitet med omfattande tryckfördelning. Stöds av ramkonstruktionens design.

## + ANVÄNDARVÄNLIG

Gäller eventuella justeringar på stolens funktioner: Dynor, benstöd osv. Visuellt och funktionellt norsk design som är enkel att förstå för assistenter och brukare. Användaren har stor möjlighet till variation. Enkel förflyttning.

## + ANDRA FÖRDELAR

- 5 års garanti på chassit
- Egen tillverkning som garanterar hög kvalitet. Skräddarsydda individuella lösningar



## OPTIMAL SITTKOMFORT

Använd gärna de 7 universella principerna från Netti som hjälp vid bedömningen av den optimala sittkomforten. De 7 principerna är nödvändiga beståndsdelar för en bra sittposition. Om bara en enda av principerna ignoreras skapas potentiella problem för brukaren.

### DE 7 UNIVERSELLA PRINCIPERNA FÖR GOD SITTKOMFORT



1) STABILITET FÖR BÄCKENET



5) STÖD FÖR FÖTTERNA



2) TRYCKFÖRDELNING  
OCH MIKROMILJÖ



6) STÖD FÖR ARMARNA



3) LÄNDSTÖD



7) OMVÄXLING  
OCH HUVUDKONTROLL



4) SIDOSTÖD

> Läs mer på [My-Netti.se](https://www.my-netti.se)







**Netti**<sup>®</sup>  
BY ALU REHAB

# DET ÄR DEN VARDAGLIGA GLÄDJEN SOM GÖR SKILLNADEN

Den moderna Netti rullstolen garanterar stabilitet, variation, avlastning och optimal tryckfördelning. Det är anledningen till att rullstolsburna personer med en Netti rullstol kan använda stolen under en lång period med bibehållen och avslappnad sittställning. Användaren får mer energi över till andra sociala aktiviteter som främjar dess hälsa och förbättrar livskvaliteten.

# EN RULLSTOL ANPASSAD JUST FÖR DIG ÖKAR LIVSGLÄDJEN

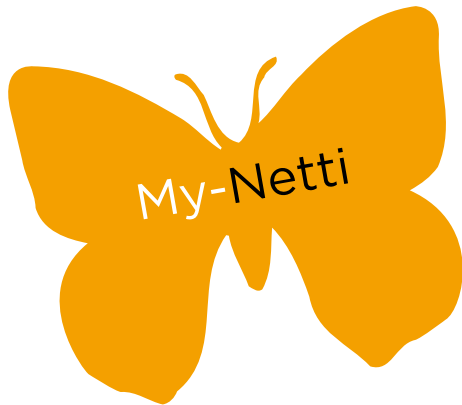
*Vad kan vi göra  
för dig?*

Med vårt sortiment har vi det bästa urvalet av komfortrullstolar på marknaden. Både rullstolar och dynor är utformade för användare som behöver sitta under långa perioder.

Som komfortrullstol specialister, är vi alltid tillgängliga. Om du behöver råd, tips eller hjälp med en utprovning, står vi till ditt förfogande



HENRIK RUNG, CHRISTINA DYLMER OCH MATHIAS OLSSON



Oavsett vilket fysiskt funktionsnedsättning som föreligger, finns det alltid en Netti rullstol som passar. Vi kallar den: My Netti!

> Läs mer på [My-Netti.se](http://My-Netti.se)



### **Netti III FAMILY** COMFORT

#### MAXIMAL ANPASSNING FÖR DEN ENSKILDE

Netti III är den rullstol som ger störst möjlighet för maximal passform och komfort. Se sidan 14.



### **Netti MOBILE FAMILY** COMFORT

#### EL-KOMFORTULLSTOL

Äntligen en elektrisk komfortullstol, som erbjuder utmärkta sittegenskaper. Se sidan 28.



### **Netti I FAMILY**

#### LÅG SITTHÖJD - FÖR ATT SPARKA SIG FRAM

En god lösning för exempelvis strokepatienter. Se sidan 24.



### **Netti 4U FAMILY** COMFORT

#### MÅNGA INSTÄLLNINGS- MÖJLIGHETER

Netti 4U finns i många utföranden. Netti 4U serien börjar med en enkel stol och fortsätter fram till den mer avancerade komfortstolen. Se sidan 32.



### **Netti MINI FAMILY** COMFORT

#### MAXIMAL KOMFORT FÖR BARN OCH SMÅ VUXNA

Hög komfort kvalitet. Perfekt för barn med minskad muskelstyrka och stabilitet. Se sidan 26.



### **Netti CUSTOMIZED** COMFORT

#### SPECIALANPASSNINGAR SOM TÄCKER DITT BEHOV

Våra tekniker arbetar ständigt med att försöka hitta rätt lösning för användarens specifika behov. Se sidan 45.



# VÄLJ RÄTT KOMFORT RULLSTOL

Det är viktigt att välja den rullstol som tillmötesgår användarens individuella behov. Med rätt rullstol, säkerställs att varje användare uppnår maximal komfort – även efter flera timmars sittande i rullstolen.

På sidan 105 och framåt visar vi några exempel på konfigurerade rullstolar för specifika användargrupper.

## DIAGNOSER OCH SJUKDOMAR

	Netti I	Netti III	Netti III EL	Netti III HD	Netti III XHD
Begränsad rörlighet / geriatrisk svaghet		+	+		
Kognitiv försämring efter hjärnskada		+	+		+
Demens		+			
Halvsidig förlamning	+	+	+	+	
Multiple Skleros	+	+	+	+	+
ALS		+	+	+	+
Chorea Huntington		+	+	+	+
Tunga användare	+		+	+	+
Cerebral pares			+	+	+
Formgjuten sittenhet		+	+	+	+
Ökad spasticitet			+	+	+
Tetraplegi		+	+	+	+
Paraplegi	+	+	+	+	
Unga användare	+	+	+	+	
Vid användning av medicinsk apparatur			+	+	+
Långa brukare (+ 195 cm)			+	+	+
Små användare (- 150 cm)	+				

 Mycket lämpligt  
 Lämpligt

Våra beställningsblad ger dig en bra översikt över alla konfigurationsalternativ - ett bra verktyg när du behöver hitta rätt stol. Du finner dem på My-Netti.se. Se under fliken "Ladda ner".



Netti Mini	Netti Mobile	Netti 4U CE	Netti 4U CE PLUS	Netti 4U CED	Netti 4U CED XL	Netti Base
	+	+	+	+	+	
+				+	+	+
		+	+	+	+	
	+		+	+	+	
	+		+	+	+	
	+			+	+	+
	+			+	+	+
	+			+	+	+
	+			+	+	+
	+			+	+	+
	+			+	+	+
	+			+	+	+
	+			+	+	+
	+			+	+	+
+	+			+	+	+
	+			+	+	+
	+			+	+	+
	+			+	+	+
	+			+	+	+
	+			+	+	+
+	+			+	+	+
	+			+	+	+
+				+	+	+

# NETTI 4U FAMILJEN OPTIMALA LÖSNINGAR FÖR DIG

## **Netti** 4U CED COMFORT

- Kardborrerygg med höjdbar ryggdyna ger optimalt stöd.
- Uppfällbara armstöd.
- Djupjusterbara armstödsplattor tillåter användaren att komma nära exempelvis ett bord.
- Körbygel som standard



## **Netti** 4U CE PLUS COMFORT

- Ryggstöd med höjdbar ryggdyna
- Sittbredden kan justeras +/- 4 cm
- Enhands sidostödssystem



## **Netti** 4U CE COMFORT

- Den ekonomiska komfortrollstolen
- Fast ryggstöd
- Hygieniskt Easy Care-överdrag på rygg- och sittdyna



## **Netti** 4U Base COMFORT

- Lämplig till formgjutna sitsar och andra kundanpassade lösningar
- Kan också utrustas med Netti sitt- och ryggdynor





Designed in Norway

- + Mycket lättkörd komfortullstol
- + Kompakt - låg vikt och smal totalbredd
- + Enkel att använda
- + Ergonomiska lösningar och snygg design



# GÖR VARDAGEN ENKLARE

## COMPACT EASY-TO-USE DESIGN

Netti 4U CED har marknadens minsta totala bredd (bara 18 cm större än sitsbredden) och en låg totalvikt. Rullstolen passar därför särskilt bra på platser där det är ont om plats och i smala dörröppningar. Den låga vikten och den hopfällbara ramen gör rullstolen lätt att transportera.

Stolen erbjuder bra ergonomiska lösningar och är användarvänlig.

### ERGONOMISK KÖRBYGEL

Körbygeln är ergonomiskt utformad så att ledsagaren enkelt kan nå användaren. Den kan också steglöst vinklas i höjd för att passa olika ledsagares kroppslängd. Körbygeln kan även enkelt vinklas nedåt vilket gör att stolen tar mindre plats i mindre utrymmen.

### NETTI DYNAMIC SYSTEM

Med Netti Dynamic System är Netti 4U CED idealisk för rullstolsburna personer med ofrivilliga rörelser.

Stolen tillmötesgår användarens egna rörelser och ger en stabil sittställning och därmed bättre tryckfördelning.

Nackstöd, rygg- och sittenhet samt benstöd och fotplatta anpassar sig istället för att hämma användaren. Läs mer om Netti Dynamic System på sidan 74.







#### ERGONOMISKA ARMSTÖD

Armstöden kan fällas upp bakom ryggydynan när de inte används. Genom att trycka på den röda knappen som sitter under armstödsplattan kan djupet justeras steglöst. Detta gör det möjligt att alltid nå det optimala läget, både när man sitter i stolen vid ett bord eller när man ska ta sig upp och ur stolen.



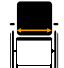

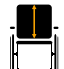
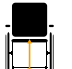





#### FLEXIBELT SITTDJUP

Med en Netti 4U CED är det enkelt att reglera sittdjupet, utan skifte av några delar. Stolen kan djupjusteras med hela 8 cm genom att ryggrören flyttas. I framkanten av stolen kan sittdjupet ökas med ytterligare 5 cm.



#### DESIGN SOM BETYDER NÅGOT

Enkel att använda för ledsagare, eftersom alla justeringspunkter är visuellt markerade med en röd färg.

 Sittbredd CEDS: 35-43 cm CED: 43-60 cm	 Sittdjup S: 37,5-50 cm 42,5-55 cm
 Rygghöjd 50 cm (60 cm)	 Sitthöjd 46,5-50 (44) cm utan dyna
 Max belastning CEDS: 130 kg CED: 160 kg	 Vikt ca. 30 kg utan dynor
 Tilt -5° - +20°	 Rygg 90°-135°
 Krocktestad ISO 7176-19 Max belastning CEDS: 130 kg CED: 136 kg	

# ETT PLUS NÄR DET GÄLLER ANVÄNDARVÄNLIGHET

## COMPACT EASY-TO-USE PLUS

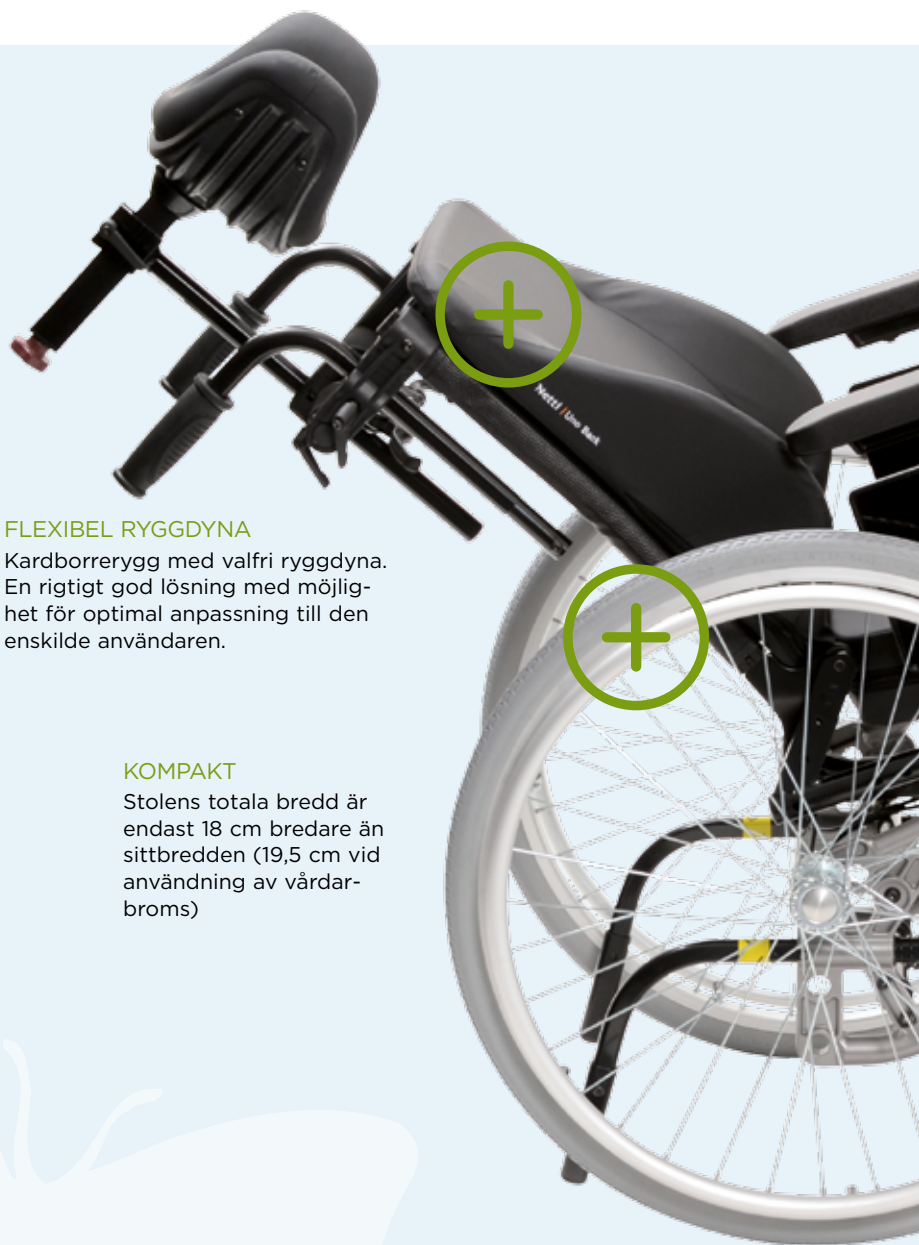
- ✓ Höjdjusterbar ryggdyna
- ✓ Kardborrerygg för bättre stöd
- ✓ Flexibel ryggdyna
- ✓ Armstöd som är enkla att montera av och på
- ✓ Justerbar sittbredd -/+ 4 cm

### FLEXIBEL RYGGDYNA

Kardborrerygg med valfri ryggdyna. En riktigt god lösning med möjlighet för optimal anpassning till den enskilde användaren.

### KOMPAKT

Stolens totala bredd är endast 18 cm bredare än sittbredden (19,5 cm vid användning av vårdarbroms)





Besök gärna My-Netti.se för hämta våra utprovningsprotokoll med alla konfigurationsmöjligheter

JACOB FRIIS-JENSEN  
KUNDSERVICE



#### “ENHANDS ARMSTÖD”

Det nyutvecklade armstödet ger förbättrad stabilitet och ökad användarvänlighet. Lätt att ta bort och placera med en hand.

- + Netti 4U CE PLUS levereras med hygienöverdraget Easy Care, som är mycket enkelt att rengöra. Stolen passar därför bra på t.ex. sjukhus och privata inrättningar där flera brukare använder samma stol.

- + Brukarbromsen kan fällas framåt för smidig i- och urstigning. Praktiskt vid användning av lyft.



#### FLEXIBEL SITTBREDD

Möjlighet finns för justering med +/- 4 cm vilket ger stor flexibilitet.

Sittbredd  
35-50 cm

Sittdjup  
S:37,5-45 cm  
42,5-50 cm

Rygghöjd  
50 cm  
(60 cm)

Sitthöjd  
46,5-50 cm  
utan dyna

Max  
belastning  
135 kg

Vikt  
27,5-29 kg  
utan dynor

Tilt  
-5° - +20°

Rygg  
92°-137°



Krocktestad  
ISO 7176-19  
Max belastning 135 kg



MY-NETTI-TV.COM

# DEN ENKLA KOMFORTRULLSTOLEN

**C**OMPACT  
**E**ASY-TO-USE

Netti 4U CE är den ekonomiska varianten av modellen CE PLUS, med samma vikt och samma bredd. Stolen har en totalvikt på endast ca. 28 kg. Netti 4U CE är enkel att skjuta framför sig och att manövrera, även där det är trångt. Tack vare logiskt uppbyggda och placerade funktioner är Netti 4U CE enkel att manövrera för brukare och ledsagare. Den här stolen passar framförallt brukare utan specialbehov.

#### RYGGDYNA MED INTEGRERAT LÄND-RYGGSTÖD

Ryggstödet är ergonomiskt utformat och de inbyggda sidostöden ger stöd för överkroppen.

#### VARIERANDE SITTPPOSITION

En rygglutning på 45° och en sit-slutning på upp till 20° möjliggör många olika sittpositioner. För enklare omändring kan sitsen lutas framåt med 5°.








Designed in Norway


- + Stolens totala bredd är endast 18 cm bredare än sittbredden - 19,5 cm med vårdarbroms.
- + Levereras med det hygieniska överdraget Easy Care som är lätt att rengöra. Stolen passar därför bra på exempelvis sjukhus och inrättningar där flera kan tänkas använda samma stol.
- + Hos Netti 4U CE kan sittedjupet enkelt ställas utan byte av delar. Varje stols djup kan justeras hela 8 cm bara genom inställning av fästet mellan stolens ryggdel och sittedel.



 Sittbredd  
40-50 cm


 Sittedjup  
42,5-50 cm


 Rygghöjd  
50 cm

 Sitt höjd  
46,5-50 cm  
utan dyna

 Max  
belastning  
125 kg

 Vikt  
ca. 28 kg  
utan dynor

 Tilt  
-5° - +20°

 Rygg  
92°-137°

 Krocktestad  
ISO 7176-19  
Max belastning 125 kg

# SPECIALSITSAR MED NETTI KOMFORT

## RYGGSTÖDETS DESIGN MÖJLIGGÖR FLERA OLIKA LÖSNINGAR

Netti 4U BASE har tagits fram för att erbjuda en optimal lösning vid användning av personligt anpassade sitsar samt formgjutna sitsar. Ryggstöden är utformade för att passa ett stort urval av personligt anpassade sitsar.

### KOMPAKT

Stolens totala bredd är endast 18 cm bredare än sittbredden - 19,5 cm med vårdarbroms.

## FORMGJUTNA SITSAR





Med Netti Dynamic System är Netti 4U Base en idealisk rullstol för användare med ofrivilliga rörelser.

Stolen anpassar sig efter användarens rörelser och ger en stabil sittställning och bättre tryckfördelning.

Huvudstöd, rygg- och sittenhet, benstöd och fotplatta anpassar sig efter användarens rörelser.

Läs mer på sidan 74 eller kontakta oss för mer information

**BIRTHE SPIERTZ**  
KUNDSERVICE



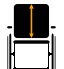








#### FLEXIBLA ARMSTÖD

När armstöden inte används kan de svängas tillbaka helt. Genom att trycka på den röda knappen vid armstödsdynan kan dynan skjutas framåt och bakåt i djupled till en idealisk position. Detta gäller oavsett om användaren sitter i stolen, vid ett bort, eller ska resa sig upp från rullstolen.

#### OMVÄXLANDE SITSTÄLLNING

Möjligheten för att ändra sits- och ryggvinkling ger variation i sittställningen, och därmed möjligheten till ro och nödvändig vila samt optimal tryckfördelning över tid.

 Sittbredd 35-50 cm	 Sittdjup 42,5-55 cm
 Rygghöjd 50 cm (60 cm)	 Sitthöjd 46,5-50 cm utan dyna
 Max belastning 125 kg	 Vikt 28-29,5 kg utan dynor
 Tilt -8° - +22°	 Rygg 92°-137°
 Krocktestad ISO 7176-19 Max belastning 125 kg	



TUSENTALS AV  
KOMBINATIONER  
UTFORMADE FÖR  
ATT PASSA DIG

KONTAKTINFORMATION:



Alu Rehab ApS  
Hägervägen 6  
291 43 Kristianstad

T: 08 6500037  
F: 08 6500047  
info@My-Netti.com

Alu Rehab ApS  
Kløftehøj 8  
DK-8680 Ry

T: +45 87 88 73 00  
F: +45 87 88 73 19  
info@My-Netti.com

My-Netti.se