

JAY BALANCE

Optimerad för tryckavlastning, stabilitet och komfort



Den perfekta balansen mellan tryckavlastning och stabilitet

Hitta din Balance

Jay Balance dynan är designad efter många års erfarenhet och användning av JAY för att ge högsta tryckavlastning och maximal stabilitet och komfort.

Egenskaper som det tjocka, mjuka skumlagret förhindrar att tryck uppstår på sittbensknölar och trokanter, formen på sittgropen med en stängd bakkant för att förhindra att fluiden flyttar sig, designen på fluidinlägget och systemet med dubbla överdrag ger hög tryckavlastning och komfort.

Maximal stabilitet och positionering uppnås tack vare sittgropens design som är baserad på antropometriska mätningar samt att positioneringsdelar kan placeras i det inre överdraget för att möta specifika positioneringsbehov hos brukarna.





JAY Flow Fluid™ eller ROHO Dry Floatation™ luftinlägg

Inlägget är en central del av dynan eftersom det omsluter de spetsiga delarna av bäckenet och maximierar tryckavlastningen för att förebygga trycksår.

Balance dynan kan beställas med JAY fluid eller ROHO luftinlägg, vilka anpassar sig efter varje individs forms, anpassar sig efter olika sitspositioner och försäkrar att tillräcklig mängd fluid/luft finns under sittbensknölnarna och skyddar huden så att man minskar risken för trycksår.



Fluidinlägget kräver inget underhåll och ger utmärkt resultat under dynans livslängd.



ROHO's luftmängd kan justeras hos brukaren för att anpassa positionering och vid förändrat behov över tiden.




Positioneringsdelar

Med tillbehör så som positioneringsdelar kan lår och bäcken positioneras efter olika kliniska behov. Därför kan Balance möta olika behov av positionering hos olika brukare eller förändrat behov över tid.



Skumbas i flera lager och med kontur

Balance dynan består av en skumbas med kontur, konstruerad av skum med slutna celler. Övergången från lår till sittgrop samt den bakre kanten i sittgropen ser till att fluiden inte kan flytta sig och samtidigt ger basen stöd till trokanter och bäcken.

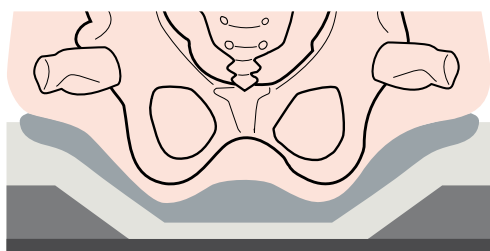

Måttet på sittgropen på Balance är fastställt genom att använda medelvärdet på bäckenmått hos olika brukare. Detta möter behoven hos en majoritet av individerna och ger främre- och sidostabilitet för korrekt positionering, optimal nedsjunkning och viktfordelning vilket minskar risk för trycksår.

Nytt system med dubbla överdrag

- För bekvämlighet och skydd så har Balance ett system med dubbla överdrag. Systemet med ett inre och ett yttre överdrag möter kraven på bra luftgenomsläpp och effektiv hantering av inkontinens.
- Det inre överdraget är vattenresistent och enkelt att torka av och göra rent, alltmedan dess Aqua-guard dragkedja och anti-wicking thread garanterar att skumbasen förblir torr.
- Det luftgenomsläppliga yttre överdraget leder bort fukt och värme och minskar risken för trycksår. Som tillval kan man även välja ett stretch överdrag eller inkontinensöverdrag till Balance. Alla överdrag kan tvättas i maskin på 60° C och torkar snabbt.
- Stretchdelen på alla nya yttre överdrag gör att man kan använda positioneringsdelar utan att riskera att skapa ett för spänt överdrag på ovansidan, vilket också minskar risken för trycksår. Det finns tre olika överdrag att välja på: Luftgenomsläppligt, Inkontinens och Stretch.



JAY BALANCE

Bredd	34 cm - 60 cm
Djup	34 cm - 60 cm
Dynans höjd	8,5 cm
Max brukarvikt	150 kg (34 cm – 50 cm bredd); 225 kg (56 cm – 60 cm bredd)
Dynans vikt	2,4 kg (40 x 46 med fluid inlägg); 1,9 kg (40 x 46 med luftinlägg)
Inlägg	Fluid, Luftinlägg med en eller två kammare
Yttre överdrag	Inkontinensöverdrag, luftgenomsläppligt överdrag, stretch överdrag
Positioneringskit	Tillval