



JAY LITE

FEEL THE LITE



MYCKET LÄTT...

Det perfekta komplementet till en lättviktsrullstol, JAY LITE är en av de lättaste dynorna i sin klass.

Dynan är en bra tryckfördelande och stabil dyna och med en vikt på från 660 gram, är JAY LITE den ideala dynan för aktiva brukare.



... OCH BRA PÅ ATT AVLEDA VÄRME

Ett aktivt liv alstrar värme och behov av att förbli sval. Det är därför som JAY LITE består av material som andas för att skapa luftgenomströmning när brukaren sitter i sin rullstol. Exempelvis så ger det luftgenomsläppliga överdraget i 3DX™ material och den ventilerade Olotex basen, utmärkt värme- och fuktavledning.





POSITIONERAD FÖR ACTION

JAY LITE dynan är en tryckfördelande dyna, med bra stabilitet och komfort. Den antropometriskt designade sittgropen baserad på Optiwell teknologi, reducerar effektivt trycket på sittbensknölnarna utan att överbelasta trokanterna. Det lätta, ventilerade skuminlägget hjälper till att fördela trycket med minsta möjliga viktillägg. Det löstagbara inlägget kan tvättas i maskin och kan bytas ut vid behov eller vid exempelvis rekonditionering. Den stabila skumbasen med viss kontur ger det stöd du behöver för att förbli aktiv!

Urtag för sacrum

Skyddar området runt sacrum


Utskuret för sittbensknölnarna

reducerar mottryck som skapas när skummet pressas ihop



Ventilerat skuminlägg

luftgenomsläppligt, tvättbart och utbytbart

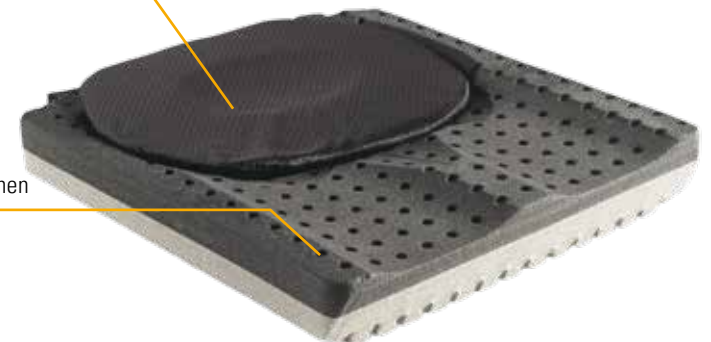

Skumbas med kontur

ökad stabilitet och stöd för benen



// 1 DYNA MED VALMÖJLIGHET MELLAN 2 BASER MED OLIKA KONTUR.

JAY LITE dynans bas finns i 2 olika versioner. Standardbasen passar till de flesta brukare som är i behov av komfort och tryckavlastning. Dess låga kontur gör att förflyttningar i och ur rullstolen blir enklare. Alternativt, för de som behöver mer postural stabilitet, så ger JAY LITE P versionen lateral och medial lårsupport vilket ger ökad stabilitet för brukaren.

→ JAY LITE –
standard kontur
Ger måttligt stöd för
benen och möjliggör
enkel förflyttning.



→ JAY LITE P –
positionerande
kontur
Mer positionering av
benen genom lateralt
och mediant lårstöd ger
ökad stabilitet för
brukaren.



EN FUNKTIONELLT GENOMTÄNKT DESIGN.

JAY LITE's design återspeglar behov och livsstil för aktiva brukare. Den avfasade framkanten förhindrar skav mot baksidan av benen, eliminerar behovet av att använda en kortare dyna. De avfasade kanterna på dynans undersida minskar belastningen på trokanterna (och minskar den totala sitthöjden). Handtaget framtill på dynan gör det enkelt att greppa och urtagen för ryggrören ser till att dynan ligger stadigt på plats i rullstolen.



Grå gummiundersida
luftgenomsläpplig och "halkskyddad"




Avfasade kanter
för att minska belastningen på trokanterna



Avfasad framkant
förhindrar skav på
baksidan av benen

Handtag
enkelt att greppa dynan

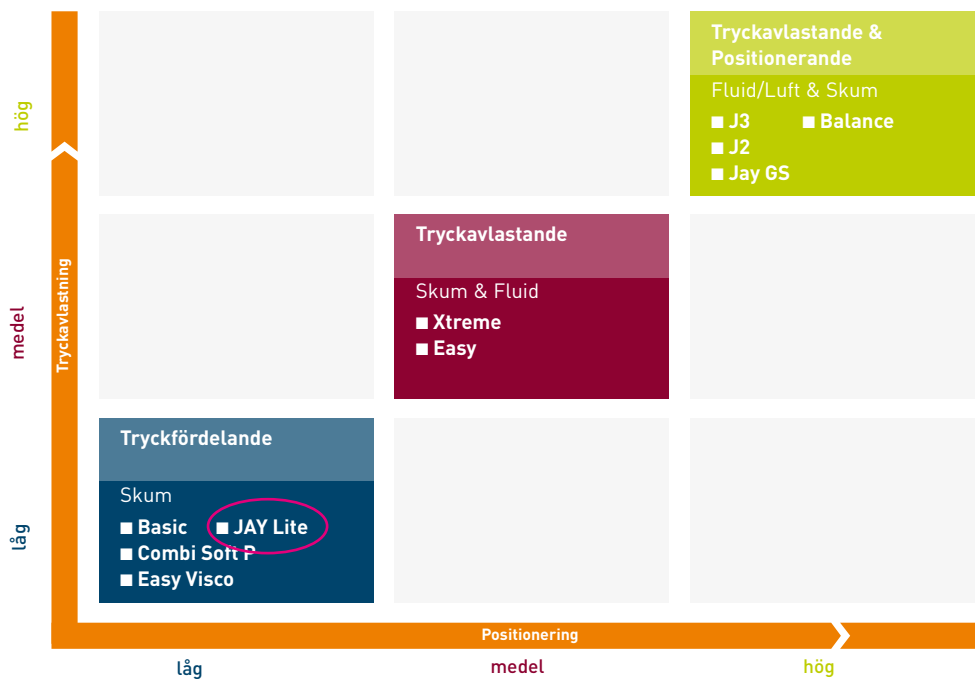


Artikelnummer Jay Lite

Jay Lite finns i storlekar från 35x35 cm till 50x50 cm
 Artikelnummer är uppbyggt enligt följande;
 JL**sb**sd - Jay Lite med standardkontur
 JL**sb**sdP - Jay Lite med positionerande kontur

sb = sittbredd

sd = sittdjup

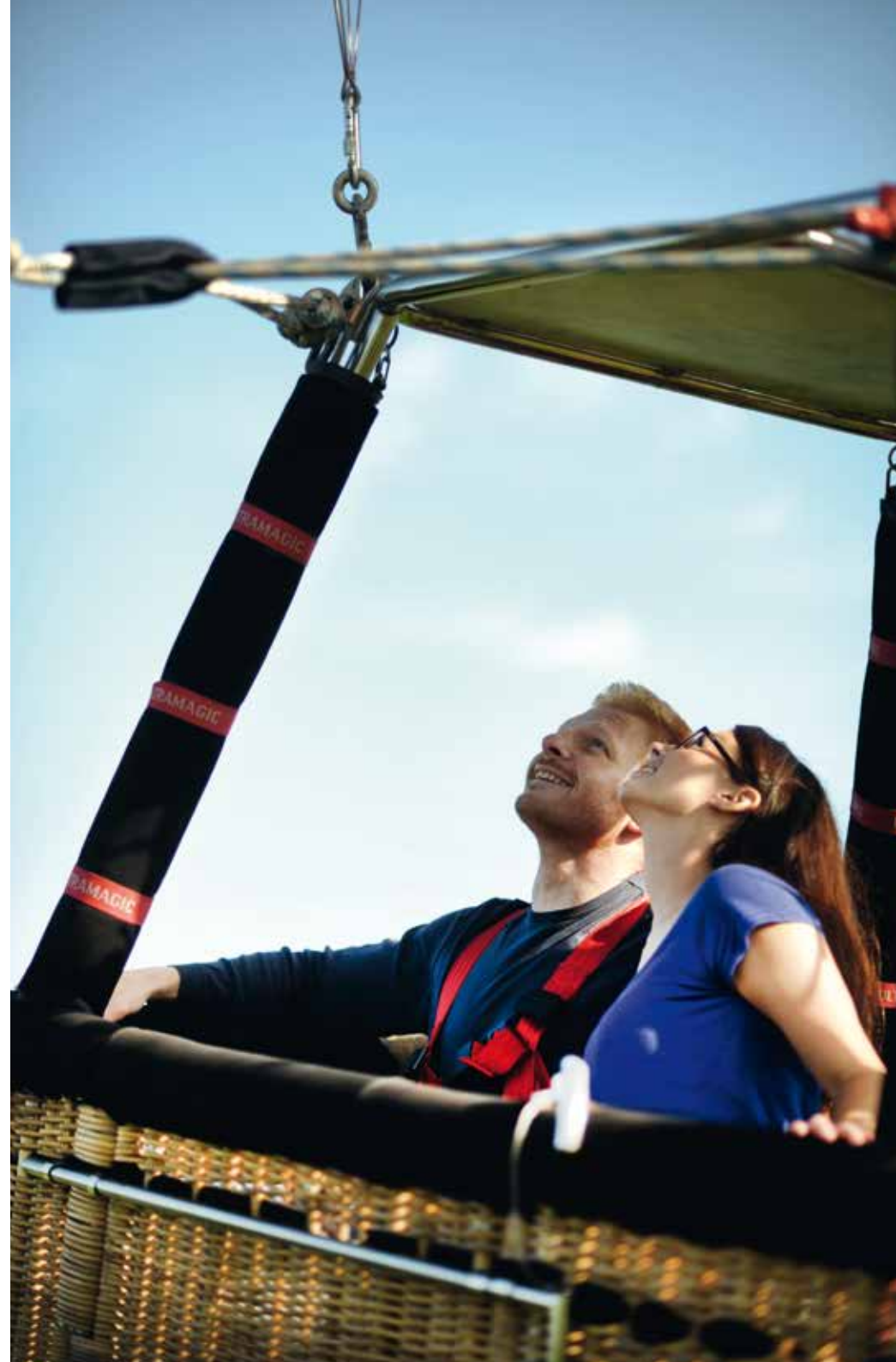

TEKNISK SPECIFIKATION

Dynans bredd:	35 cm – 50 cm
Dynans djup:	35 cm – 50 cm
Dynans höjd:	8 cm
Max brukarvikt:	150 kg
Dynans vikt:	660 g - 1090 g
Inlägg:	Ventilerat skuminlägg med luftgenomsläppligt överdrag
Överdrag:	Luftgenomsläppligt överdrag
Skumbas:	Standarddyna eller Positionerande - bas med kontur för bättre positionering



All information kan komma att ändras utan förvarning. Vänligen kontakta Sunrise Medical vid eventuella frågor. Om du har synnedsättning finns detta dokument i PDF format på www.SunriseMedical.se.



Sunrise Medical AB

Box 9232
400 95 Göteborg
Tel.: +46 (0) 31 748 37 00
Fax: +46 (0) 31 748 37 37
E-Mail: post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se