


Avtagbart bord LEVO LCEV

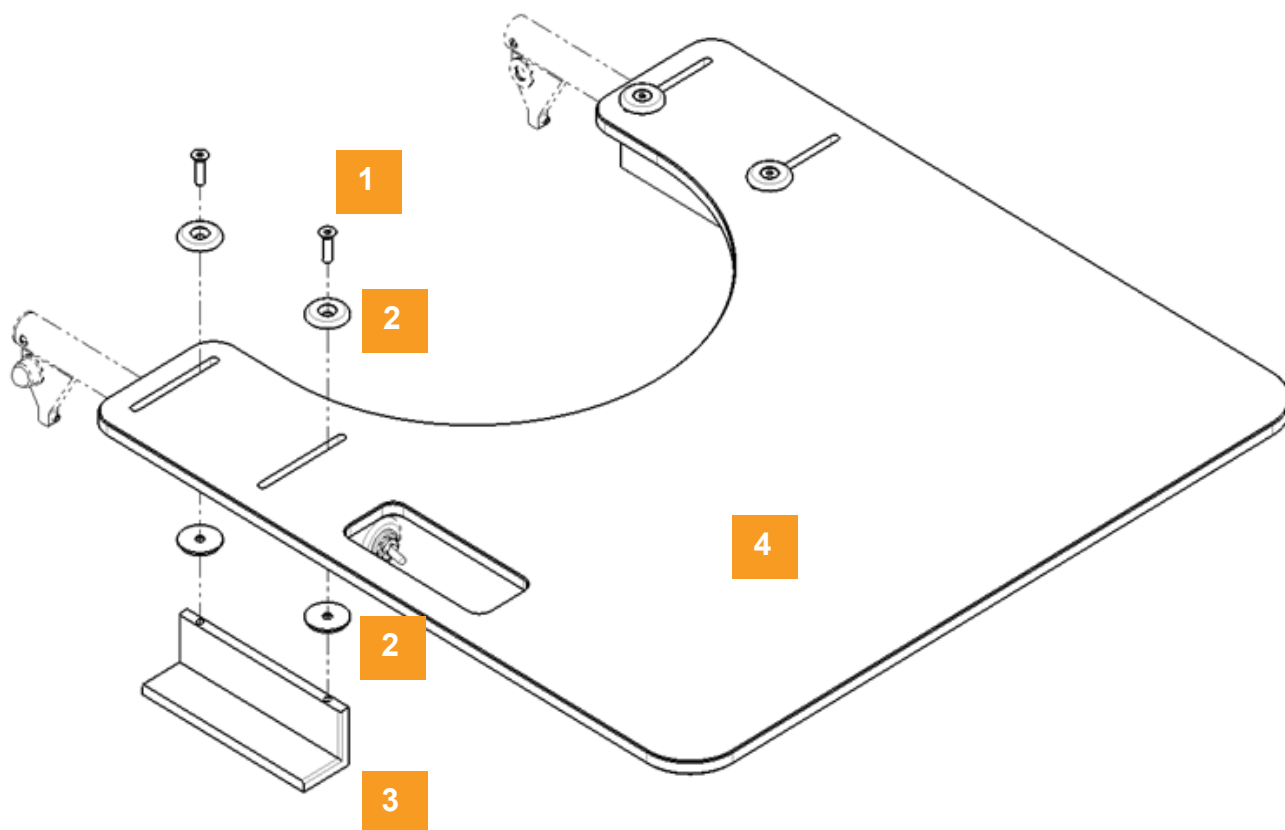

Fäst skruvarna (1) med brickorna (2) i fästet (3) genom bordet (4). Justera brädden på fästena så de passar mellan armstödsstoden på stolen. Skjut in bordet till den position som passar brukaren.

Styck	Beskrivning	Art. nr.	SB	A: Art. nr
2	Fäste (3) avtagbart bord	30.101.4920	35	30.103.1221
8	Bricka (2) Ø30 x 3.5 mm	30.100.4430	38	30.103.1222
4	Insexskruv (1) M6 x 22	10.006.0615	40	30.103.1223
1	Bordsskiva (4)	A	42	30.103.1224
			45	30.103.1225
			48	30.103.1226