



# JAY LITE

## FEEL THE LITE



# MYCKET LÄTT...

---

Det perfekta komplementet till en lättviktsrullstol, JAY LITE är en av de lättaste dynorna i sin klass.

Dynan är en bra tryckfördelande och stabil dyna och med en vikt på från 660 gram, är JAY LITE den ideala dynan för aktiva brukare.





# ... OCH BRA PÅ ATT AVLEDA VÄRME

---

Ett aktivt liv alstrar värme och behov av att förbli sval. Det är därför JAY LITE består av material som andas för att skapa luftgenomströmning när brukaren sitter i sin rullstol. Exempelvis så ger det luftgenomsläppliga överdraget i 3DX™ material och den ventilerade Olotex basen, utmärkt värme- och fuktavledning.





# POSITIONERAD FÖR ACTION

JAY LITE dynan är en tryckfördelande dyna, med bra stabilitet och komfort. Den antropometriskt designade sittgropen baserad på Optiwell teknologi, reducerar effektivt trycket på sittbensknölna utan att överbelasta trokanterna. Det lätta, ventilerade skuminlägget hjälper till att fördela trycket med minsta möjliga viktillägg. Det löstagbara inlägget kan tvättas i maskin och kan bytas ut vid behov eller vid exempelvis rekonditionering. Den stabila skumbasen med viss kontur ger det stöd du behöver för att förbli aktiv!

## Urtag för sacrum

Skyddar området runt sacrum


## Utskuret för sittbensknölna

Reducerar mottryck som skapas när skummet pressas ihop



## Ventilerat skuminlägg

Luftgenomsläppligt, tvättbart och utbytbart

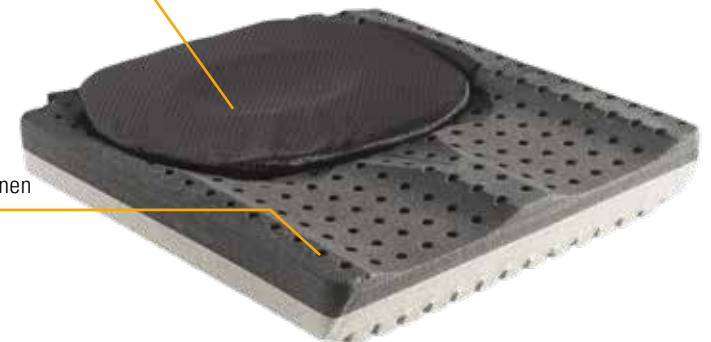

## Skumbas med kontur

Ökad stabilitet och stöd för benen





**// 1 DYNA MED VALMÖJLIGHET MELLAN  
2 BASER MED OLIKA KONTUR.**

JAY LITE dynans bas finns i 2 olika versioner. Standardbasen passar till de flesta brukare som är i behov av komfort och tryckavlastning. Dess låga kontur gör att förflyttningar i och ur rullstolen blir enklare. Alternativt, för de som behöver mer postural stabilitet, så ger JAY LITE P versionen lateral och medial lårsupport vilket ger ökad stabilitet för brukaren.

→ **JAY LITE –  
standard kontur**  
Ger måttligt stöd för  
benen och möjliggör  
enkel förflyttning.



→ **JAY LITE P –  
positionerande  
kontur**  
Mer positionering av  
benen genom lateralt  
och mediant lårstöd ger  
ökad stabilitet för  
brukaren.



# EN FUNKTIONELLT GENOMTÄNKT DESIGN.

JAY LITE's design återspeglar behov och livsstil för aktiva brukare. Den avfasade framkanten förhindrar skav mot baksidan av benen, eliminerar behovet av att använda en kortare dyna. De avfasade kanterna på dynans undersida minskar belastningen på trokanterna (och minskar den totala sitthöjden). Handtaget framtill på dynan gör det enkelt att greppa och urtagen för ryggrören ser till att dynan ligger stadigt på plats i rullstolen.



## Grå gummiundersida

Luftgenomsläpplig och "halkskyddad"



## Avfasade kanter

För att minska belastningen på trokanterna




## Avfasad framkant

Förhindrar skav på baksidan av benen

## Handtag

Enkelt att greppa dynan



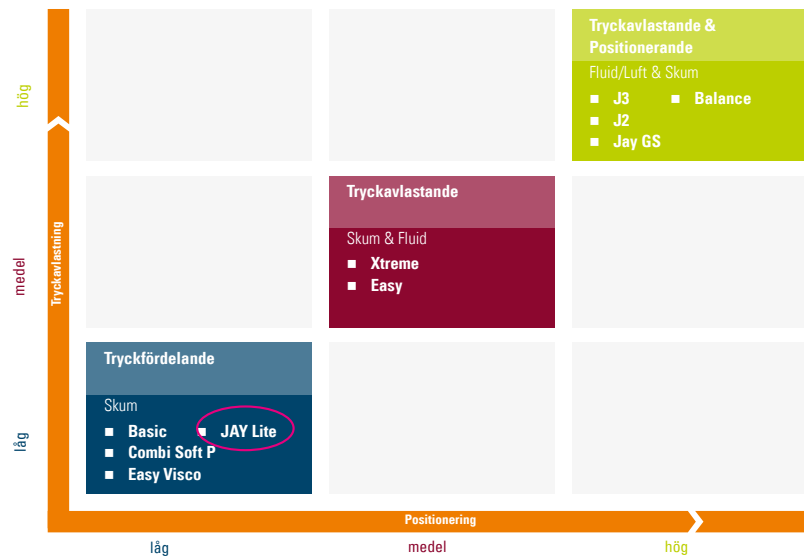

Djup mm	Bredd									
	350	380	400	420	440	460	480	500	560	600
350	■									
380		■								
400	■	■								
420		■	■							
440		■	■	■						
460	■	■	■	■	■					
500			■			■	■			
560									■	
600										■

### Artikelnummer Jay Lite

Jay Lite finns i storlekar från 350x350 mm till 600x600 mm.


Artikelnummer är uppbyggt enligt följande;

JL**sb**sd - Jay Lite med standardkontur

JL**sb**sdP - Jay Lite med positionerande kontur

**sb** = sittbredd

**sd** = sittdjup

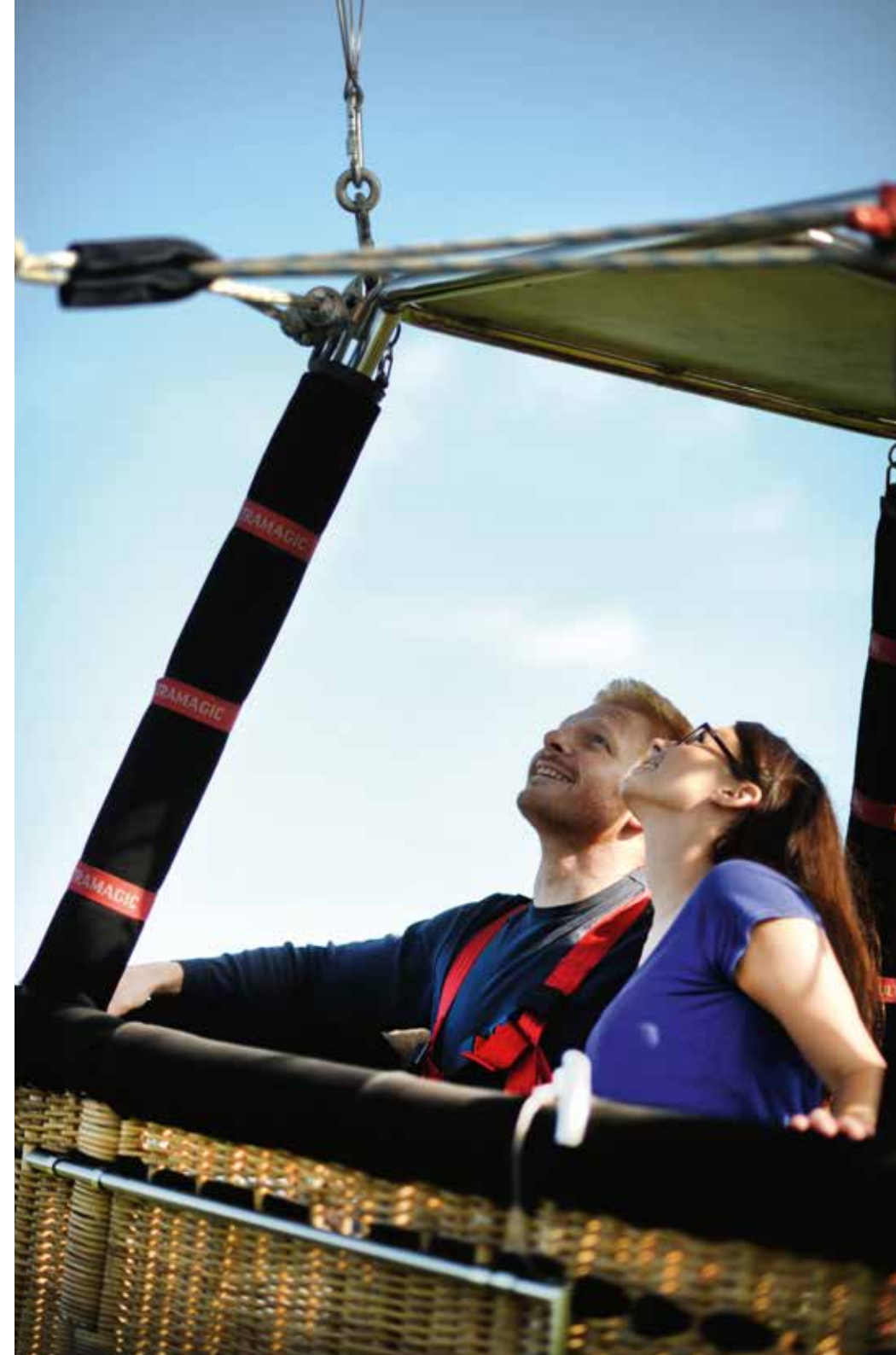

# TEKNISK SPECIFIKATION

Dynans bredd:	350 mm - 600 mm
Dynans djup:	350 mm - 600 mm
Dynans höjd:	8 cm
Max brukarvikt:	150 kg
Dynans vikt:	660 g - 1090 g
Inlägg:	Ventilerat skuminlägg med luftgenomsläppligt överdrag
Överdrag:	Luftgenomsläppligt överdrag
Skumbas:	Standarddyna eller Positionerande - bas med kontur för bättre positionering



All information kan komma att ändras utan förvarning. Vänligen kontakta Sunrise Medical vid eventuella frågor. Om du har synnedsättning finns detta dokument i PDF format på [www.SunriseMedical.se](http://www.SunriseMedical.se).



## Sunrise Medical AB

Neogatan 5  
431 53 Göteborg  
Tel.: +46 (0) 31 748 37 00  
Fax: +46 (0) 31 748 37 37  
E-Mail: [post@sunrisemedical.se](mailto:post@sunrisemedical.se)  
[www.SunriseMedical.se](http://www.SunriseMedical.se)