

JAY BALANCE



Optimerad för tryckavlastning,
stabilitet och komfort.



1. Cryo Fluidinlägg
2. Fluidinlägg
3. Luftinlägg

JAY BALANCE

Efter många års erfarenhet är sittyndan Jay Balance designad för att ge högsta tryckavlastning och maximal stabilitet och komfort.

Egenskaper som det tjocka, mjuka skumlagret förhindrar att tryck uppstår på sittbensknölar och trokanter, formen på sittgropen med en stängd bakkant för att förhindra att fluiden flyttar sig. Den revolutionerande Cryo Fluiden och systemet med dubbla överdrag ger hög tryckavlastning och komfort.

Maximal stabilitet och positionering uppnås tack vare sittgropens design som är baserad på antropometriska mätningar samt att positioneringsdelar kan placeras i det inre överdraget för att möta specifika positioneringsbehov hos brukaren.

Den perfekta balansen mellan tryckavlastning och stabilitet

Nu med

CRYO FLUID



Tre olika inlägg

Inlägget är en central del av dynan eftersom det omsluter de spetsiga delarna av bäckenet och maximierar tryckavlastningen för att förebygga trycksår.

Balance kan beställas med Cryo[®] Fluid, JAY fluid eller luftinlägg vilka anpassar sig efter varje individs form och olika sittpositioner. De är designade så att tillräcklig mängd fluid/luft finns under sittbensknölna samt skyddar huden så att man därmed minskar risken för trycksår.

CRYO FLUID



Cryo Fluid är ett patenterat revolutionerande material som aktivt kyler brukarens hudytta i upp till 8 timmar samtidigt som det fördelar tryck, minskar skjuvning och sänker risken för fukt. För mer information, se separat broschyr.




Det andra fluidinlägget kräver inget underhåll och ger utmärkt resultat gällande tryckavlastning under hela dynans livslängd.



Luftinläggets luftmängd kan justeras för att anpassa positionering och vid förändrat behov över tiden. Luftinlägget kan fås med en gemensam luftkammare eller med två separata luftkammare.

Sittbas

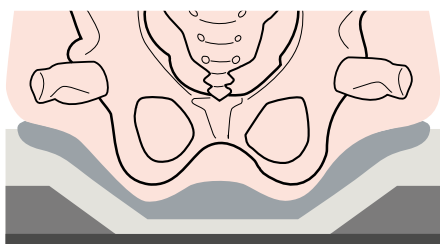

Sittgrop

Måttet på sittgropen på Balance är fastställt genom att använda medelvärden på bäckenmått hos olika brukare. Detta möter behoven hos en majoritet av individerna och ger främre stabilitet och sidostabilitet för korrekt positionering, optimal nedsjunkning och viktfordelning vilket minskar risk för trycksår.



Skumbas i flera lager och med kontur

Balance dynan består av en skumbas med kontur, konstruerad av skum med slutna celler. Övergången från lår till sittgropen samt den bakre kanten i sittgropen ser till att fluiden inte kan flytta sig och samtidigt ger basen stöd till trokanter och bäcken.



Positioneringsdelar

Med tillbehör som positioneringsdelar kan lår och bäcken positioneras efter olika kliniska behov. Därför kan Balance möta olika behov av positionering hos olika brukare eller förändrat behov över tid.



System med dubbla överdrag

- För din bekvämlighet och skydd så har Balance ett system med dubbla överdrag. Systemet med ett inre och ett yttre överdrag möter kraven på bra luftgenomsläpp och effektiv hantering av inkontinens.
- Det inre överdraget är vattenresistent och enkelt att torka av och göra rent, samtidigt som den vattentäta dragkedjan (Aqua-guard) med en tråd som inte suger åt sig vätska minskar risken för att skumbasen blir våt.
- Det luftgenomsläppliga yttre överdraget leder bort fukt och värme och minskar risken för trycksår. Som tillval kan man även välja ett inkontinensöverdrag till Balance. Överdragen kan maskintvättas i 60°C och torkar snabbt.
- Stretchdelen på de yttre överdragen gör att man kan använda positioneringsdelar utan att riskera att skapa ett för spänt överdrag på ovansidan, vilket också minskar risken för trycksår.

FAKTA JAY BALANCE

Bredd:	340 - 600 mm, med Cryo Fluid från 400 mm
Djup:	340 - 600 mm, med Cryo Fluid från 380 mm
Dynans höjd:	85 mm
Max brukarvikt:	150 kg (340 mm – 500 mm bredd), 225 kg (560 mm – 600 mm bredd)
Dynans vikt:	2,4 kg (400 x 460 mm med fluidinlägg), 3 kg (400 x 460 mm med Cryo Fluid), 1,9 kg (400 x 460 mm med luftinlägg)
Inlägg:	Cryo [®] Fluid, Fluidinlägg, luftinlägg med en eller två kammare
Yttre överdrag:	Inkontinensöverdrag, luftgenomsläppligt överdrag
Positioneringskit:	Tillval

JAY BALANCE

Uppbyggnad, alternativ och artikelnummer

Hur du beroende på dina val bygger ett artikelnummer för dynan JAY Balance.

Artikelnumrets uppbyggnad:

Dynans benämning	Sittbredd	Sittdjup	Inlägg	Överdrag	Positionering	Måttstandard
JBALC	40	42	FLC	M	P	EU
JAY Balance Cushion	Val 1	Val 2	Val 3	Val 4	Val 5	EU-standard

Valen ovan ger artikelnummer: JBALC4042FLCMPEU.

Då får man en **JAY Balance** i sittbredd 40, sittdjup 42, **Fluid Cryo**-inlägg, **Microclimatic** (luftgenomsläppligt) överdrag med **Positioneringsdelar**. **EU** för EU-standard.

Förkortningarna har en koppling till de engelska benämningarna, se nedan för förklarande tabell.

Förkortningar och val:

	Förkortningar	Betydelse Engelska	Betydelse Svenska
Benämning	JBALC	JAY Balance Cushion	JAY Balance dyna
Val 1	Vald sittbredd		Sittbredd (för storleksöversikt, se tabell nedan)
Val 2	Valt sittdjup		Sittdjup (för storleksöversikt, se tabell nedan)
Val 3 ¹	FL/AD/AS/FLC	Fluid/Air Double/Air Single/Fluid Cryo	Fluidinlägg/Luftinlägg dubbel kammare/ Luftinlägg enkel kammare/Cryo fluidinlägg
Val 4 ¹	M/I	Microclimatic/Incontinence cover	Luftgenomsläppligt- /Inkontinensöverdrag
Val 5 ²	P	Positioning elements (if applicable)	Positioneringsdelar (vid behov)
Standard	EU	European metrics	Europeiska mätvärden (metrisk systemet)

¹ Välj ett av de fyra inläggen samt ett av de två överdragen.

² Ange P om du önskar en dyna med positioneringsdelar annars utelämnar du val 5.

Storleksöversikt

Storlekar märkta med C finns med Cryo Fluid

Djup mm	Bredd										
	340	360	380	400	420	440	460	480	500	560	600
340											
360											
380				C	C	C					
400				C	C	C					
420				C	C	C	C	C	C		
440				C	C	C	C	C	C		
460				C	C	C	C	C	C	C	C
480					C	C	C	C	C	C	C
500						C	C	C	C	C	C
560										C	C
600										C	C

