

Alber | **viamobil**[®]



Vårdarstyrt drivaggregat för rullstolar

Alber viamobil är inte bara ett hjälpmedel för påskjutning av rullstolar, utan även en effektiv enhet för bromsning av rullstolen i nedförsbackar. Backar med en lutning på upp till 18 % klaras av på ett säkert sätt utan fysisk kraft från vårdaren. Den kraftfulla motorn på **viamobil** är stark nog att klara en brukarvikt på upp till 160 kg. Intelligent teknik som moderna Lithium-Ion batteri och det innovativa EasyConnex Magnetic Plug System gör **viamobil** till ett drivaggregat i en helt egen klass. **viamobil** passar till nästan alla rullstolar och är inte bara enkel att använda, utan även säker, tack vare den patenterade säkerhetsbrytaren som underlättar för vårdaren om något skulle inträffa.





Dynamisk drift

Den kraftfulla och starka motorn gör **Alber viamobil** till en tillförlitlig partner på varje färd. Det integrerade fjädringssystemet ger drivhjulet perfekt grepp. Däcken är punkteringsfria, någonting som gör varje tur till en njutbar och problemfri upplevelse. Med en knapptryckning sänks drivhjulet och kopplas in automatiskt, och vice versa om rullstolen ska köras manuellt. Det är mycket enkelt att styra **viamobil**. Drivhjulet sitter i linje med rullstolshjulen, vilket gör det möjligt att kontrollera och manövrera **viamobil** utan ansträngning.

Lätt att använda, maximal säkerhet

Det innovativa EasyConnex Magnetic Plug System kopplar automatiskt samman styrenheten och laddaren med batteriet. Håll helt enkelt den magnetiska kontakten nära uttaget och - klick - så är den ansluten och låst. Den stora och tydliga skärmen ger vårdaren exakt information om kvarvarande batterikapacitet. Den unika och patenterade säkerhetsbrytaren i styrenheten gör att viamobil kan stanna direkt i kritiska situationer, vilket ger maximal säkerhet för både vårdare och brukare.

Portabel och mångsidig

viamobil kan enkelt demonteras till små, smidiga komponenter för transport. Tack vare lithium-lon teknik har det kraftfulla batteriet en vikt på endast 2,3 kg och är därmed mycket enkelt att hantera. Det ansluts automatiskt till drivenheten med hjälp av magnetisk kraft. **viamobil**

kan monteras på nästan alla manuella rullstolar. Tack vare sin kompakta storlek påverkas inte komfortullstolens sinställningar såsom rygg och tilt negativt. Endast små fästen behöver monteras på stolen för att fästa viamobil.

Egenskaper och tillbehör



viamobil redo för transport

De kompakta och lätta komponenterna är enkla att transportera.



Styrenhet

Med patenterad säkerhetsbrytare, hastighetsjustering, strömbrytare, LCD-skärm, riktningväljare



Uthålligt Litium-lon batteri

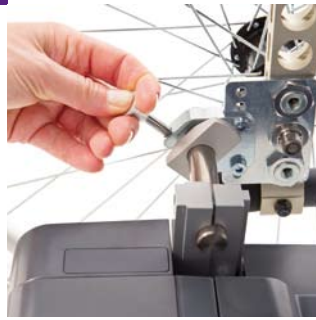
Enkelt att ta bort tack vare systemet med magnetisk kraft.

Egenskaper och tillbehör**viamobil drivenhet**

Med punkteringsfritt, stadigt gummidäck, automatiskt fjäderingssystem för konstant väghållning, eldriven hjullyft

**Tippskydd**

Obligatorisk vid lutningar på > 8 %.

**Enkelt dockningssystem för rullstol****Extra handtag**

I kombination med standardrullstolar för enklare på- och avdocking.

**Batteriladdare**

Automatisk laddare, laddar upp ett tomt batteri på ca 5 h.

**Monteringsats till rullstol**

Tillgänglig för olika typer av rullstolar.

Tekniska data**viamobil**

max. 5,5 km/h



20 km



36V / 6,6 Ah



150 W



2,3 kg

18% (11% med
160kg tung
brukare)13,5 kg
(drivenhet 10,3 kg)**viamobil**

160 kg

Invacare AB
 Box 66 - 163 91 Spånga - Sverige
 Tel: +46 8 761 70 90
 Fax: +46 8 761 81 08
 sweden@invacare.com
 www.invacare.se

© 2011 Invacare International Särll.
 Alla rättigheter är reserverade för
 Invacare.

All information i denna broschyr
 stämmer vid tryckningstillfället.
 Invacare förbehåller sig rätten att
 ändra produktinformation utan
 föregående meddelande.

Alber viamobil - SE - 11/2011

**Yes, you can.[®]**