

Invacare® | **Orion™**



Stabil, tillförlitlig och slitstark

*Invacare **Orion** är utrustad med flera nyheter i syftet att öka säker- och pålitligheten. Vare sig du tycker om att ta en tur till affären eller njuter av en längre åktur, skänker **Orion** en bra grund till större frihet och oberoende. Med ergonomi i kombination med stil är **Orion** det uppenbara valet för en avkopplande och pålitlig färd.*



Yes, you can.®



Färdas längre

Oavsett underlag så kommer du att trivas under din åktur. Den kraftfulla motorn, fjädringen både fram och bak, samt de stora hjulen hjälper dig att smidigt övervinna hinder och ojämnheter på marken. Det unika belysningsystemet inkluderar en enkel och synlig DUAL-lampa, som ger ökad synlighet. Blinkern indikerar på att du tänker svänga, den stängs automatiskt av efter 20 sek. Belysningen är konstruerad så att om en lampa skulle gå sönder så påverkas inte någon av de andra lamporna av detta, utan fortsätter att lysa obehindrat.

Enkelheten

Det är enkelt att ta bort batterikåpan, vilket ger en snabb åtkomst till batterier, elektronik, motor och kablage vid en eventuell service. Drivenheten och elektroniken är skyddade mot vattentänk vilket garanterar en god funktion av scootern, då de skyddas mot smuts och väta och på så sätt förhindras att onödiga tekniska fel behöver uppstå.

Pålitlig och driftsäker

Det ergonomiskt utformade styret på **Orion** erbjuder avlastning för axlar och armar under längre åkture. Handbromsen och handtaget för att justera styrsamsvinkel sitter lättillgängligt. **Orion** är utrustad med hastighetsreducering som sänker hastigheten då du svänger. Tillsammans med den mjuka svängbara sitsen, som erbjuder en bra körställning och som underlättar i- och urstigning

från scootern, ges grunden till en njutbar åktur. Du uppmärksammas på att batterierna behöver laddas, både genom en ljudsignal och att batteriindikeringslamporna börjar att blinka. **Orion** har genomgått omfattande tester hos oberoende testinstitut, bl a TÜV i Tyskland. **Orion** följer den Medicin Tekniska Standard och norm som ligger till grund för denna typ av hjälpmedel i Europa.

Egenskaper och Tillbehör



Styrstångens vinkel
kan justeras steglöst för att passa individuella behov.



Ergonomisk utformade handtag
Motverkar utmattning i armar och händer under längre åkture.



Handbroms
Försäkrar omedelbar inbromsning om det krävs.



Bromsljus
Bromsljuset aktiveras då man släpper gasreglaget. Det varnar bakomvarande att Scootern saktar in.



Egenskaper och tillbehör



2-steps frikopplingspak

Denna säkerhetsåtgärd förhindrar att Scootern ofrivilligt frikopplas.



Inbyggda stänkskydd

Skyddar elektronik och drivenhet från vatten och smuts.



Automatisk hastighetsreduering

Hastigheten reduceras automatiskt då man svänger.



Fjädring

Ställbar fjädring fram och bak ger en bra körkomfort.



Kryck & käpphållare

Har plats för 2 kryckor eller käppar.



Låsbar packbox



Fjädringsmodul

Ger en ytterligare ökad komfort.



Dryckeshållare



Förvaringsöverdrag

Håller Scootern ren och torr.



Alternativ laddning

Ta enkelt ur batterierna och ladda dem separat med ett enkom batterikitt.

Tekniska data


3 hjulig	510 mm	470 mm	420 - 495 mm	510 mm	625 mm	1270 mm
4 hjulig	510 mm	470 mm	420 - 495 mm	510 mm	625 mm	1290 mm

3 hjulig	103 kg	71 kg	136 kg	2 x 50 Ah	2250 mm	80 mm
4 hjulig	110 kg	78 kg	136 kg	2 x 50 Ah	2800 mm	80 mm

3 hjulig	90 mm	8°	42 km	10 / 12 km/h	10 km/h : 240 W / 600 W*
4 hjulig	90 mm	12°	42 km	10 / 12 km/h	12 km/h : 250 W / 1200 W*

* Maxeffekt

Kåpornas färg

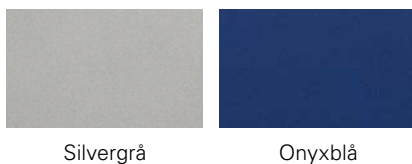

Silvergrå

Onyxblå

Klädsel



Svart vinyl

Invacare AB
 Box 66 – 163 91 Spånga - Sweden
 Kundservice: 08-761 70 90
 Fax 08-761 81 08
 sweden@invacare.com
 www.invacare.se

© 2012 Invacare International Sär.
 Alla rättigheter är reserverade för Invacare.

All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.

Orion - SE - 09/2012

