


DEXCOM

G4[®]
PLATINUM

Symboler och åtgärder

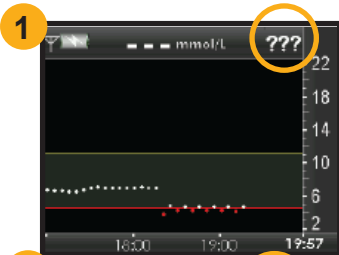

1. Tre frågetecken i statusrutan betyder att mottagaren just nu inte kan tolka de signaler som sensorn skickar. Vanligtvis så börjar mottagaren att visa värden igen av sig själv, men det kan ibland dröja upp till några timmar. Avvakta till dess att du får en uppmaning av mottagaren att t ex göra en ny kalibrering. Kalibrera **INTE** under tiden det står "???" i statusrutan.



2. Timglas i statusrutan innebär att mottagaren har upptäckt ett problem med signalen från sensorn. Vänta minst 30 minuter på en ny uppmaning från mottagaren. Kalibrera **INTE** under perioder som du inte får värden från mottagaren.



3. Sensorn kan inte kalibreras för närvarande. Vänta 15 minuter och gör en ny kalibrering och avvakta 15 minuter. Om skärmen fortfarande visas så gör ytterligare en kalibrering och vänta 15 minuter. Om inga sensorvärden visas i mottagaren efter dessa åtgärder så behöver sensorn bytas ut. Skriv ner serienumret på sensorn (finns under "vingen" på sensorplattan) och kontakta oss för reklamation.



4. Sensorn kan inte kalibreras för närvarande. Vänta minst en timma och gör en ny kalibrering. Om inga sensorvärden visas i mottagaren efter den här åtgärden så behöver sensorn bytas ut. Skriv ner serienumret på sensorn (finns under "vingen" på sensorplattan) och kontakta oss för reklamation.



5. Fel på sensor innebär att mottagaren har identifierat fel på sensorsignalen och avslutar sessionen. Tryck på VÄLJ för att bekräfta och byt sensor. Skriv ner serienumret på sensorn (finns under "vingen" på sensorplattan) och kontakta oss för reklamation.



Tips och viktig information!

- Ladda mottagaren var 3-5:e dag, ca 3-5 timmar. Ladda i ett vanligt eluttag eller via en datorn. Stäng luckan för USB-kontakten när du laddat klart.
- Kontrollera dagligen att häftan sitter fast ordentligt. Förstärk vid behov. Tejpa runt sändaren, inte över, se bild.
- Du kan bada och basta med sändaren och sensorn på.
- Räckvidden mellan sändaren och mottagaren är minst 6 meter.
- Paracetamol (t ex Alvedon, Curadon) kan påverka glukosvärdena och ska undvikas under mätperioden. Välj andra preparat vid behov av smärtlindrande eller febernedsättande läkemedel. Rådgör vid behov med din diabetesläkare.

OBS! För mer detaljerad information hänvisas till Användarmanualen.